

先生方からのコメント - 口腔衛生管理について -



災害時は誤嚥性肺炎が増加します。オーラルケアが不十分な状況が続くことが原因と考えられます。

足立 了平先生
神戸常盤大学短期大学部 特命教授(口腔保健学科)



菌の温床となりやすい、舌・口腔粘膜も普段のホームケアにプラスワンのアイテムでより効率的なオーラルケアを。

鈴木 秀典先生
サンスター財団 サンスター千里歯科診療所 所長



感染症予防には口腔衛生管理の徹底が重要です。

上原 弘美先生
神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科 准教授



舌と粘膜もブラシでケアして、感染を予防し口腔機能を維持しましょう。

澤田 美佐緒先生
神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科 助教

バトラー お口にやさしいブラシシリーズ

お口にやさしいブラシシリーズは患者さんのセンシティブな口腔内に寄り添った、安心・安全に配慮したシリーズです。

舌を清潔に保つことで口臭予防

口臭の原因の多くは舌苔から発生します。また舌苔は細菌の温床です。舌苔を除去して口臭を予防し、お口のトラブルを防ぎましょう。



さまざまな医療シーンで活躍中

介護・訪問診療時において、ご自身で口腔ケアできない患者さんへのご使用にも適しています。



患者さんの口腔状態に適したオーラルケア製品をお選びください。

口腔状態	比較的健常な方		重度の口腔疾患の方	
	対象部位	舌	歯・ハグキ	舌・ハグキ
品名		舌ブラシ	お口にやさしいブラシ	スポンジブラシ※
				バトラーハブラシ#03S※

※スポンジブラシ・#03Sの製品情報につきましては別途バトラー SGシリーズのカタログをご用意しております。弊社またはお取引の歯科業者様にお問い合わせください。

商 品 名	規格	〈希望〉 小売価格 (税抜)	入数		コード	サイズ	
			内装 コ	外装 コ	JANコード	個装／幅・高さ・奥行mm	重量g
					内装／ITFコード	内装／幅・高さ・奥行mm	重量g
コンピューター登録名					外装／ITFコード	外装／幅・高さ・奥行mm	重量kg
バトラー お口にやさしいブラシ	やわらかめ	380円	6	120		36×225×19	19
					24901616215515	73×230×61	139
					14901616215518	384×251×262	3.1
ハ*トラー オクチニヤサイシB							
バトラー やさしい舌ブラシ [やわらかタイプ]	やわらかタイプ	300円	12	72		42×230×16	18
					24901616215355	118×235×65	245
					14901616215358	248×258×213	1.7
ハ*トラー ヤサイシシタB							

商品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号

TEL 072-682-4733

FAX 072-684-5669

®登録商標 BUTLER は登録商標です。2020年8月作成



バトラーやさしい舌ブラシ

バトラーお口にやさしいブラシ

BUTLER



バトラー やさしい舌ブラシ

このような患者さんにオススメ

- 舌苔が付着している方



- (舌苔による)口臭が気になる方



ポイント バトラー やさしい舌ブラシは舌苔を“やさしく”除去できるので、患者さんのデイリー使用にもおすすめです。

舌ブラシの使用方法



Step1
口腔内が乾燥している場合はうがいや保湿剤で舌を潤す。



Step2
舌を前に出し、少し下を向かせ、舌ブラシを奥から手前に軽く動かす*1。この動作を数回繰り返す。



Step3
うがい*2をおこない、汚れを吐き出します。

*1 無理に力をいれてはいけません。また1回で除去しようとはせず、時間をかけてゆっくり除去していきます。
*2 口腔内の細菌を減らし清潔を保つため、殺菌剤配合の洗口液をおすすめします。

製品特徴

Point 1 やわらかブラシ&やわらかラバーのダブルアクションでしっかり舌苔を除去

Image 舌の構造


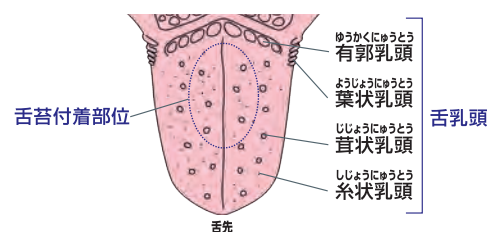


Image やわらかブラシが汚れを落とす



Image やわらかラバーが汚れをかき取る

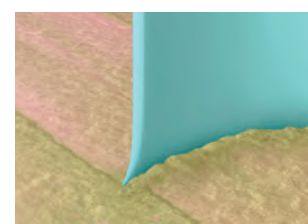

Point 2 臨床現場の歯科医師によるハンドル設計
セルフケアでも介助でも安定して磨きやすい


Image セルフケアの持ち方



Image 介助の持ち方



Point 3 セルフケアや介助での使いやすさを考慮した
アングルネック設計

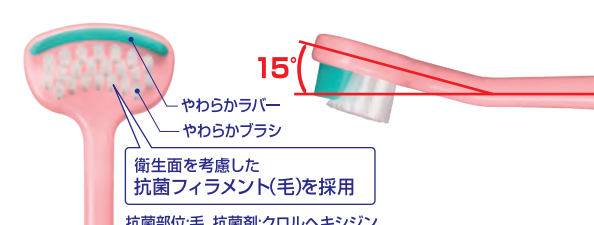


製品特徴

Point 1 ブラッシング圧を分散し、やさしく磨ける幅広ヘッド

幅広ヘッドは一般的なコンパクトヘッドよりも
ブラッシング圧を分散

Data 平均荷重※ ※同じ力(200g)をかけて測定した場合の、
ブラシ面にかかる平均荷重を比較

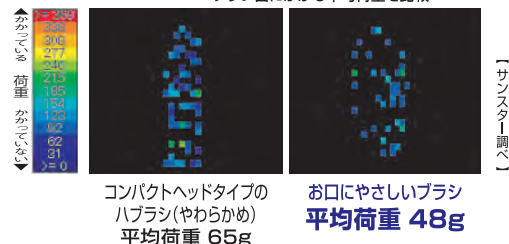

Point 3 効率的にやさしく磨ける
約4,200本のやさしい極細毛

Image ブラッシングイメージ



Image やさしい極細毛毛先(イメージ)



Point 2 しっかり握れて滑りにくい設計ハンドル

どんなパターンの持ち方でも持ちやすい

Image パームグリップ



Image ベングリップ



Image 介助の場合の持つ位置

