

て
温。

使わない時のキズ・よごれをガード
保護カバー付



親しみやすい丸型デザイン、
手にすっぽり収まるサイズを採用。

主な仕様

販売名	非接触式体温計ミニ
医療機器認証番号	227AFBZX00039000
医療機器クラス分類	管理医療機器 (クラスII)
測定モード	体温 (舌下補正温度)、物体表面温度 (実測温度)、室内温度
体温測定範囲 (測定部位: 額)	+34.0~+42.2°C
体温測定精度	±0.3°C
物体表面温度測定範囲	-22.0~+80.0°C
物体表面温度測定精度	±4%または±2.0°Cのどちらか大きい値
室内温度測定範囲	+10.0~+40.0°C
室内温度測定精度	±2.0°C
最小表示単位	0.1°C
使用環境温湿度	+10.0~+40.0°C、15~85%RH (但し、結露のないこと)
保管環境温湿度	-20.0~+50.0°C、85%RH以下 (但し、結露のないこと)
電源	リチウム電池 (3.0V) × 1個 (CR2032)
寸法	約W46.4×H80.1×D37.7mm (センサー部保護カバー未装着時)
重量	約47g (電池含む/センサー部保護カバー除く)
付属品	取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー
JAN	4983621 800128



Webサイトで更に詳しい情報をご覧ください。
<https://www.nurse-angie.jp/>

製造販売業者

CUSTOM 株式会社カスタム

本社／東日本営業部 関東支店
〒101-0021
東京都千代田区外神田3-6-12
TEL: 03-3255-1117 (代表)
FAX: 03-3255-1137

西日本営業部 関西支店
〒542-0081
大阪市中央区南船場1-6-12
ブルーク長堀橋ビル6F
TEL: 06-6262-9950 (代表)
FAX: 06-6262-9951

お問い合わせ先

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係で実際の製品と本リーフレットの色は若干異なる場合があります。
- 本リーフレットの記載内容は2016年5月現在のものです。
- パピッとサーモ は株式会社カスタムの登録商標です。

©2015 CUSTOM Corporation
Printed in Japan 200603

非接触式体温計ミニ NIR-02

NURSE ANGIE®

全年齢対象

肌に触れない
体温計

おでこで
はかる



原寸大

パピッとサーモ® mini

標準価格：オープンプライス

赤ちゃんから
使える



3種類測定



体温



表面温度



室内温度

※画面はハズコミ合成です。

額に近づけて スムーズ検温。

額から少し離れた位置で「SCAN」を押すと、
額の温度をもとに舌下温度*を表示します。

1～3cmに
近づけて
はかる。




3種類の温度がはかれる！



スープやお粥の
温度に！



カラダの
温度に！

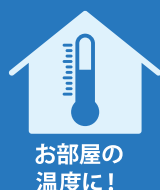

お部屋の
温度に！

*舌下温度： 口の中の温度。わきのしたよりも身体深部の温度に
より近い検温結果が得られます。



肌に触れない 額に近づけて
スムーズ検温。

特にお子様が嫌がる“肌に触れる不快感”
がありません。

最短1秒 待たずに
スピード検温。

ボタンを押したら、すぐに検温完了。
ママにもお子様にも負担をかけません。

3種類測定 3種類の異なる
温度を測定。

料理から室温まで、生活に関わる
さまざまな場面でお使いいただけます。



※身体深部の温度により近い舌下温度を表示します。わきのしたで測る体温計よりも高く測定される
傾向がありますので、予め本器で測定した平常時の体温を知ったうえで、検温してください。

※おでこからの放射熱を測って体温に換算表示する製品です。

皮膚に向けて光や電波を照射する製品ではありませんので、安心してお使いください。

ほかにも！

検温結果
25件

検温結果履歴
25件まで保存



よこれやキズから
守るセンサー部
保護カバー付き



親しみやすい
丸型デザイン



見やすい
画面表示

毎日の検温に！
家族みんなに
スムーズ検温

食品の温度に！
お子様のミルクなどの
温度目安になります

気になる室温に！
1分間の待機状態で
室温測定に自動切替