


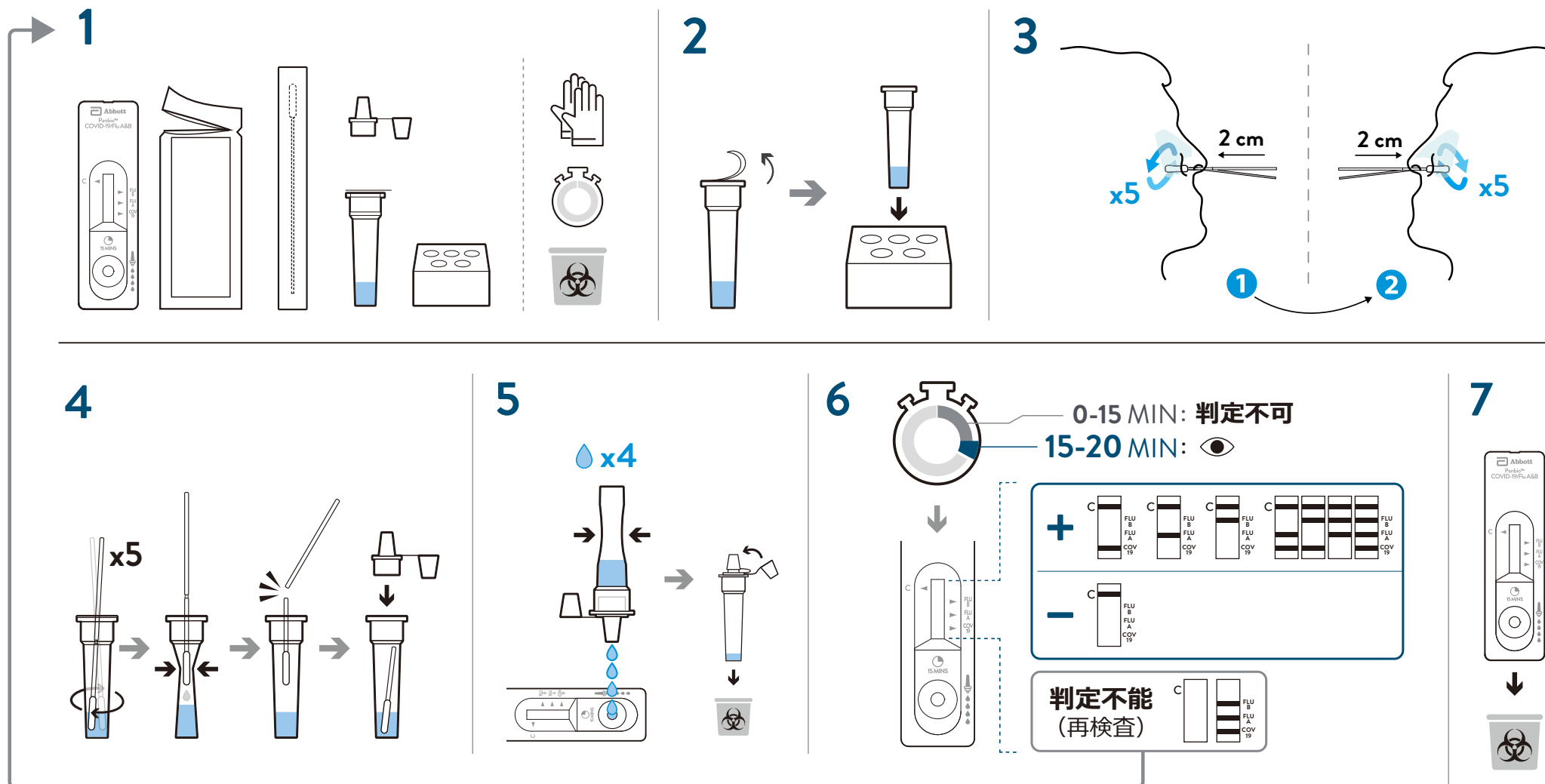

製造販売元

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

千葉県松戸市松飛台357

〈問い合わせ先〉


TEL **0120-1874-86** (受付時間 9:00~17:00 土、日、祝日を除く)

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社 お客様相談室


〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1

本資料に記載の情報は2026年3月時点の電子添文に基づいています。

鼻腔ぬぐい液の検体採取方法

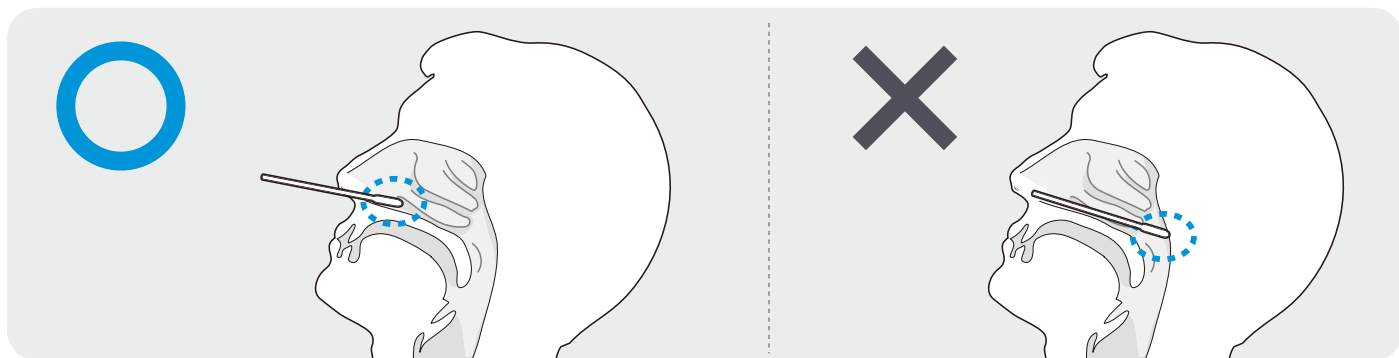

- ① 滅菌綿棒は**口蓋と平行**にして、鼻孔にゆっくり挿入。

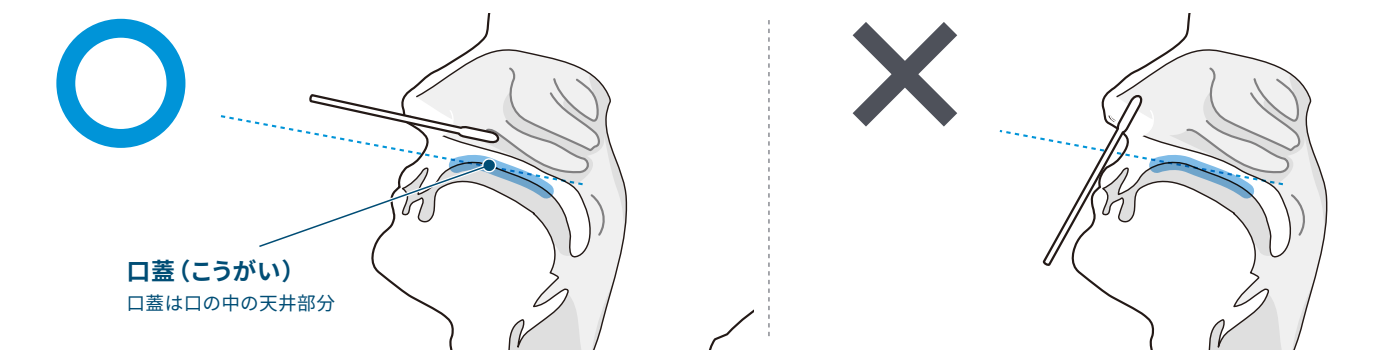

- ② **最初に抵抗を感じる部分** (鼻甲介部、約2cmの挿入) まで。

「約2cm」は一般的な目安です。小児など顔の小さい患者さんでは、無理な挿入を避け、鼻腔内でわずかな抵抗を感じる位置 (鼻甲介付近) を目安にしてください。



- ③ **鼻腔壁を擦る**様に5回転。同じ綿棒でもう一方の鼻腔で繰り返す。



<お問い合わせ先>

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社 お客様相談室
TEL : 0120-1874-86 (ナビダイヤル番号「2」)

© 2026 Abbott. All rights reserved. ここで表示される全ての商標は Abbott、およびそのグループ会社が保有する商標です。表示されている画像はイメージです。
RDx-26000719-02 03/26

Panbio™ COVID-19/Flu A&B
パネル (鼻腔ぬぐい液用)
製品操作方法

