

ご購入ありがとうございます

乳幼児の身長測定のための測定マット**seca 210**のお買い上げをお喜び申し上げます。
測定マット**seca 210**は、小児科医院・小児科病院での診察、または助産婦・小児科医の往診での使用を目的に作られた製品です。
本測定マットは巻広げが可能で、場所をとりません。
その上、マットの頭部には穴があり、壁に掛けることが可能です。

安全にご使用いただくために

新しい測定マットをご使用になる前に、是非、下記の安全性についての注意事項に目をお通しください。

取扱い説明書の項目にご注意ください。

- 乳幼児を測定マットの上に寝かせたままで放置することは、絶対に避けてください。
- 身長の測定は、乳幼児が落下する危険のない台の上で行ってください。
- 感染性の病気の伝染を避けるため、身長計を清潔に保ち、定期的に消毒することを忘れないでください。
- 身長の厳密な測定のためには、二人目の測定者が補佐することが理想的です。


操作方法

測定の手順:

1. 乳幼児を測定マットの上に寝かせてください。乳幼児の頭を測定マットの頭部ストッパー (1) に置いてください。
2. 乳幼児の足の方向へ、足部ストッパー (2) を右手で引いてください。乳幼児が動かないように、左手で軽く押さえてください。

3. 左手で乳児のひざをマットに慎重に軽く押さえて、脚が伸びるようにしてください。
4. 右手で足部ストッパー (2) を乳児の脚の裏に直角に設定してください。
5. 測定マットのマークの位置で身長を読み取ってください (3)。

上記の測定法に従えば、誤差が $\pm 5\text{mm}$ 以下の優れた精度度に達します。

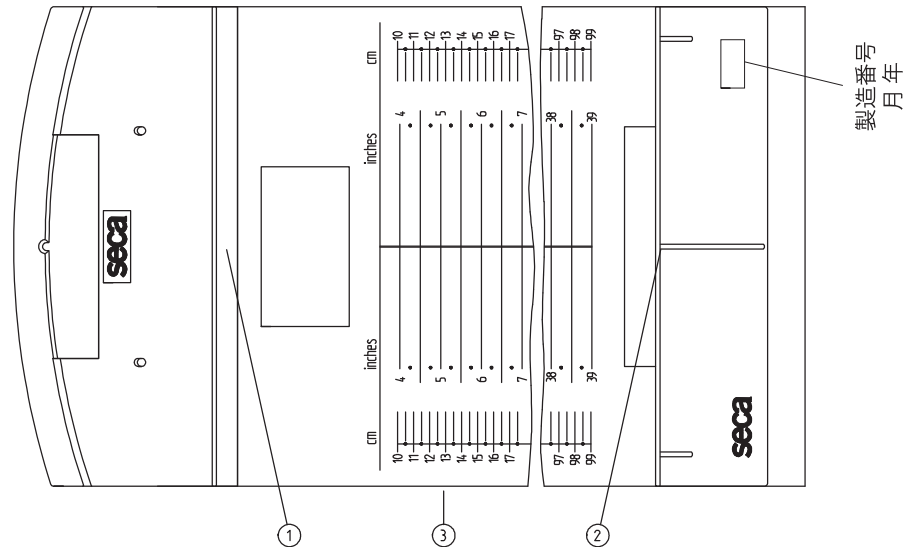

クリーニング

測定マットを、必要に応じて住居用洗剤または市販の消毒剤で拭いてください。メーカーの注意事項を守ってください。

技術データ

計測範囲: 100 - 990 mm /
4 ~ 39 インチ
目盛単位: 5 mm / 1/4 インチ
精密度: ± 5 mm
製品寸法
(巾X高X奥行): 300 mm x 140 mm x
1340 mm
本体重量: 約 500 g
周囲温度: +10 °C ~ +40 °C
93/42/EWG (EC
医療機器基準) によ
る医療機器製品: 第一級計測器

廃棄処分

測定マットが使用されなくなった場合は、管轄の公共自治体の特殊ごみ処理の担当部門から、必要な処理についての指示を得てください。

保証

材質または製品の欠陥については、製品が配送されてから一年間の保証期間が適用されます。乾電池、コード、AC アダプター、充電式電池などの可動の部品はこれにあてはまりません。保証が適用される欠陥は無料で修理されます。その場合、領収書の提示が必要です。この条件にあてはまらない要求には応じられません。お客様の住所以外の場所からの運送費は、お客様の負担になります。運送中に生じた欠陥についての保証は、運送が完全な本来の梱包状態にあり、計測器が本来のパッキングで保護されて固定されていた場合にのみ適用します。そのため、梱包部材は全て保管してください。seca 社から資格を与えられた担当者以外によって器械内部があげられた場合の保証は負いかねます。海外のお客様の商品保証のケースは、製品をお求めになられた際の担当の店員がうけたまわります。

seca 株式会社

〒262-0011

千葉県千葉市花見川区三角町94-2

電話: 043-216-0850 (代表)

ファックス: 043-216-085

seca corporation

94-2 Sankakucho, Hanamigawaku,

Chiba City, Chiba 262-0011, Japan

Phone: +81 (0) 43-216-0850

Fax: +81 (0) 43-216-0851