

外来

●医研式スプレー



S ノズル付き (約9cm)
SP701

L ノズル付き (約17cm)
SP706

薬液層とゴム球が一体化したたいへん便利な万能スプレーです。ノズル軸の中に針金が入っていますのでフレキシブルに曲がります。短い方は鼻用スプレーとして、長い方は喉頭用スプレーとして使えます。また消毒用アルコールを入れて局部消毒用途にも使えます。

【滅菌消毒方法】

◆胴体(ガラス瓶とゴム球、ゴム台) :

- ・アルコール綿拭拭。



◆スプレー先ノズル :

- ・消毒用アルコールの空噴霧後、外側をアルコール綿拭拭。
- ・外した後、ノズル全体を消毒用アルコールに浸漬も可能。
- ・チューブは引張らないで下さい。

◎オートクレーブは各パーツ共に不可です。

「使用上の注意」

- ルゴール液のような粘性の高い薬液で噴霧しにくい時は、水等で薄めると噴霧しやすくなります。
- 乾燥すると結晶化する薬は、使用後に瓶から出して他の容器に移し替えてください。また、良く洗浄して薬の結晶による目詰まりを防止してください。
- 使用後に消毒用アルコールを入れて噴霧すると内部の消毒と目詰まりの予防に効果があります。

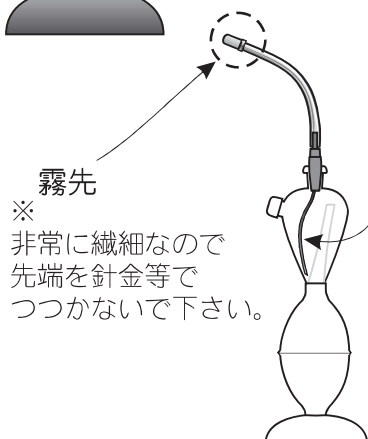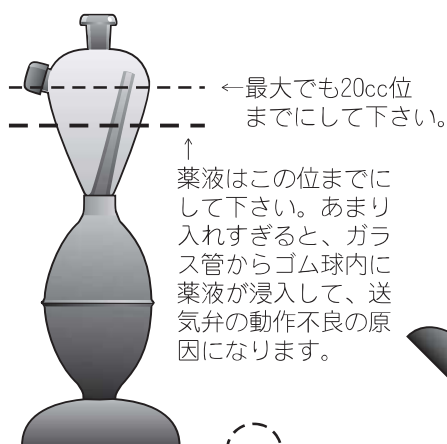

吸上げチューブ

- ※
吸上げチューブは引
張らないで下さい。
吸上げチューブは薬液
溜の方に入れるよう
にしてください。ガラ
ス管の中に入ると薬
液を噴霧出来ませ
ん。

