



BARD® I.C. Silver Foley Tray B

トレイ型閉鎖式導尿システム

バード® I.C. シルバーフォーリートレイ B


〈バクティガード®*シルバーコーティング・バード®親水性コーティング〉

抗菌泌尿器用カテーテル



トレイ型閉鎖式導尿システム

- フォーリーカテーテル留置に必要な物品を全て無菌的にセットしました。カテーテルと採尿バッグが赤いシール(タンパーエビデントシール)であらかじめ接続されている、トレイ型閉鎖式導尿システムです。

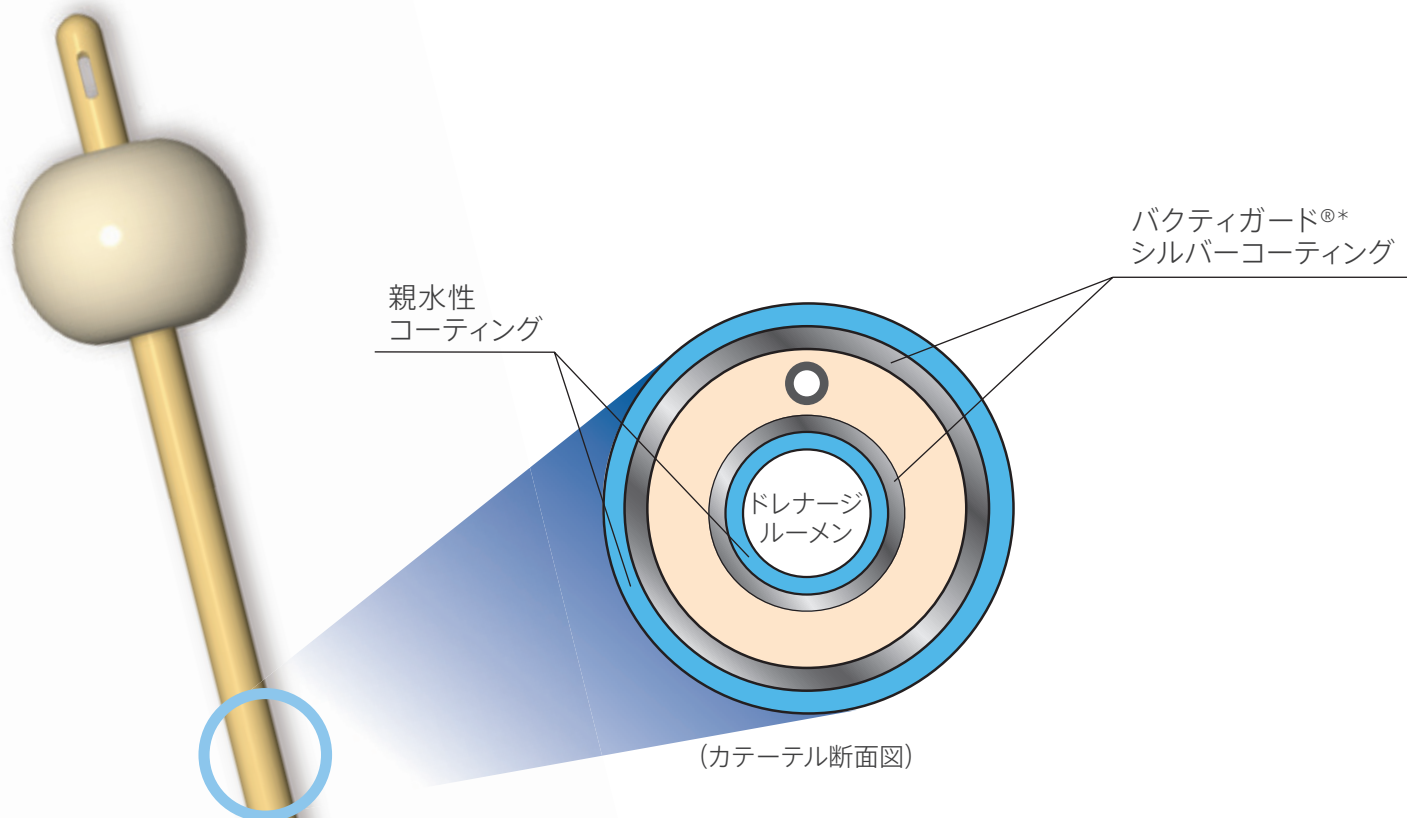

二重コーティングによりカテーテル表面の細菌増殖をコントロール

■ バクティガード®*シルバーコーティング

カテーテルの内外表面に施されたシルバー(銀)コーティングは、細菌コロニーの広がりを抑えることに有効であるとされています。^{1,2)}

■ 親水性コーティング

尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成することで、カテーテル挿入や抜去に伴う尿道粘膜への刺激や、留置中の違和感の軽減につながります。

■ 必要物品をトレイ化

- 留置に必要な物品をコンパクトにセット。物品準備にかかる時間と手間を省き、留置処置を効率よく行うことができます。
- ポビドンヨード液は、中水準消毒薬です。



■ タンパーエビデントシール


あらかじめカテーテルと採尿バッグが接続されていることにより、接続部からの細菌の侵入を防ぎます。³⁾ また、閉鎖性の確認ができ、体動などによる不意の離脱を予防できます。

ORDERING INFORMATION

販売名：バード I.C. シルバーフォーリートレイ B

承認番号：20900BZY01024000
クラス分類：[3] 高度管理医療機器
一般的名称：抗菌泌尿器用カテーテル

閉鎖式採尿バッグ




カタログ番号	規格	包装単位
7760012LR	12Fr	10mL 10入
7760014LR	14Fr	
7760016LR	16Fr	
7760018LR	18Fr	
7760020LR	20Fr	
7760022LR	22Fr	
7760024LR	24Fr	

セット内容 ☐シルバールブリキスフォーリーカテーテル
☐ラウンドウロバッグ 2,000mL
☐共通品

償還区分：膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム
在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用
ディスプレイカテーテル2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム

採尿バッグなしタイプ



カタログ番号	規格	包装単位
7764012L	12Fr	10mL 10入
7764014L	14Fr	
7764016L	16Fr	
7764018L	18Fr	
7764020L	20Fr	

セット内容 ☐シルバールブリキスフォーリーカテーテル
☐共通品

※このタイプは閉鎖式導尿システムではありません。

償還区分：膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ) 標準型
在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用
ディスプレイカテーテル2管一般(Ⅲ) 標準型

精密尿量計付閉鎖式採尿バッグ



カタログ番号	規格	包装単位
7730012L	12Fr	10mL 5入
7730014L	14Fr	
7730016L	16Fr	
7730018L	18Fr	

セット内容 ☐シルバールブリキスフォーリーカテーテル
☐ユーリノメーターバッグ 350
(精密尿量計 350mL / 採尿バッグ 2,000mL)
☐共通品

償還区分：膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム
在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用
ディスプレイカテーテル2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム




カタログ番号	規格	包装単位
7750014L	14Fr	10mL 5入
7750016L	16Fr	
7750018L	18Fr	

セット内容 ☐シルバールブリキスフォーリーカテーテル
☐ウロメーターバッグ 350 ため型
(精密尿量計 350mL / 採尿バッグ 2,000mL)
☐共通品


償還区分：膀胱留置カテ2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム
在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用
ディスプレイカテーテル2管一般(Ⅲ) 閉鎖式導尿システム

共通品

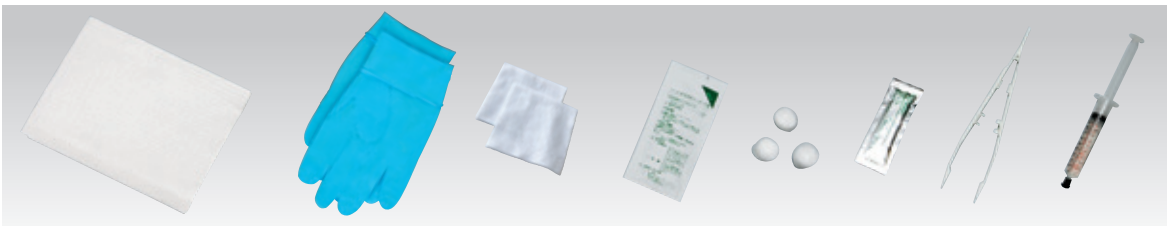

セット内容
☐シーツ
☐手袋
☐不織布(2枚)
☐バード10%ポビドンヨード液
☐綿球(3個)
☐水溶性潤滑剤
☐プラスチック製セッシン
☐滅菌水入りシリンジ

関連商品

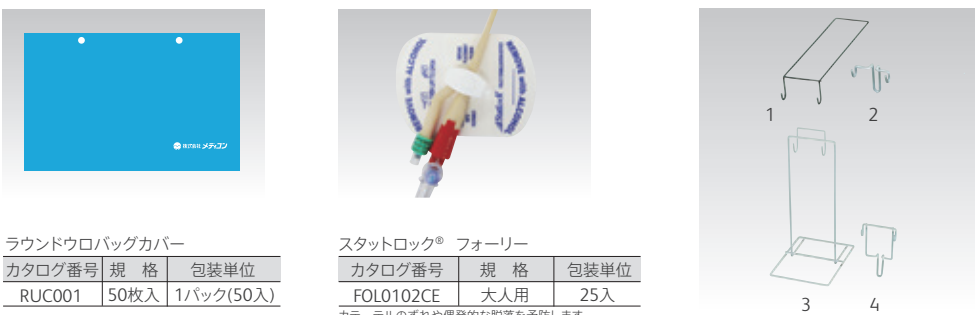

ラウンドウロバッグカバー

カタログ番号	規格	包装単位
RUC001	50枚入	1/パック(50入)

スタットロック® フォーリー

カタログ番号	規格	包装単位
FOL0102CE	大人用	25入

カテーテルのずれや偶発的な脱落を予防します。

採尿バッグ専用ハンガー

カタログ番号	規格	包装単位
1 UBH001	差し込みタイプ	1入
2 UBH002	穴用タイプ	
3 UBH004	床式タイプ	
4 UBHL001	差し込み穴式タイプ	

＜参考文献＞
1) H.Liedberg, T.Lundberg, P.Ekman. Refinements in the Coating of Urethral Catheters Reduces the Incidence of Catheter-Associated Bacteriuria. *Eur Urol* 1990;17:236-240
2) Donald G. Ahearn, Deanne T. Grace, Matthew J. Jennings, Roya N. Borazjani, Karen J. Boles, Laura J. Rose, Robert B. Simmons, Ejem N. Ahanotu. Effects of Hydrogel/Silver Coatings on In Vitro Adhesion to Catheters of Bacteria Associated with Urinary Tract Infections. *Current Microbiology* 2000;41:120-125
3) Guideline for Prevention of Catheter-associated Urinary Tract Infections 2009.

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・*バクティガード®シルバークーティング技術は、Bactiguard AB社により使用許諾されています。

製造販売業者
株式会社メディコン
本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8
☎06(6203)6541(代)

バクティガードは、Bactiguard AB社の登録商標です。
© 2019 BD. BD、BDロゴおよびその他の商標は Becton, Dickinson and Company が所有します。
2022.2.3.000

