


コンフィット Comfit



患者さんのために。
適切なポジショニングを
サポートします。

ポジショニングピロー
Positioning Pillow

患者さんの安楽のために。

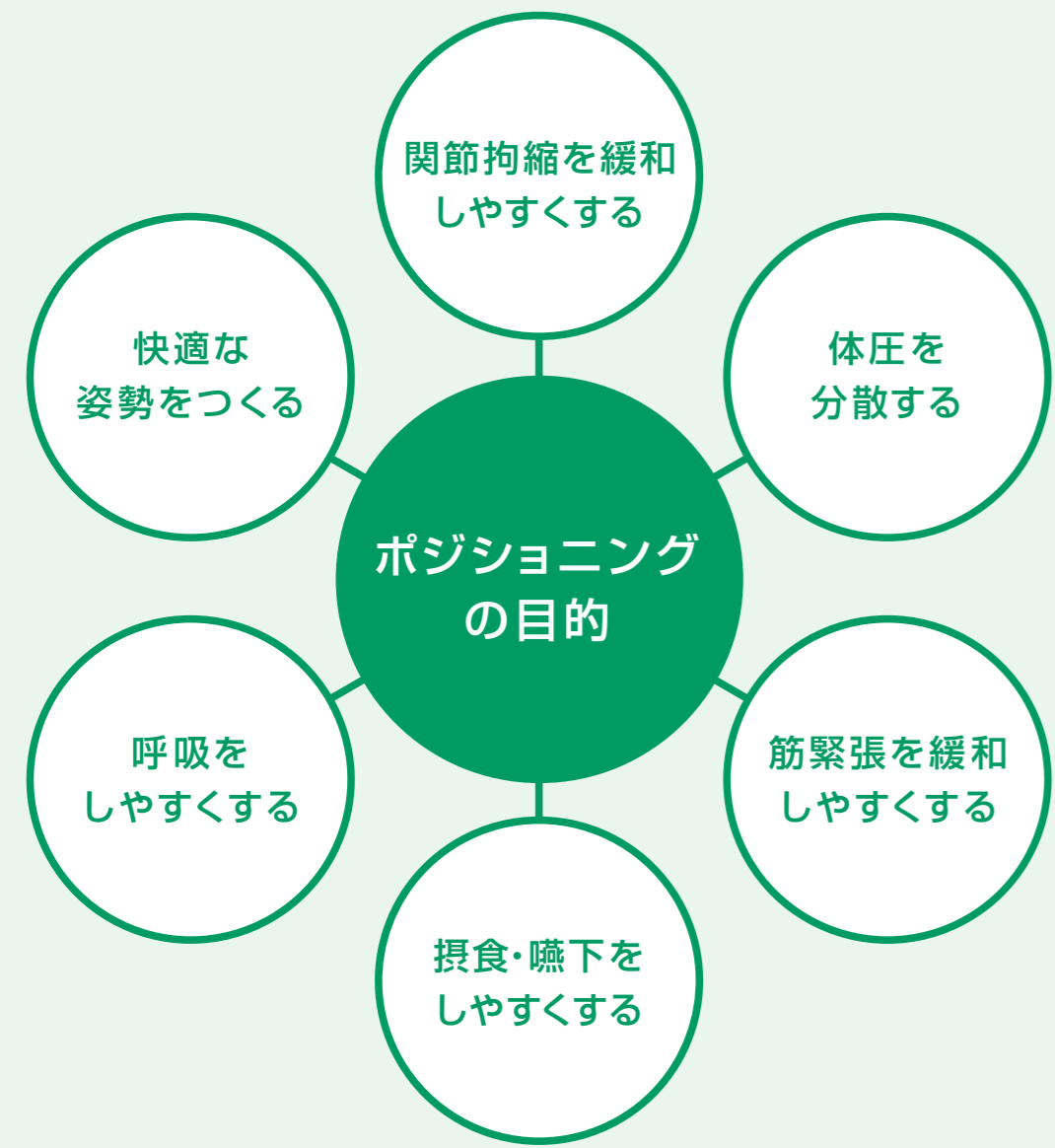


ポジショニングの目的は、体圧分散、摂食・嚥下や呼吸など身体機能の活性化、ストレス軽減などのために、体位変換や良肢位保持を行うことです。患者さんの安楽のためのポジショニングを、アルケアは商品とサービスを通じてサポートしていきます。



《コンフィット》には、αPLAの技術・ノウハウが活かされています。

αPLA
アルファプラ

αPLA (アルファプラ) は株式会社タイカの床ずれ防止の総合ブランドです。

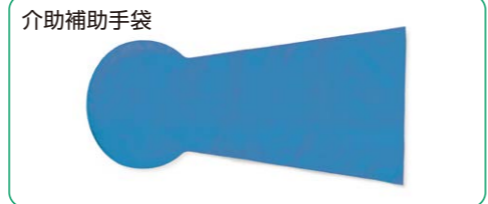

**ポジショニング
院内勉強会のご案内**

「コンフィット」や「リジャスト・グローブ」を用いたポジショニング院内勉強会を貴院にて開催させていただきます。

このようなご要望をお持ちの方に

- ポジショニングに興味があり、正しい知識を身につけたい
- 適切なポジショニングスキルを院内で共有したい
- 使用シーンに応じて適切なポジショニングピローを使い分けたい

お問い合わせ

コールセンター ☎ **0120-770-863** 土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00

コンフィット Comfit

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
		サイズ	重量		
ジャンボ	19661	約83cm×83cm	約2.5kg	1コ	¥22,600
ピロー	19671	約40cm×90cm	約1.0kg	1コ	¥11,700
ウェーブ	19681	約65cm×75cm	約1.0kg	1コ	¥14,600
プーマラン(大)	19691	約50cm×90cm	約1.1kg	1コ	¥13,800
プーマラン(小)	19692	約44cm×74cm	約0.7kg	1コ	¥11,700
スティック(大)	19701	約20cm×60cm	約0.4kg	1コ	¥6,500
スティック(小)	19702	約20cm×40cm	約0.25kg	1コ	¥5,500
ミニ	19711	約30cm×50cm	約0.3kg	1コ	¥5,500

【別売】コンフィット専用 撥水カバー Comfit Water Proof Cover

種類	商品コードNo.	規格(サイズ)	1袋入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
ジャンボ	19721	85cm×112cm	1枚	¥6,000
ピロー	19731	43cm×115cm	1枚	¥5,000
ウェーブ	19741	67cm×113cm	1枚	¥5,000
プーマラン(大)	19751	80cm×105cm	1枚	¥5,000
プーマラン(小)	19752	68cm×97cm	1枚	¥4,500
スティック(大)	19761	22cm×90cm	1枚	¥4,000
スティック(小)	19762	22cm×63cm	1枚	¥3,500
ミニ	19771	30.5cm×73cm	1枚	¥2,500

【関連商品】リジャスト・グローブ Rejust Gloves

種類	商品コードNo.	規格	1箱入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
—	20371	50cm×24.5cm	50枚	¥5,000

ALCARE
アルケア株式会社
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター
フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00

●本カタログの内容は2019年3月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。




適切なポジショニングをサポートする《コンフィット》

ポジショニングの目的に応じた姿勢保持を実現する
多様な形状と、患者さんの快適性を追求した
素材の組み合わせにより、適切な
ポジショニングをサポートします。

中材 フィット性と保持性を両立


中材には、流動性に優れた「極小ビーズ」と復元性に優れた「わた」を適正なバランスで配合しています。異なる2つの素材を配合することで、体のラインにしっかり密着するフィット性と適切な形状を保ち続ける保持性を両立。長時間使用における患者さんの姿勢保持をサポートします。

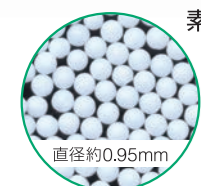

直径約0.95mm



極小ビーズ
流動性

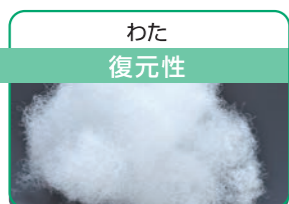

わた
復元性




コンフィット中材

フィット性 保持性


側地 快適な使用感で適切な姿勢をキープ

表地には、ポリエステルとナイロンを3D構造にしたメッシュ素材「フュージョン®」を使用しています。通気性・放湿性に優れているため、長時間の継続使用でも蒸れにくく、熱ごもりなどによる患者さんの不快感を軽減します。また、裏地には、滑りにくい編み構造のポリエステル素材を使用し、使用中のズレや抜けを低減します。

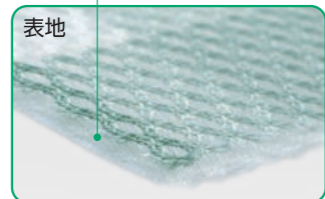

断面

表地

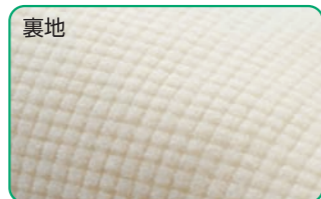

裏地



※フュージョンは旭化成せんい株式会社の登録商標です。

コンフィット専用 撥水カバー【別売】

撥水性に優れた《コンフィット専用 撥水カバー》を使用することで、嘔吐物や排泄物などによる本体の汚染を軽減します。

※繊維製品品質表示規定に則った試験方法で、洗濯100回後も撥水性を維持することを確認しています。



多様な形状で、様々な目的に対応が可能です。

ジャンボ



円背のある方の仰臥位の頭部と背部を支えます。



円背のある方の座位の頭部と背部を支えます。




側臥位の上体を支えます。

ピロー




30°側臥位の背部を支えます。

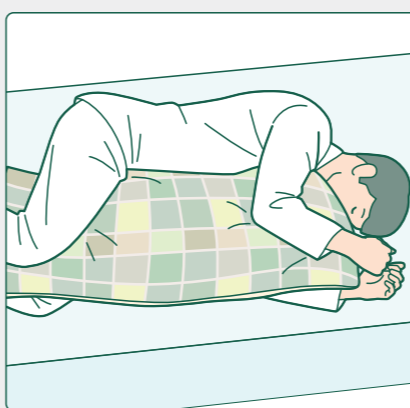


側臥位の上体を支えます。


ウェーブ

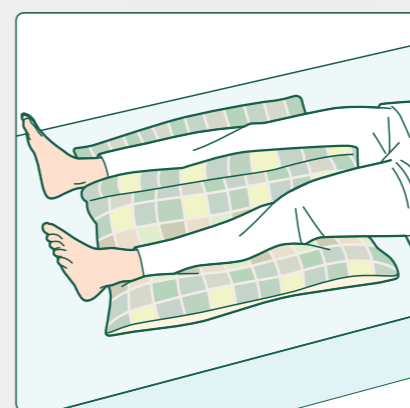

仰臥位の下肢を支えます。

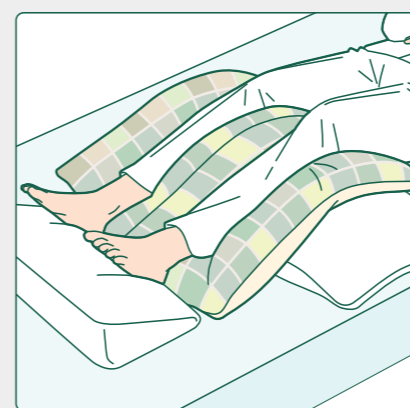

拘縮のある方の仰臥位の下肢を支えます。

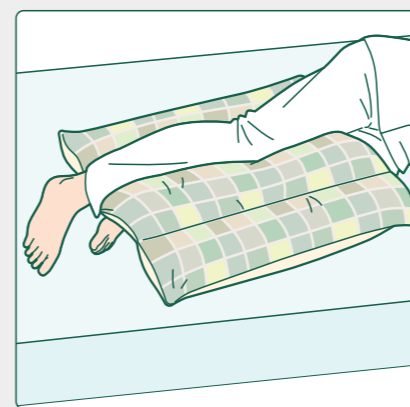


側臥位の下肢を支えます。

ブーメラン(大/小)



ブーメラン(大)


ブーメラン(小)

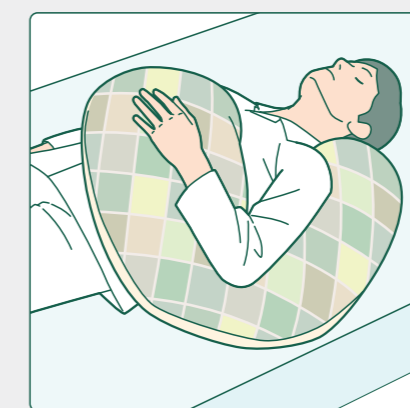

仰臥位の上肢を支えます。



仰臥位の頭部と胸郭を支えます。

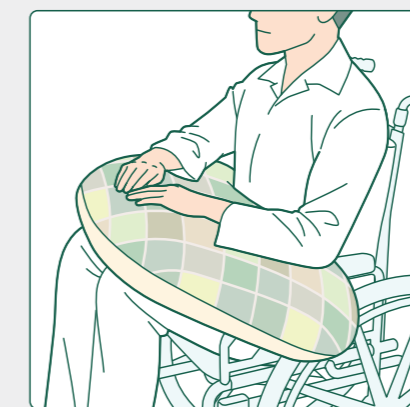


座位の上肢を支えます。

スティック(大/小)




スティック(大)


スティック(小)

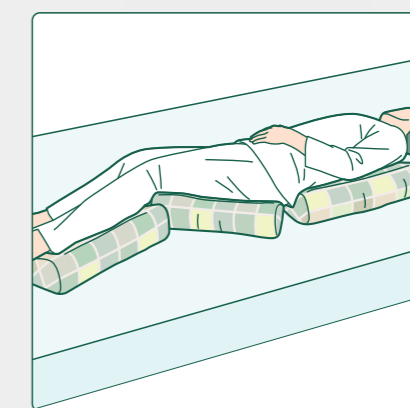

30°側臥位の背部と下肢を支えます。

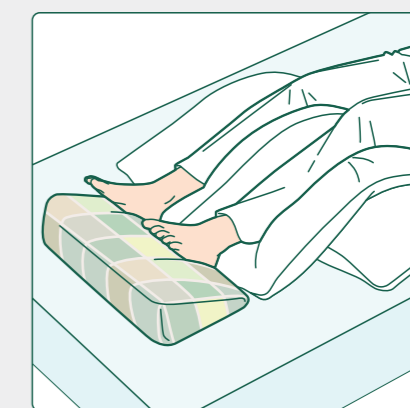


仰臥位の足底を支えます。

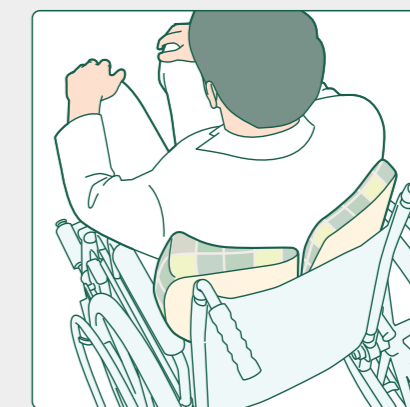

車椅子の座位の背部を支えます。

ミニ

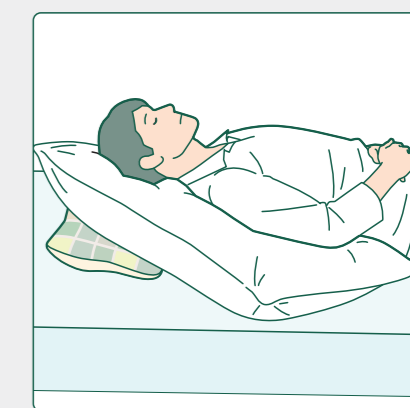

高さ調整をします。



拘縮のある方の局所圧を緩衝します。