

# ニプロ 経腸用輸液セット (ワンタッチロックタイプ)


経腸栄養剤等を  
流すための輸液セット

経腸栄養剤等の  
バッグ(RTH製剤)や  
対応ボトルに  
ロック接続可能




## 使用方法

### 接続

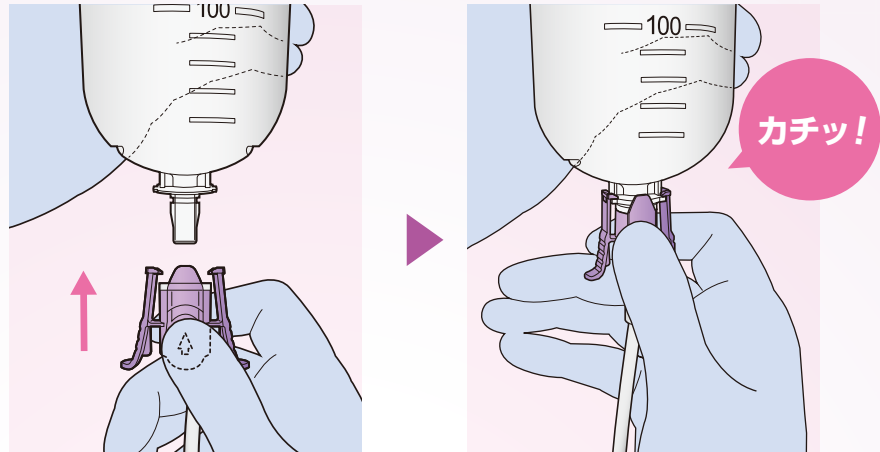

矢印が彫ってある部分を持ち、RTH製剤や対応ボトルのコネクタに接続します。奥まで差し込むと「カチッ」と音となり、ロック状態になります。

### 解除

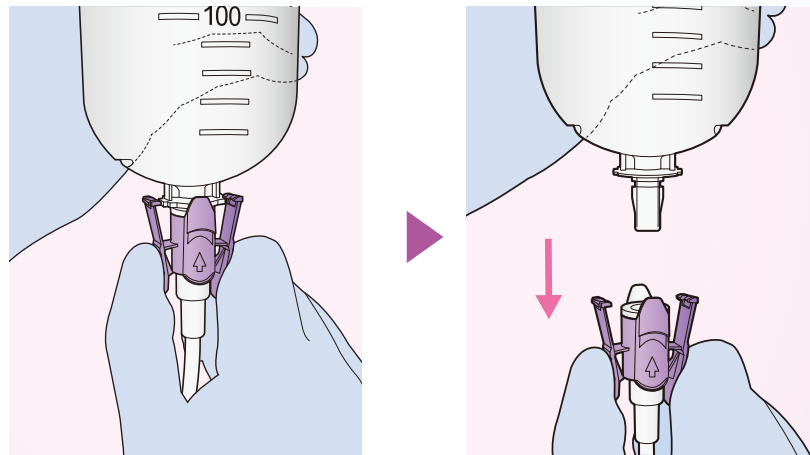

横のつまみをつかみ、下に引っ張りながら接続を解除します。

## 仕様

医療機器届出番号:27B1X0004500048  
医療機器クラス分類:クラスI(一般医療機器)

商品コード	品番	チューブ径(内径×外径)	チューブ長	入数	JANコード
60-152	GSZ-3D5SFHOT-IS3	2.7×4.0mm	1,150mm	50本/箱	4987458601521
60-153	GSZ-3D5SFHLOT-IS3	2.7×4.0mm	1,500mm		4987458601538

### ニプロ経腸栄養ボトル

医療機器届出番号:27B1X00045000051  
医療機器クラス分類:クラスI(一般医療機器)

商品コード	品番	容量	入数	JANコード
60-202	EDP-6OPEN P	600mL	10個/箱	4987458602023



製造販売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号