

# COMFORT OASIS KU-200

ULTRASONIC NEBULIZER

販売名: 超音波ネブライザー COMFORT oasis  
届出番号: 11B1X00009000002

コンパクト、軽量、耐久性、使いやすさ…





使いやすさをコンセプトに  
シンプルな構造になりました。

### 特長

- 自己診断機能  
万一の作動不良の場合にも原因箇所の発見が容易です。
- シンプルな構造  
故障箇所が少なく、清潔が保たれメンテナンスが容易です。
- 電装部分の防水対策  
作用水の誤注入、移動時電装部分の水の進入を防ぎます。

### 操作パネルの説明



- 1 霧化量調節つまみ
- 2 タイマーつまみ
- 3 電源スイッチ


- 温度エラー表示…内部電子部品の温度異常時に、黄色LEDが点灯します。
- 水位エラー表示…作用槽の水位低下時に、黄色LEDが点灯します。
- 電源ランプ…通電状態の時に、緑色LEDが点灯します。

※エラー表示が点灯すると振動子の動作は停止しますが、電源ランプは点灯したまま送風ファンは動作しております。



架台 ¥32,000税別

### 交換部品&オプション

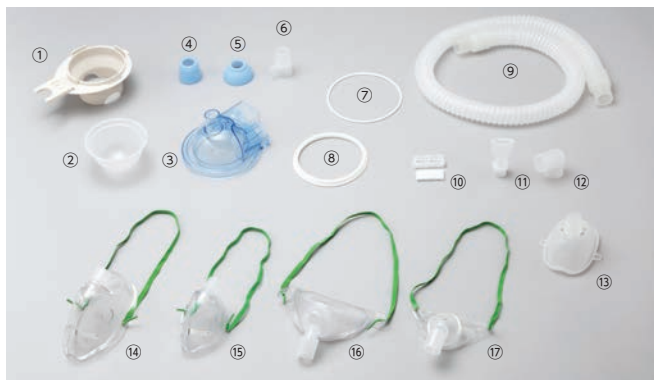

#### 標準セット

- 1 カップホルダー (フック付)
- 2 薬液カップ 5個入
- 3 霧化室 (パッキン付)
- 4 カップ (小) 5個入
- 5 カップ (大) 5個入
- 6 作用槽パッキン 5個入
- 7 霧化室パッキン 5個入
- 8 耐熱送気ホース100cm
- 9 エアフィルター 5個入
- 10 マウスピース 5個入
- 11 L形ジョイント
- 12 マスク (小)

#### オプション

- 6 酸素導入プラグ
- 13 ネプライザーマスク (大)
- 14 ネプライザーマスク (小)
- 15 トラキマスク (大)
- 16 トラキマスク (小)

### 製品仕様

電源	交流100V 50-60Hz
消費電力	51V/45VA (50Hz/60Hz)
動作モード	間欠動作 (30分 ON/30分 OFF)
ヒューズ定格	250V 0.75A (タイムラグ型)
超音波発振周波数	約1.7MHz
最大噴霧量	約3.5mL/分
噴霧粒子径	MMAD 約5.5μm ※生理食塩水30mLで測定した社内データの代表値
最大送风量	18L/分
薬液カップ容量	最大100mL
作用水容量	約200mL
本体質量	約2.5kg (本体のみ)
外形寸法	幅約260×奥行約145×高さ約170mm (突起物除く)
安全装置	サーモスタット、水位センサー、ファンカバー
付属品	少量霧化キャップセット (パイプ、カップ (大)、カップ (小))、薬液カップ (本体装着済み (1個)、交換用予備 (1個))、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、電源コード、2P変換プラグ、ヒューズ (予備、2本)、取扱説明書、添付文書、保証書、ユーザー登録カード

¥42,000税別



最適な提案で医療福祉社会に貢献する  
**新鋭工業株式会社**

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家308-2

営業所  
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-12-5 TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0466  
大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321  
札幌支店 〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3 TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703  
仙台支店 〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10 TEL.022(288)4660 FAX.022(288)4661  
新潟支店 〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋町1-1 TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573  
長野支店 〒390-0835 長野県松本市高宮東5-1-3 TEL.0263(24)2840 FAX.0263(27)3152  
名古屋支店 〒466-0023 愛知県名古屋市昭和区石仏町2-1-40 TEL.052(859)1333 FAX.052(859)1334  
山陰支店 〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708  
岡山支店 〒700-0982 岡山県岡山市北区中島町1-7-8 TEL.086(235)0323 FAX.086(235)0324  
広島支店 〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-10-36 TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760  
福岡支店 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052  
沖縄支店 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-19-6 TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <https://www.shinei.me>

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。



注意

正しく安全にお使いいただくために、  
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。