



THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

内視鏡用スネア

スマートスネア®

より確実なスネアリングをサポート




HOT and COLD

Point


■ ダイレクト感を追求

シース先端を硬くすることでシースの変形を防ぎ、手元の力をスネア先端に伝わりやすくしました。コールドポリペクトミーでは、シャープな切れ味をサポートします。

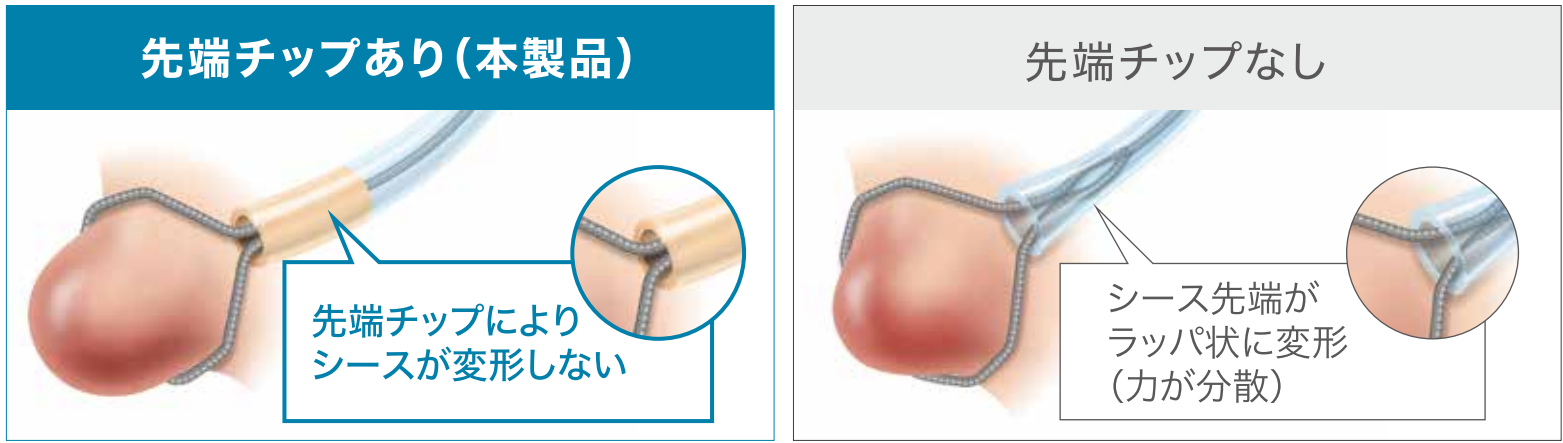

■ 粘膜の捉えやすさを追求

スネア形状は、当社独自の六角形状を採用し、スネア先端が跳ねにくい仕様に仕上げました。また、しなやかな細径ワイヤ(外径0.35mm)は、粘膜の捉えやすさをサポートします。

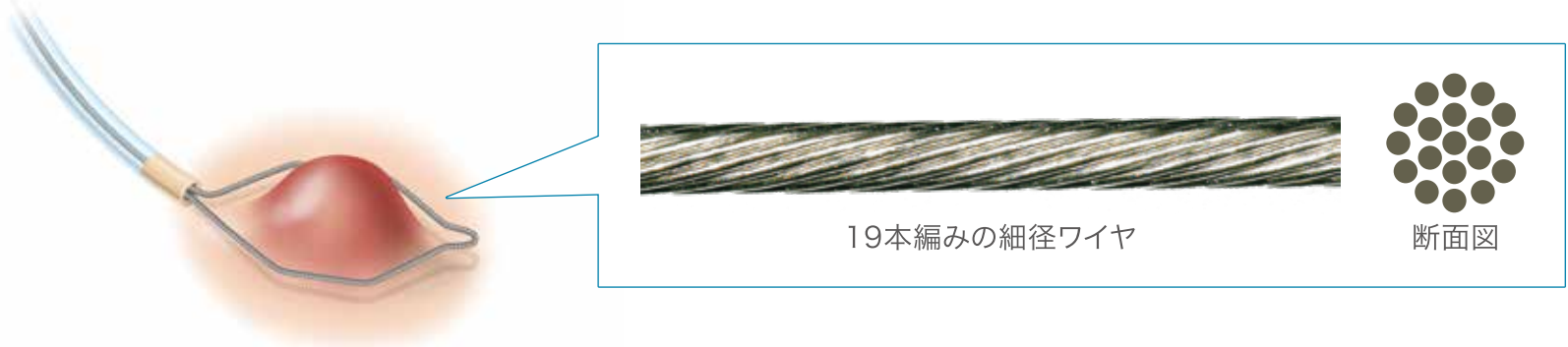


■ HOT/COLD兼用

必要に応じて、通電/非通電の使い分けが可能です。処置中にスネアを交換する必要がありません。



■ 選べるスネア幅

病変の大きさに合わせて2種類から選択できます。

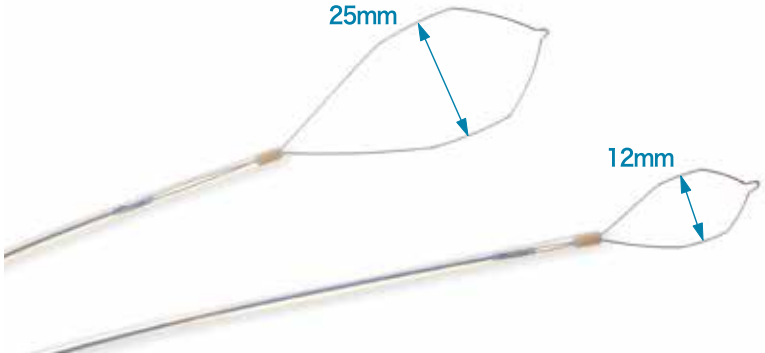

医療機器認証番号 301ALBZX00009000

コード	JANコード	スネア幅	ワイヤ径	先端形状	シース有効長	シース外径	適用チャンネル径	包装単位
16563	4996404165635	12mm	0.35mm	六角形	2200mm	2.6mm	2.8mm以上	10本/箱
16564	4996404165642	25mm						

●イラストはイメージ図であり、製品とは異なる部分がありますので、ご了承ください。●製品改良にともない予告なく仕様、外観など変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

製造販売会社
株式会社トップ
本社:〒120-0035
東京都足立区千住中居町19番10号

東京支店 tel:03-3811-9915

札幌営業所 tel:011-820-8383

千葉営業所 tel:043-214-1641

静岡営業所 tel:054-263-0824

広島営業所 tel:082-246-7651

名古屋支店 tel:052-834-3333

盛岡営業所 tel:019-645-3452

横浜営業所 tel:045-820-3330

京都営業所 tel:075-643-6351

鹿児島営業所 tel:099-214-7320

大阪支店 tel:06-6361-5831

仙台営業所 tel:022-265-3610

金沢営業所 tel:076-268-3370

神戸営業所 tel:078-230-2360

福岡支店 tel:092-472-4233

北関東営業所 tel:048-685-5797

新潟営業所 tel:025-244-2191

高松営業所 tel:087-866-5691

AD012005