

前歯の咬み合わせと傾きを考慮した

ディスポーザブル

キュアケアバイトブロック

固定しやすさと口腔内の圧迫を低減することを目的に設計された
キュアケアバイトブロック

上下フランジの 配置

上顎前歯と下顎前歯の咬み合わせのズレにあわせてフランジ(ツバ)を配置しました。

上下フランジの 角度


上顎前歯と下顎前歯の傾きにあわせてフランジ(ツバ)を傾けました。

内筒のない ソフト設計


シリコンゴム製には硬質の内筒がないため、歯牙にやさしい設計です。

ソフト/ハード 2タイプ

ソフトタイプ(シリコンゴム製)とハードタイプ(ポリエチレン製)の2タイプを用意しました。(サイズLのみ)

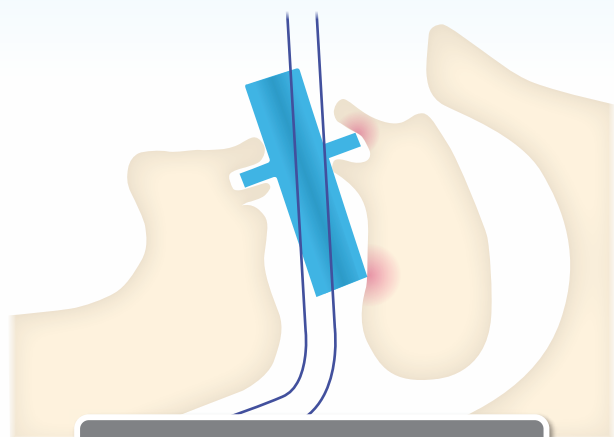

フランジ(ツバ)が同一平面にある場合の
バイトブロック固定時のイメージ

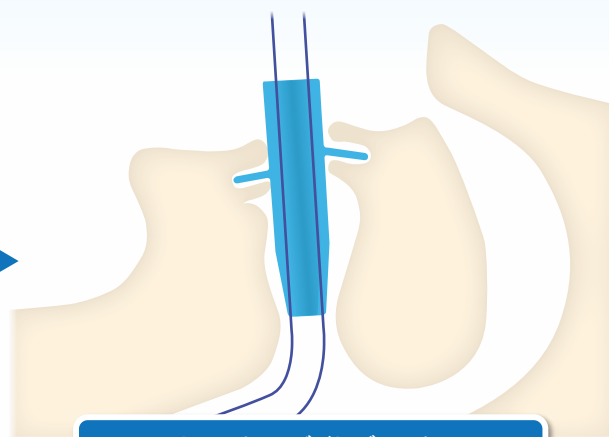

キュアケアバイトブロック
固定時のイメージ

シリコンゴム製バイトブロック



キュアケアバイトブロックSL

品番：1101 包装：50個入
仕様：シリコンゴム製/サイズL JANコード：4580320710019
滅菌：EOG滅菌済個装 製造国：日本
サイズ：15.5×15.5×62(mm)



キュアケアバイトブロックSS

品番：1102 包装：50個入
仕様：シリコンゴム製/サイズS JANコード：4580320710026
滅菌：EOG滅菌済個装 製造国：日本
サイズ：12×12×52(mm)

ポリエチレン製バイトブロック



キュアケアバイトブロックPL

品番：1201 包装：50個入
仕様：ポリエチレン製/サイズL JANコード：4580320710040
滅菌：EOG滅菌済個装 製造国：日本
サイズ：15.5×15.5×62(mm)

☐ この製品は一人患者用です。 ☐ この製品は薬事法第2条第4項適用外です。 ☐ 改良のため仕様は予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。