

1回の検査でRSウイルス抗原と
ヒトメタニューモウイルス抗原の
同時検出



陽性判定 5分 から

最終判定(陰性判定)は10分

目視でも弊社専用機器でも判定可能

10分

スマート QC リーダー対応

フィルターがネジ込み式で簡単取付

滴下数 & 判定時間の表記で操作ミスを軽減

痛さを軽減したスポンジタイプのやわらかいスワブを採用


RSウイルスキット・ヒトメタニューモウイルスキット

クイック チェイサー[®] RSV/hMPV


5分～10分

目視

テストプレートを静置

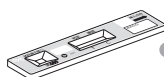静置
時間

目視判定

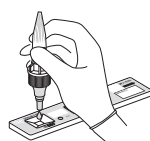


試料を滴下

スマート QC リーダー使用

モード①

「ヨミトリ」

テストプレートを静置

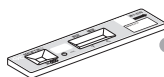

10分

静置
時間テストプレート
を挿入目視判定の
代わりに
機器が判定

スマート QC リーダー使用

モード②

「ジドウソクテイ」

テストプレートを
直ちに挿入

5分～10分

判定
時間

判定

クイック チェイサー® RSV/hMPV

品番/70040

テストプレート10テスト

抽出液0.6mL×10本

【付属品】

・ニプロスポンジスワブ10本
(届出番号:27B1X00045000092)

・フィルター(抽出液用)10個

・フィルターキャップ10個



4 987537 700404

別売品

品番/58090 クイック チェイサー 陽性コントロール RSV

..... 150μL×5本



4 987537 580907


品番/58050 クイック チェイサー 陽性コントロール hMPV

..... 150μL×5本



4 987537 580501

検 体

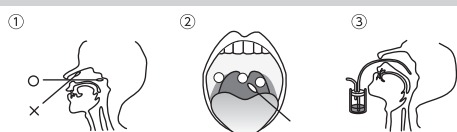

上記、いずれかより採取 (RSVに②の使用はできません)

反応時間 5～10分(陰性判定は10分)

貯 法 1～30℃

有効期間 24ヵ月

GS1

データマトリクス



添文ナビご使用の方は

記載の GS1 データマトリクスで PMDA へ登録された添付文書を直接閲覧することが出来ます。

(添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」日本製薬団体連合会、医療機器産業連合会、GS1 Japan が共同で開発した医療従事者用のアプリケーション)

デンシトメトリー分析装置

特定保守管理医療機器 届出番号41B2X10001000005

スマート QC リーダー®



品番/88000

外形寸法 103×220×125mm (幅×奥行×高)

本体重量 約 0.7kg ※AC アダプタ、電池は含まない

電 源

・専用 AC アダプタ

入力 AC100V 50-60Hz 国内専用

出力 DC12V 1.5A

消費電力 最大 60W

・乾電池 単3形アルカリ乾電池6本

GS1

データマトリクス



4 987537 880007



製造販売元

株式会社 ミズホメディー

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

<https://www.mizuho-m.co.jp>

「クイック チェイサー」は(株)ミズホメディーの登録商標です。

学術担当窓口 お客様専用

0120-12-4636

月～金(祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00