



# 規格

医療機器認証番号 220AABZX00348000




商品コード	品番	形状	材質	特長	梱包単位	JANコード
17-151	セーフタッチ 三方活栓 ST-RCPロック		ポリプロピレン (本体) ポリエチレン (コック部)	360°ロータリー ルアーロック 4点クリック 白(コック部色)	500個 (25個/箱×20箱)	4987458171512
17-152	セーフタッチ 三方活栓 ST-RCPロック レッド			360°ロータリー ルアーロック 4点クリック 赤(コック部色)		4987458171529
17-153	セーフタッチ 三方活栓 ST-RCPロック ブルー			360°ロータリー ルアーロック 4点クリック 青(コック部色)		4987458171536
17-154	セーフタッチ 三方活栓 ST-RCPロック グリーン			360°ロータリー ルアーロック 4点クリック 緑(コック部色)		4987458171543

# セーフタッチ<sup>®</sup> 三方活栓

耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂製。  
混注部にニードルレス接続機構を  
設けた三方活栓。



# 流路図

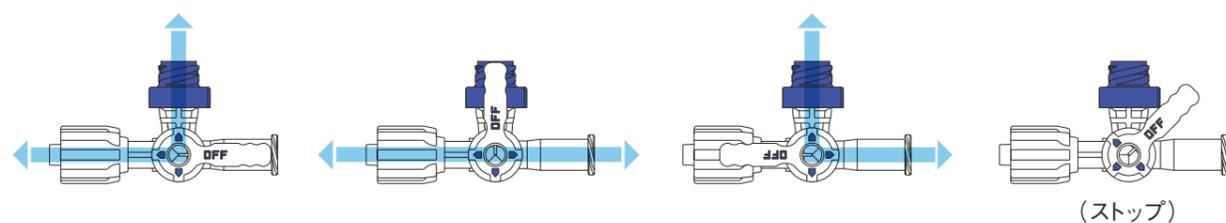

製造販売 ニプロ株式会社  
大阪市北区本庄西3丁目9番3号



# 三方活栓の安全性と信頼性がさらに大きく進化。現場の声にお応えします。

## 従来の“三方活栓”には問題点が2つ

**問題点 1** ポリカーボネート樹脂製品による  
“クラック事故の頻発”※

**問題点 2** 消毒しにくい形状による  
“感染機会の増加”




※「三方活栓等に関する自主点検について」医薬安発第 1101002 号  
※「医薬品とポリカーボネート製の医療用具の併用に関する自主点検について」医薬安発第 0526001 号

## ニュータイプのニードルレス三方活栓

# セーフタッチ®三方活栓 新登場!

混注部にニードルレス接続機構を設けた三方活栓。  
耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂製で  
安全性・信頼性が格段に向上。

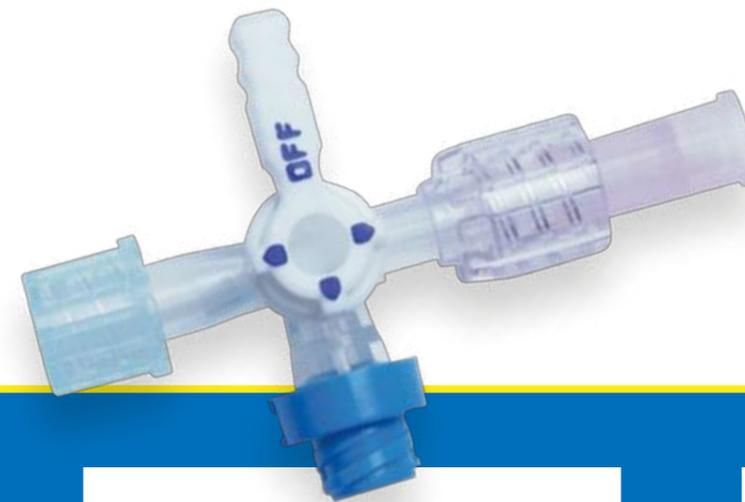


信頼性  
UP↑

安全性  
UP↑




## 原理

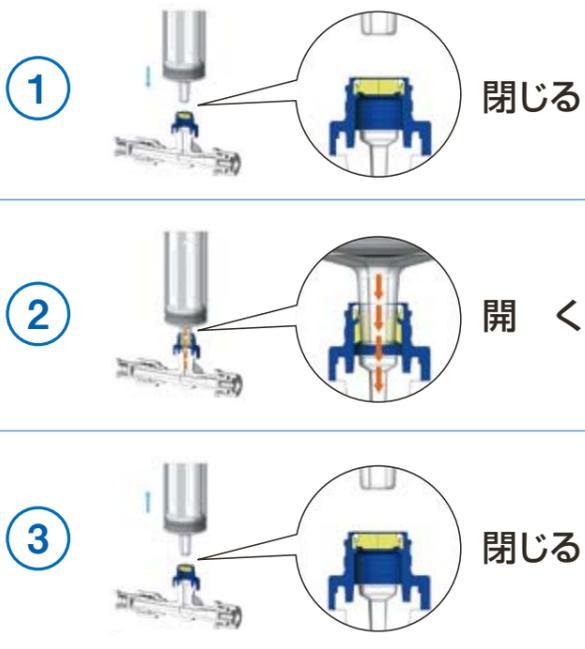


## 特長

専用部品なしで、  
汎用雄コネクタと容易に接続可能

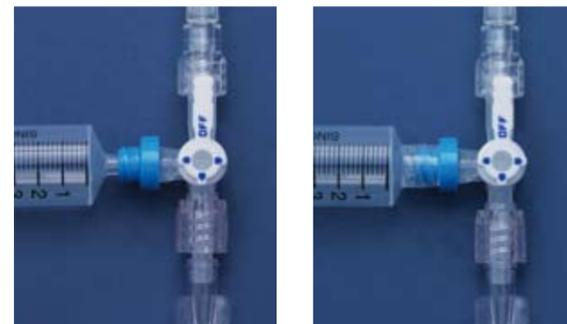

コック部のクリック感がわかり易い

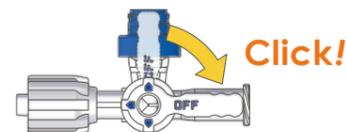

## 耐久性

試験方法:  
①ニードルレス部にロックシリンジを所定時間接続する。  
②接続解除後、70回の繰り返し接続操作を行う。  
③内部を蒸留水で満たし、150kPaの加圧を15分加える。  
(n=20)

所定時間 (h)	接続不良発生率	液漏れ発生率
24	0%	0%
48	0%	0%
72	0%	0%
96	0%	0%
120	0%	0%

(社内評価)

## 耐薬品性

試験方法: 医薬品・医療器具等安全性情報No.196より引用  
(n=10)

試験薬剤 (全て希釈なし)	クラック発生率
(a) 生理食塩液	0%
(b) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤含有製剤	0%
(c) 油性成分含有製剤	0%
(d) 界面活性剤含有製剤	0%
(e) 溶解補助剤含有製剤	0%

(社内評価)