

## ゆったりサイズで安定感抜群

- 赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
- がたつかず安定感のある設計。
- 赤ちゃんを降ろしてからも測定値を表示。
- 高精度2g単位の測定が可能。  
\*0～6kgまで2g単位、6～15kgまで5g単位で測定。
- 授乳量が確認できる専用キー付き。
- 体重の証明用に使用可能。

バックライト付きで暗い場所でもよく見える



\*バックライトは AC アダプター使用時のみ点灯します。




仕様

|             |                                                                                                                                        |                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 品番          | BD-815 高精度ベビースケール                                                                                                                      |                                     |
| 型式承認番号      | 第D1921号 精度等級3級                                                                                                                         |                                     |
| はかり仕様       | 複目量はかり(自動切替)                                                                                                                           |                                     |
| 計量方式        | 電気抵抗線式はかり                                                                                                                              |                                     |
| ひょう量(最大計量)  | 6kg                                                                                                                                    | 15kg                                |
| 目量(最小表示)    | 2g                                                                                                                                     | 5g                                  |
| 最小測定量       | 40g                                                                                                                                    | 100g                                |
| 最大風袋引き量     | 2kg                                                                                                                                    |                                     |
| 拡張目量(体重証明外) | 1g                                                                                                                                     |                                     |
| 機能          | 体重表示 測定値メモリー メモリー値呼出<br>授乳量表示 表示固定 拡張表示(1g) バックライト                                                                                     |                                     |
| 設定項目        | 表示固定(時間設定※1 10秒/20秒/30秒/なし から選択)<br>※1 赤ちゃんを降ろした後に測定値を表示し続ける時間<br>オートパワーオフ(時間設定 15分/30分/45分/60分/連続から選択)<br>外部出力(プリンター出力/RS-232C出力から選択) |                                     |
| 表示方法        | LCD 文字高 約23.4mm<br>バックライト点灯※2(オレンジ) ※2 ACアダプター使用時のみ                                                                                    |                                     |
| 外部インターフェイス  | RS-232C(Dサブ9ピン メスコネクター 出力専用)                                                                                                           |                                     |
| 商品寸法(質量)    | 本体                                                                                                                                     | 約 幅600×高さ157×奥行404mm(約4.6kg/乾電池含まず) |
|             | 乳児皿                                                                                                                                    | 約 幅600×奥行350mm                      |
| 主な材質        | 本体・皿: ABS、ソフトマット: EVA                                                                                                                  |                                     |
| 電源          | 専用ACアダプター DC6V単3形乾電池4本                                                                                                                 |                                     |
| 定格電圧        | DC9V(ACアダプター使用時)/DC6V(乾電池使用時)                                                                                                          |                                     |
| 消費電流        | 50mA(ACアダプター使用時)/40mA(乾電池使用時)                                                                                                          |                                     |
| 消費電力        | 0.5W以下(ACアダプター使用時)/0.3W以下(乾電池使用時)                                                                                                      |                                     |
| 主な付属品       | ACアダプター 単3形乾電池4本 ソフトマット1枚<br>身長計シール(55cm)                                                                                              |                                     |
| 製造国         | 日本                                                                                                                                     |                                     |
| 価格          | ¥98,000(税抜)                                                                                                                            |                                     |

寸法図 (単位:mm)

質量:約4.6kg

ACアダプターケーブル長さ:約1.8m

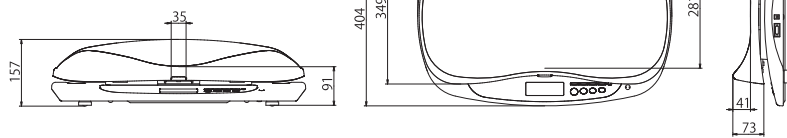

※寸法は概略です。

オプション

BD-815専用ソフトマット(3枚セット)  
BD-815-OM  
¥10,800(税抜)

健診時などの衛生管理にはソフトマットの交換をおすすめします。  
洗浄可能で繰り返し使えます。



感熱式プリンターセット OP-201  
¥84,000(税抜)  
(プリンター、ACアダプター、RSケーブル、  
プリンター用紙(2903)4巻)

プリントアウト例

|    |        |       |        |       |        |
|----|--------|-------|--------|-------|--------|
| 体重 | 3972 g | 授乳量   | 104 g  | メモリー値 | 3868 g |
|    |        | メモリー値 | 3868 g |       |        |



株式会社 **タニタ**

本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335  
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778  
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市中区東区牧の原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221  
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617  
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎0570-099655 受付時間9:00~18:00(祝日を除く月~金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2020年5月現在のものです。  
◎商品のデザイン・仕様・価格に変更になることもありますのでご了承ください。  
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

<https://www.tanita.co.jp/>

©2020 TANITA Corporation.

安心のゆったりサイズ

バックライト付きで、  
暗い場所でもよく見える

メモリボタン 授乳量ボタン 呼出ボタン 表示固定解除ボタン

測定値をメモリーする時に使用します。 授乳前の値をメモリーすることで授乳量がわかります。 メモリーされている測定値を見たいときに使用します。 表示固定を解除するときに使用します。

ON/風袋ボタン ゼロボタン OFFボタン 拡張表示ボタン

電源を入れるときまたは、風袋引き測定をするときに使用します。 ゼロリセットするときに使用します。 電源を切るときに使用します。 1g単位で表示を見たいときに使用します(体重証明外)。



移動に便利な  
取っ手付き

ソフトマットやバスケット(乳児皿)は  
取り外して洗えます。