

# 製品情報

## Ordering Information

### イントロカン セーフティ

| 商品コード  | 品番         | カラーコード | 規格         | 外径    | 流量        | 包装単位   | 販売単位 | 備考     | JANコード        |
|--------|------------|--------|------------|-------|-----------|--------|------|--------|---------------|
| 09-148 | 4251607-03 | ■      | 24G × 14mm | 0.7mm | 26ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091483 |
| 09-137 | 4251601-03 | ■      | 24G × 19mm | 0.7mm | 22ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091377 |
| 09-138 | 4251628-03 | ■      | 22G × 25mm | 0.9mm | 35ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091384 |
| 09-149 | 4251652-03 | ■      | 20G × 25mm | 1.1mm | 65ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091490 |
| 09-139 | 4251644-03 | ■      | 20G × 32mm | 1.1mm | 60ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091391 |
| 09-140 | 4251687-03 | ■      | 18G × 32mm | 1.3mm | 105ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091407 |
| 09-141 | 4251679-03 | ■      | 18G × 45mm | 1.3mm | 100ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091414 |
| 09-142 | 4251709-03 | ■      | 16G × 32mm | 1.7mm | 215ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091421 |
| 09-143 | 4251695-03 | ■      | 16G × 50mm | 1.7mm | 210ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091438 |
| 09-150 | 4251717-03 | ■      | 14G × 50mm | 2.2mm | 345ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | —      | 4987458091506 |
| 09-151 | 4251614-03 | ■      | 24G × 14mm | 0.7mm | 26ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091513 |
| 09-144 | 4253523-03 | ■      | 24G × 19mm | 0.7mm | 22ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091445 |
| 09-145 | 4253540-03 | ■      | 22G × 25mm | 0.9mm | 35ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091452 |
| 09-152 | 4253574-03 | ■      | 20G × 25mm | 1.1mm | 65ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091520 |
| 09-146 | 4253566-03 | ■      | 20G × 32mm | 1.1mm | 60ml/min  | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091469 |
| 09-147 | 4253604-03 | ■      | 18G × 32mm | 1.3mm | 105ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091476 |
| 09-153 | 4253590-03 | ■      | 18G × 45mm | 1.3mm | 100ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091537 |
| 09-154 | 4253639-03 | ■      | 14G × 50mm | 2.2mm | 345ml/min | 50本入/箱 | 4箱   | ウイング付き | 4987458091544 |

販売名：イントロカン セーフティ  
 認証番号：223AABZX00030000  
 特許第3486169号 特許第3486188号

| 保険請求                                      |
|---|
| 請求名：プラスチックカニューレ型静脈内留置針<br>(2)針刺し事故防止機構付加型 |

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
 製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。

**NIPRO**  
 発売 尼プロ株式会社  
 大阪市北区本庄西3丁目9番3号

**B | BRAUN**  
 SHARING EXPERTISE  
 製造販売元  
 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社  
 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16



Vascular Access

# Introcan Safety®

## イントロカン セーフティ

針刺し事故防止機構付き静脈留置針

**NIPRO**

**B | BRAUN**  
 SHARING EXPERTISE

# Introcan Safety®

## 針刺し事故防止機構付き「イントロカン セーフティ」

### 安全性と使いやすさを追求した基本設計。

留置針に50年以上の経験を持つビー・ブラウンのアイデアが結集しています。

### パッシブセーフティ

- ・内針を引き抜くだけで自動的に安全機構が作動します。
- ・特別な操作が必要なく安全機構が確実に作動します。
- ・針刺し事故防止に貢献します。

### だから「パッシブセーフティ」

針刺し事故を防ぐには、今までと同じ手技でしかも誰が使っても同じように安全機構が作動する、シンプルかつ確実な仕組みが必要です。イントロカン セーフティは、特別な操作をしなくても安全機構が確実に作動するパッシブタイプの安全機構を備えています。今までの静脈留置針と同じように使えて、針刺し事故防止に高い効果が期待できます。

### ラウンドエッジハブ


- ・カテーテルハブの内側を円錐状に加工することで、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
- ・キンク(閉塞)による輸液量低下のリスクを低減します。

### バックカット

- ・組織損傷が少ない加工方法です。


### ダブルフラッシュバックシステム

カテーテルの血管外留置(誤留置)を防止でき、より安全・確実に血管内に留置できる逆血の確認方法です。

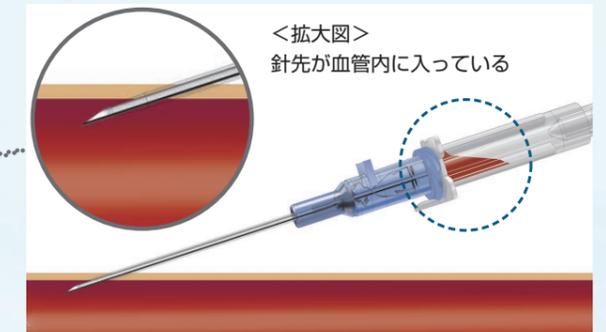

### ①ファースト(ニードル)フラッシュバック

- ・穿刺後、針先が血管内に入っていれば、チャンバー内(透明部分)が赤くなります。

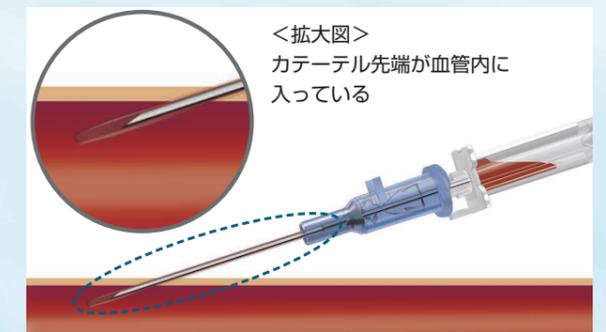

### ②セカンド(カテーテル)フラッシュバック

- ・カテーテルを進めた時、カテーテル先端が血管内に入っていれば、カテーテルが赤くなります。

### プッシュオフプレート

- ・片手でハブ操作(カテーテル挿入)が出来ます。
- ・カテーテルハブへの接触汚染のリスクを低減します。
- ・刃面の向きが容易に確認出来ます(プレート/上=刃面/上)。

### ウィング付き

- ・固定力が向上します(自己抜去防止)。
- ・患者様の皮膚トラブルの低減に貢献します。

