



THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

トップ 輸液ライン

さまざまなニーズに対応可能な豊富なラインナップ



TOP INFUSION LINE CATALOGUE



トッパ 輸液セット

医療従事者と患者様の安全を第一に考えました。
トッパ輸液セットは、従来の輸液方法をそのままに安全性と使いやすさを重視した輸液ラインです。

クレンメカラーの識別

クレンメのカラーとローラーのカラーで自然滴下用と輸液ポンプ用、チューブ材質（PVC（DEHPフリー）、PVCフリー）の違いが容易に識別できます。

自然滴下用				輸液ポンプ用			
ローラー：白色				ローラー：水色			
チューブ材質	PVC (DEHPフリー)	PVC (DEHPフリー)	PVCフリー (PVC以外の素材)	PVC (DEHPフリー)	PVC (DEHPフリー)	PVCフリー (PVC以外の素材)	
クレンメ色	緑	ピンク	紫	緑	ピンク	紫	
点滴数	20 滴 ≒ 1mL	60 滴 ≒ 1mL	20 滴 60 滴 ≒ 1mL	20 滴 ≒ 1mL	60 滴 ≒ 1mL	20 滴 60 滴 ≒ 1mL	

キャップトップとびん針の仕様

キャップトップの色で点滴数が識別可能。

● 緑色のキャップトップ 20 滴 ≒ 1mL
○ 白色のキャップトップ 60 滴 ≒ 1mL

中間チューブがついた
スリムプラスチック型
びん針

エア針不要の
通気口付プラスチック型
びん針

ロック端子のスライド機構

未熟児や乳幼児など、ロック端子による固定が難しい場合には、ロック部をチューブ側にスライドさせることができます。

ロック先・ルアー先を選択できます。

テーピングとドレッシング材でしっかり固定できます

DEHPフリーとPVCフリーで安全性を向上

DEHP可塑剤を使用していないので、薬液による可塑剤の溶出がありません。

△ = TOTM可塑剤 (=DEHPフリー)

PVCフリー輸液セットはPVCに吸着・収着する薬剤の投与に適しています。

○ = PVCに吸着・収着する薬剤

先端フラッシュロックタイプ

一般用 20滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS2-026W	品 種	TIS2-526A	品 種	TIS2-526M	品 種	TIS2-526	品 種	TIS2-026	品 種	TIS2-0256W
びん針		びん針		びん針		びん針		びん針		びん針	
点滴量	20 滴 ≒ 1mL	点滴量	20 滴 ≒ 1mL	点滴量	20 滴 ≒ 1mL	点滴量	20 滴 ≒ 1mL	点滴量	20 滴 ≒ 1mL	点滴量	20 滴 ≒ 1mL
三方活栓	—	三方活栓	—	三方活栓	—	三方活栓	—	三方活栓	—	三方活栓	—
Y字管	—	Y字管	—	Y字管	—	Y字管	—	Y字管	—	Y字管	
タコ管	—	タコ管	—	タコ管	—	タコ管	—	タコ管	—	タコ管	—
全 長	1490mm	全 長	1800mm	全 長	1500mm	全 長	1250mm	全 長	1490mm	全 長	1650mm
コード	21105	コード	21112	コード	21140	コード	21120	コード	21129	コード	21113
包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース
備 考											

小児用 60滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS-026WP	品 種	TIS-526AP	品 種	TIS-526MP	品 種	TIS-526P	品 種	TIS-026WP-NP
びん針		びん針		びん針		びん針		びん針	
点滴量	60 滴 ≒ 1mL	点滴量	60 滴 ≒ 1mL	点滴量	60 滴 ≒ 1mL	点滴量	60 滴 ≒ 1mL	点滴量	60 滴 ≒ 1mL
三方活栓	—	三方活栓	—	三方活栓	—	三方活栓	—	三方活栓	—
Y字管	—	Y字管	—	Y字管	—	Y字管	—	Y字管	—
タコ管	—	タコ管	—	タコ管	—	タコ管	—	タコ管	—
全 長	1490mm	全 長	1800mm	全 長	1500mm	全 長	1250mm	全 長	1490mm
コード	02880	コード	02858	コード	02934	コード	02893	コード	02935
包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	50本/箱 6箱/ケース	包装単位	20本/箱 8箱/ケース
備 考									PVCフリー

マーク説明

通気口付プラスチックびん針 中間チューブ付プラスチックびん針 Y字管付

通気口なしプラスチックびん針


フラッシュロック付

20 滴 ≒ 1mL クレンメのカラーが【緑】
→ チューブ素材がPVC（DEHPフリー）。

60 滴 ≒ 1mL クレンメのカラーが【ピンク】
→ チューブ素材がPVC（DEHPフリー）。

20 滴 ≒ 1mL クレンメのカラーが【紫】
→ チューブ素材がPVCフリー（PVC以外の素材）。

クレンメのローラー色 白色=自然滴下用 水色=輸液ポンプ用

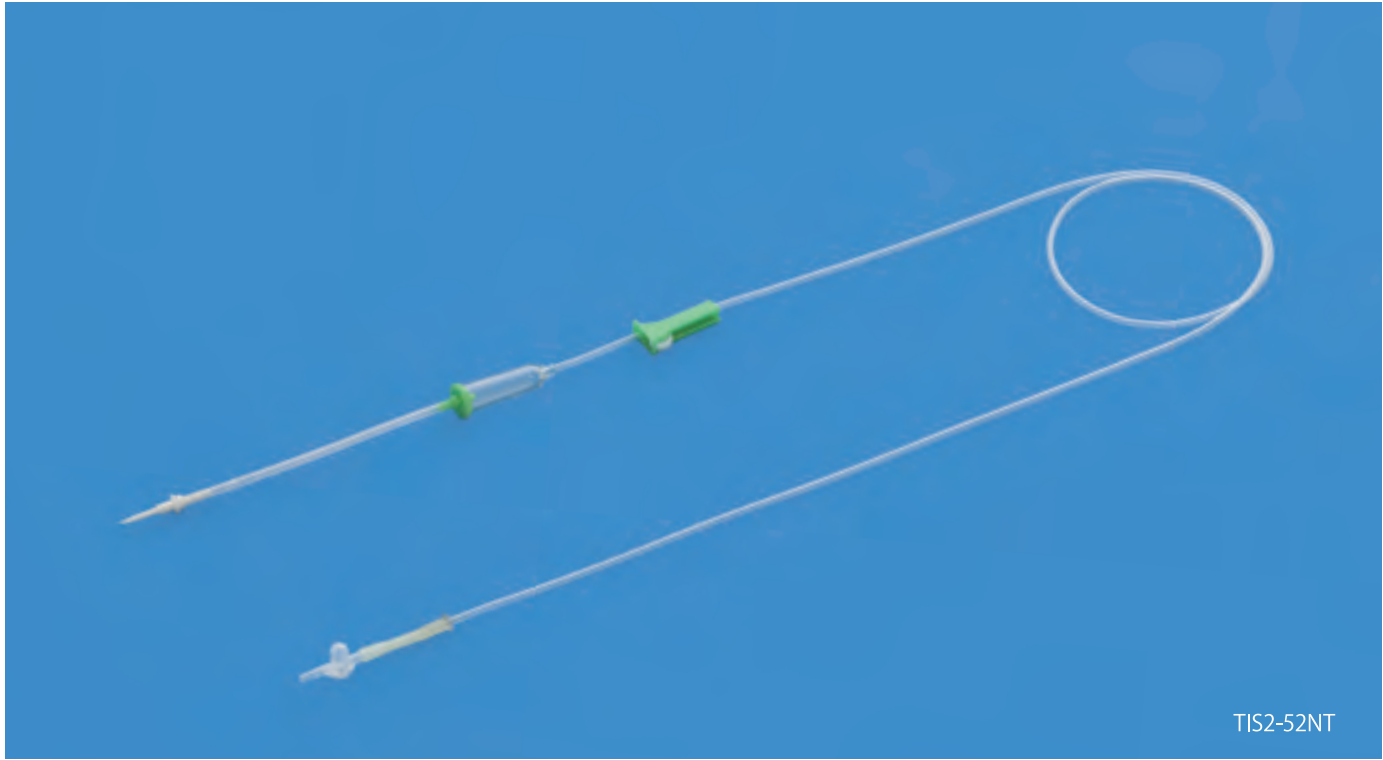

先端ルアータイプ (静脈針付・翼状針付・三方活栓付含む)

一般用 20滴≒1mL						
医療機器承認番号 15900BZZ00954000						
品 種 TIS2-52	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	静脈針21G付 エアー針付	
	21G	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1390mm	21118	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-52NT	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	エアー針付	
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1320mm	21119	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-027W	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1490mm	21106	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-02WNT	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1440mm	21107	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-02W	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	静脈針21G付	
	21G	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1510mm	21108	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-525	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
	21G	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1540mm	21121	50本/箱 6箱/ケース	

一般用 20滴≒1mL (続き)						
医療機器承認番号 15900BZZ00954000						
品 種 TIS2-0258W-1	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	翼状針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	翼状針21G付
	21G	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1900mm	21115	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-528	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	翼状針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	翼状針は、 21G 22G 23G の3種類より 選択できます
	21G 22G 23G	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1620mm	21G/21123 22G/21124 23G/21125	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-5258	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	翼状針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	翼状針は、 21G 22G 23G の3種類より 選択できます
	21G 22G 23G	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1620mm	21G/21126 22G/21127 23G/21128	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-02WRE50	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	エクステンション チューブ RX2-50付
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	2050mm	21111	40本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-2R529E75	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	×2	—	—	エクステンション チューブ X2-75付
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	2120mm	21102	40本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-2R529E100	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	×2	—	—	エクステンション チューブ X2-100付
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	2370mm	21103	40本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS2-527 (リープバック)	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1250mm	21180	10本/袋 (30袋/箱)	

小児用 60滴≒1mL						
医療機器承認番号 15900BZZ00954000						
品 種 TIS-02WBP	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	60滴 ≒ 1mL	—	—	—	静脈針21G付
	21G	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1960mm	02865	50本/箱 6箱/ケース	
品 種 TIS-52P	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
	静脈針	60滴 ≒ 1mL	—	—	—	エアー針付
	—	端 子	全 長	コード	包装単位	
	—	—	1390mm	02891	50本/箱 6箱/ケース	

マーク説明

通気口付
プラスチックびん針

翼状針付

Y字管付

20滴 ≒ 1mL
→ クレンメのカラーが【緑】
→ チューブ素材がPVC (DEHPフリー)。

中間チューブ付
プラスチックびん針

ルアー先

タコ管付

60滴 ≒ 1mL
→ クレンメのカラーが【ピンク】
→ チューブ素材がPVC (DEHPフリー)。

静脈針付

三方活栓 R型

クレンメのローラー色 白色=自然滴下用 水色=輸液ポンプ用

輸液セット

エクステンションチューブ

三方活栓

保護栓

トップ 輸液ポンプシリーズ

TOP-2300 / TOP-7200

TOP-2300の特長

コンパクト化しながらも操作、表示パネルを大きくし視認性を高めました。また、選べる4種類のカラーバリエーションもご用意しております。

万が一、クレンメを
閉め忘れても、
薬液が流れない安心機構



TOP-7200専用輸液セット

(SHシリーズ)

アンチフリーフロー機構を備えたアタッチメントが付属しています。誤ってクレンメを開放したままポンプから輸液セットを外しても、アタッチメントが送液を自動的に停止します。また、操作が上から下への一方で行え、視認性にも優れたパネルデザインです。

容積制御方式に対応

(Hシリーズ / EHシリーズ / SHシリーズ)

チューブ内径を一般品より厳格に規定している(当社比)ほか、復元性の高い素材を使用しており、容積制御による送液を可能にします。

ポンプを使用した輸液方法

滴下制御

滴下検出器(ドロップセンサー)で薬液の流速をとらえ制御する方式。一般の輸液セットでも使用できますが、薬液の粘度等により影響を受けてしまいます。

容積制御

一定の速度で正確な容積を送出する送液機構で流速を制御する方式。より正確な送液を行うため、厳密な規格に基づき製造されたポンプ用輸液セットが必要になります。

輸液ポンプ用

一般用 20滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS2-027H	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2100mm	21133	20本/箱 10箱/ケース	
品 種	TIS2-026H	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2100mm	21134	20本/箱 10箱/ケース	
品 種	TIS2-026WH-220	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2300mm	21114	20本/箱 10箱/ケース	
品 種	TIS2-526A-H	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1800mm	21141	20本/箱 10箱/ケース	
品 種	TIS2-526A-H-NP	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	PVCフリー
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1800mm	21137	20本/箱 8箱/ケース	
品 種	TIS2-026W-H-NP	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	PVCフリー
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2100mm	21143	20本/箱 8箱/ケース	

小児用 60滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS-026WP-HP	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			60滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2100mm	02941	20本/箱 10箱/ケース	
品 種	TIS-526AP-HP	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			60滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1800mm	02942	20本/箱 10箱/ケース	
品 種	TIS-526AP-HP-NP	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			60滴 ≒ 1mL	—	—	—	PVCフリー
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1800mm	02943	20本/箱 8箱/ケース	

TOP-7100専用 20滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS2-026EH	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2100mm	21135	20本/箱 9箱/ケース	
品 種	TIS2-026WEH	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2100mm	21136	20本/箱 9箱/ケース	
品 種	TIS2-526A-EH	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1800mm	21142	20本/箱 9箱/ケース	
品 種	TIS2-526A-EH-NP2	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	TOP-7100Nタイプ 専用 PVCフリー
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1800mm	21138	10本/箱 6箱/ケース	



TOP-7200専用 20滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS2-026W-SH	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2100mm	21144	20本/箱 9箱/ケース	
品 種	TIS2-526A-SH	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	タコ管	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—	—	
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1800mm	21145	20本/箱 9箱/ケース	

※Hシリーズ / EHシリーズにはPVCフリータイプもございます。
※詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

マーク 説明

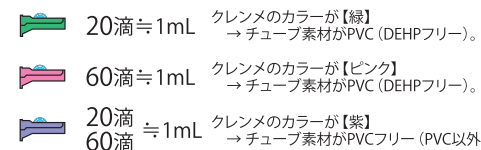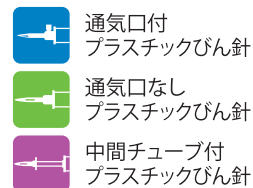

クレンメのローラー色 白色=自然滴下用 水色=輸液ポンプ用

フィルター付

一般用 20滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS2-F1	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	フィルター	備 考
			20滴 ≒ 1mL	—	—		フィルター孔径 0.2μm 板クレンメ付
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1750mm	21130	10本/箱 5箱/ケース	

小児用 60滴≒1mL

医療機器承認番号 15900BZZ00954000

品 種	TIS-F3P	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	フィルター	備 考
			60滴 ≒ 1mL	—			フィルター孔径 0.2μm 板クレンメ付
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2050mm	02702	10本/箱 5箱/ケース	
品 種	TIS-F4P	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	フィルター	備 考
			60滴 ≒ 1mL	× 2	—		フィルター孔径 0.2μm エクステンション チューブ RX2-FL30付 板クレンメ付
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1750mm	02703	10本/箱 5箱/ケース	

トップ定量筒付輸液セット

医療機器承認番号 15800BZZ00608000



品 種	TIS-56MS	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	定量筒	備 考
			60滴 ≒ 1mL	—	—	100mL	エアークリスタル付
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		1500mm	02904	10本/箱 6箱/ケース	
品 種	TIS-56MS-HP	びん針	点滴量	三方活栓	Y字管	定量筒	備 考
			60滴 ≒ 1mL	—	—	100mL	輸液ポンプ用 エアークリスタル付
		静脈針	端 子	全 長	コード	包装単位	
		—		2000mm	02944	10本/箱 6箱/ケース	

トップ連結管 (連続輸液用)

医療機器届出番号 13B1X00085000056

品 種	CT-52C	びん針	全 長	コード	包装単位
			400mm	21101	50本/箱 10箱/ケース
			備 考		
			多量の輸液が必要ときに使用します。 薬液等を途中交換することなく一度に補給することができます。		

マーク
説明

中間チューブ付
プラスチックびん針

フラッシュ
ロック付

三方活栓 R型

Y字管付

フィルター付

20滴 ≒ 1mL クレンメのカラーが【緑】
→チューブ素材がPVC (DEHPフリー)。

60滴 ≒ 1mL クレンメのカラーが【ピンク】
→チューブ素材がPVC (DEHPフリー)。

クレンメのローラー色 白色=自然滴下用 水色=輸液ポンプ用

TOP Extension Tube

トップエクステンションチューブ

さまざまなお要望にお応えする、豊富なバリエーションをご用意しました。

オス端子 (患者様側)

ルアー (三方活栓付)

ルアー (三方活栓なし)

フラッシュロック

ロック

固定フラッシュロック
(PVCフリー)

固定フラッシュロック
(ニトログリセリン)

フラッシュロック
(スパイラル)

メス端子 (薬剤側)

三方活栓 R型

三方活栓 L型
(360°)

三方活栓 L型

ロック

ロック (PVCフリー)

ロック
(ニトログリセリン)


ロック
(スパイラル)

フラッシュロック端子のスライド機構

※固定フラッシュロックは除く


未熟児や乳幼児など、ロック端子による固定が難しい場合には、
ロック部をチューブ側にスライドさせることができます。

テーピングとドレッシング材で
しっかり固定できます

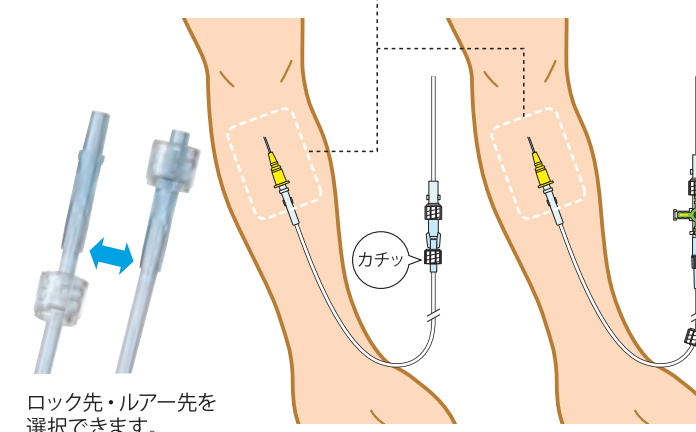


DEHPフリーとPVCフリーで 安全性を向上

DEHP可塑剤を使用していないので、
薬液による可塑剤の溶出がありません。

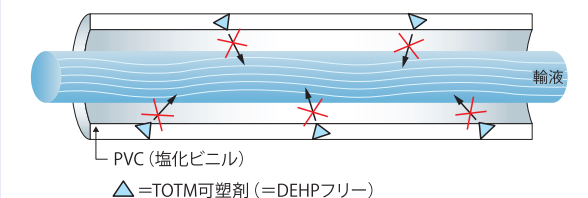

PVCフリーは
PVCに吸着・収着する薬剤の投与に適しています。

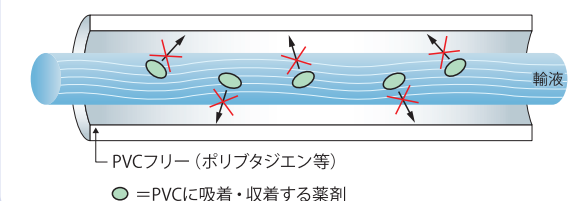

トップエックステンションチューブ

※（ ）内コードナンバーは、10本袋入り、50本/箱、20箱/ケースの商品となります。

ルアータイプ（左端がオス端子となります）医療機器承認番号 15100BZZ00050000				
品 種	X1-WL50 / X2-WL50 / X3-WL50	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.6mL
		X2		2.0mL
		X3		4.4mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		50cm	50本/箱 20箱/ケース	メス端子ロック
品 種	X1-WL70	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.8mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		70cm	50本/箱 20箱/ケース	メス端子ロック
品 種	X1-WL100 / X2-WL100	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.0mL
		X2		3.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		100cm	50本/箱 20箱/ケース	メス端子ロック

ロックタイプ医療機器承認番号 15100BZZ00050000				
品 種	X1-L50 / X2-L50 / X3-L50	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.5mL
		X2		2.0mL
		X3		4.4mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		50cm	50本/箱 20箱/ケース	オス・メス端子ともロック
品 種	X1-L75 / X2-L75	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.8mL
		X2		2.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		75cm	50本/箱 20箱/ケース	オス・メス端子ともロック
品 種	X1-L100 / X2-L100	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.0mL
		X2		3.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		100cm	50本/箱 20箱/ケース	オス・メス端子ともロック
品 種	X1-L120 / X2-L120	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.2mL
		X2		4.6mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		120cm	50本/箱 20箱/ケース	オス・メス端子ともロック
品 種	X1-L150	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.5mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		150cm	50本/箱 20箱/ケース	オス・メス端子ともロック
品 種	X1-LM25	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.4mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		25cm	50本/箱 20箱/ケース	両オス端子ロック
品 種	X1-LM50	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.6mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		50cm	50本/箱 20箱/ケース	両オス端子ロック

スパイラルタイプ医療機器承認番号 15100BZZ00050000				
品 種	X1-100S / X1-150S / X1-200S / X1-300S / X1-500S	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.2mL
				1.6mL
				1.9mL
				2.5mL
				3.8mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		100cm		
		150cm		
		200cm		
		300cm		
		500cm		
			10本/箱 10箱/ケース	オス端子フラッシュロック メス端子ロック PVCフリー

フラッシュロックタイプ医療機器承認番号 15100BZZ00050000				
品 種	X1-FL50 / X2-FL50	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.6mL
		X2		2.0mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		50cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子フラッシュロック メス端子ロック
品 種	X1-FL100 / X2-FL100	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.0mL
		X2		3.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		100cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子フラッシュロック メス端子ロック
品 種	X1-FL200	品 種	チューブ径	内容量
		X1		2.0mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		200cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子フラッシュロック メス端子ロック

PVCフリータイプ医療機器承認番号 21500BZY00247000				
品 種	X1-WL50-NP / X2-WL50-NP	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.5mL
		X2		2.0mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		50cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー メス端子ロック
品 種	X1-WL75-NP	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.8mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		75cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー メス端子ロック
品 種	X1-WL100-NP / X2-WL100-NP	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.0mL
		X2		3.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		100cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー メス端子ロック
品 種	X1-FL50-NP / X2-FL50-NP	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.5mL
		X2		2.0mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		50cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子固定フラッシュロック メス端子ロック
品 種	X1-FL75-NP / X2-FL75-NP	品 種	チューブ径	内容量
		X1		0.8mL
		X2		2.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		75cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子固定フラッシュロック メス端子ロック
品 種	X1-FL100-NP / X2-FL100-NP	品 種	チューブ径	内容量
		X1		1.0mL
		X2		3.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		100cm	50本/箱 20箱/ケース	オス端子固定フラッシュロック メス端子ロック

ニトログリセリン用医療機器承認番号 15100BZZ00050000				
品 種	N1-FL50	品 種	チューブ径	内容量
		N1		0.9mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		50cm	20本/箱 10箱/ケース	オス端子固定フラッシュロック メス端子ロック
品 種	N1-FL100	品 種	チューブ径	内容量
		N1		1.6mL
		チューブ長	包装単位	備 考
		100cm	20本/箱 10箱/ケース	オス端子固定フラッシュロック メス端子ロック

チューブ径	チューブ径	外 径	内 径
	X1	2.1mm	1.1mm
	X2	3.5mm	2.2mm
	X3	5.0mm	3.3mm
	N1	2.2mm	1.3mm

X1	X2	X3	N1
----	----	----	----

トップ三方活栓付エクステンションチューブ


ルアータイプ

医療機器承認番号 15100BZZ00050000

品 種 RX1-50 / RX2-50 / RX3-50



品 種 RX2-100

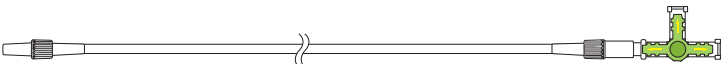

品 種 LX1-50 / LX2-50 / LX3-50



品 種 LX1-50 (360°) / LX2-50 (360°) / LX3-50 (360°)



品 種 LX1-100 (360°) / LX2-100 (360°)




品 種 2RX2-50



品 種 2RX2-100



品 種 2LX2-50 (360°)

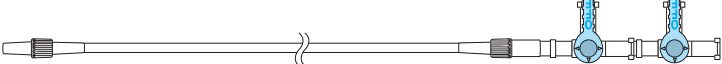

ロックタイプ

医療機器承認番号 15100BZZ00050000

品 種 RX1-L50 / RX2-L50



品 種 RX2-L75



品 種 RX1-L120



品 種 RX1-L150



品 種 LX2-L50



品 種	チューブ径	内容量	コード
RX1-50	X1	0.9mL	01517
RX2-50	X2	2.3mL	01524
RX3-50	X3	4.6mL	01532
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX2-100	X2	4.2mL	01526
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
100cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX1-50	X1	0.9mL	01501
LX2-50	X2	2.3mL	01506
LX3-50	X3	4.6mL	01510
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX1-50 (360°)	X1	0.9mL	01544
LX2-50 (360°)	X2	2.3mL	01545
LX3-50 (360°)	X3	4.6mL	01512
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型360°	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX1-100 (360°)	X1	1.4mL	01551
LX2-100 (360°)	X2	4.2mL	01552
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
100cm	L型360°	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
2RX2-50	X2	2.5mL	01537
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	R型2連式	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
2RX2-100	X2	4.4mL	01543
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
100cm	R型2連式	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
2LX2-50 (360°)	X2	2.5mL	01546
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型360°2連式	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX1-L50	X1	0.8mL	01521
RX2-L50	X2	2.2mL	01528
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX2-L75	X2	3.2mL	01542
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
75cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX1-L120	X1	1.5mL	01523
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
120cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX1-L150	X1	1.8mL	01541
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
150cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX2-L50	X2	2.2mL	01508
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック


ロックタイプ (続き)

医療機器承認番号 15100BZZ00050000

品 種 LX1-L50 (360°) / LX2-L50 (360°)



品 種 LX1-L100 (360°)

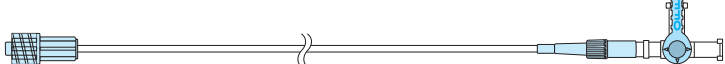

品 種 2RX2-L50



フラッシュロックタイプ

医療機器承認番号 15100BZZ00050000

品 種 RX2-FL50



品 種 RX3-FL70



品 種 LX1-FL50 (360°) / LX2-FL50 (360°)



品 種 2LX2-FL50 (360°)



PVCフリータイプ

医療機器承認番号 21500BZY00247000

品 種 RX1-50-NP / RX2-50-NP



品 種 LX1-50-NP / LX2-50-NP



品 種 LX2-FL50 (360°) -NP



品 種	チューブ径	内容量	コード
LX1-L50 (360°)	X1	0.8mL	01547
LX2-L50 (360°)	X2	2.2mL	01548
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型360°	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX1-L100 (360°)	X1	1.3mL	01554
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
100cm	L型360°	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
2RX2-L50	X2	2.4mL	01538
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	R型2連式	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX2-FL50	X2	2.3mL	01527
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子 フラッシュロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX3-FL70	X3	6.3mL	01534
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
70cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子 フラッシュロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX1-FL50 (360°)	X1	0.9mL	01549
LX2-FL50 (360°)	X2	2.2mL	01550
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型360°	20本/箱 20箱/ケース	オス端子 フラッシュロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
2LX2-FL50 (360°)	X2	2.5mL	01557
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型360°2連式	20本/箱 20箱/ケース	オス端子 フラッシュロック

品 種	チューブ径	内容量	コード
RX1-50-NP	X1	0.7mL	01576
RX2-50-NP	X2	2.1mL	01577
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	R型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX1-50-NP	X1	0.7mL	01571
LX2-50-NP	X2	2.1mL	01573
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型	20本/箱 20箱/ケース	オス端子ルアー

品 種	チューブ径	内容量	コード
LX2-FL50 (360°) -NP	X2	2.1mL	01575
チューブ長	三方活栓	包装単位	備 考
50cm	L型360°	20本/箱 20箱/ケース	オス端子 固定フラッシュロック

チューブ径

チューブ径	外 径	内 径
X1	2.1mm	1.1mm
X2	3.5mm	2.2mm
X3	5.0mm	3.3mm



輸液セット

エクステンションチューブ

三方活栓

保護栓

TOP Three Way Stopcock

トップ 三方活栓

大切な薬を、安全・確実に注入します。

耐薬品性を強化した トップ三方活栓 ルプラ



R型フラッシュロック



L型360°フラッシュロック

Point 1

従来の三方活栓でクラックが発生するとされる薬品に使用しても、ルプラではクラックが生じることはありません。

Point 2

メスルアー部をネジ山形状にし、接続性を向上させています。

Point 3

ハンドル底に「白色のキャップ」を付け、従来の三方活栓との識別を容易にしています。



■ 規格			
品 種	品 番	コード	包装単位
R型フラッシュロック	R1-FL-LP	01341	20個/箱
L型360°フラッシュロック	L (360°) 1-FL-LP	01342	10箱/ケース

医療機器承認番号 15600BZZ01360000

トップ三方活栓クリックタイプ

クリックの手応えを45°毎に確実に伝えます。



R型クリックタイプ




R型フラッシュロッククリックタイプ



L型360°クリックタイプ



L型360°フラッシュロッククリックタイプ

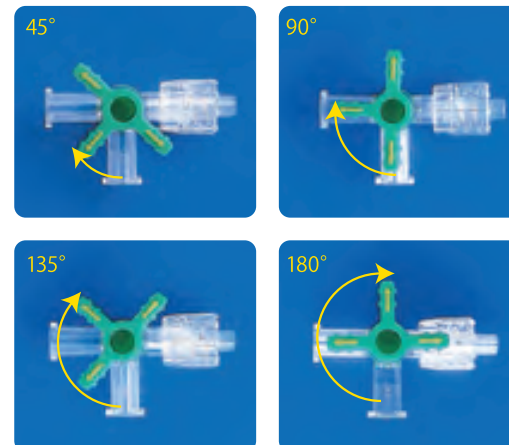

■ 規格			
品 種	品 番	コード	包装単位
R型クリックタイプ		01321	20個/箱 50箱/ケース
R型フラッシュロッククリックタイプ		01322	
L型360°クリックタイプ		01323	
L型360°フラッシュロッククリックタイプ		01324	

医療機器承認番号 15600BZZ01360000

トップ三方活栓 V

当社従来製品より耐脂肪乳剤にすぐれた素材を使用しています。



R1-V



R1-FL-V



L (360°) 1-V



L (360°) 1-FL-V



R1-VR



R1-FL-VR

■ 規格			
品 種	品 番	コード	包装単位
R型	R1-V	01361	20個/箱 50箱/ケース
R型フラッシュロック	R1-FL-V	01362	
L型360°	L (360°) 1-V	01363	
L型360°フラッシュロック	L (360°) 1-FL-V	01364	
R型レッド	R1-VR	01365	
R型レッドフラッシュロック	R1-FL-VR	01366	

医療機器承認番号 15600BZZ01360000

トップ三方活栓多流量型

ストレートな内径で、当社従来品の1.6倍の流量を確保。



多流量型



多流量型フラッシュロック



スーパーフロー

〈孔径比較〉



従来品



多流量型

■ 規格		
品 種	コード	包装単位
多流量型	01313	20個/箱
多流量型フラッシュロック	01314	20箱/ケース

医療機器承認番号 15600BZZ01360000

■ 規格		
品 種	コード	包装単位
多流量型3連式フラッシュロックプレート付 (スーパーフロー)	01416	20個/箱 10箱/ケース

医療機器承認番号 15800BZZ01458000

トップ三方活栓 (カラー)

複数の輸液ラインをルートごとにしっかり区別。



レッド



イエロー



ブルー

■ 規格				
品 種	品 番	カラー	コード	包装単位
R型	R1	レッド	01304	20個/箱 10箱/ケース
		イエロー	01306	
		ブルー	01315	

医療機器承認番号 15600BZZ01360000

トップ三方活栓

スムーズなハンドル操作と確実な接続。



L-1



L1-L



R-1



R1-L



R1-FL



L (360°) -1



L (360°) 1-L



L (360°) 1-FL

■ 規格			
医療機器承認番号 15600BZZ01360000			
品 種	品 番	コード	包装単位
L型	L-1	01307	20個/箱 50箱/ケース
L型ロック	L1-L	01308	
R型（ロータリー型）	R-1	01301	
R型ロック	R1-L	01302	
R型フラッシュロック	R1-FL	01303	
L型360°	L (360°) -1	01310	
L型360°ロック	L (360°) 1-L	01311	
L型360°フラッシュロック	L (360°) 1-FL	01312	

トップ三方活栓（連式）

ニーズに合わせて選べる、連式やプレート付。プレート付きの品種は複数の輸液ラインをしっかりと区別。



L-2




R-2



PR-2



L-3

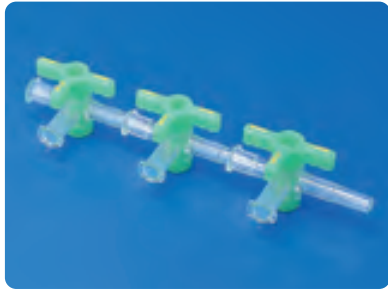

R-3



PR-3



L2-L



R2-L



PR-4



PL-3



R3-L



PR-5

■ 規格			
医療機器承認番号 15800BZZ01458000			
品 種	品 番	コード	包装単位
L型2連式	L-2	01410	20個/箱 10箱/ケース
L型3連式	L-3	01411	
L型2連式ロックタイプ	L2-L	01412	
L型3連式ロックタイプ（プレート付）	PL-3	01415	
R型2連式	R-2	01401	
R型3連式	R-3	01402	
R型2連式ロックタイプ	R2-L	01404	
R型3連式ロックタイプ	R3-L	01405	
R型2連式ロックタイプ（プレート付）	PR-2	01406	
R型3連式ロックタイプ（プレート付）	PR-3	01407	
R型4連式ロックタイプ（プレート付）	PR-4	01408	
R型5連式ロックタイプ（プレート付）	PR-5	01409	

トップ保護栓

あらゆるニーズに対応できるように豊富なバリエーションを揃えています。

保護栓に直接触れずに
清潔な操作が可能



電子線滅菌済

院内感染予防に

トップ保護栓 (ML-KS)

■ 規格			届出番号	13B1X00085000008
品 種	コード	包装単位		
トップ保護栓 (ML-KS)	05506	100個/箱 20箱/ケース		

〈ML-KS 接続例〉




ML-KSの装着手順

- 1 保護栓が入っているケースのフィルム（フタ）をはがします。
- 2 保護栓が入ったままで、ケースを三方活栓の側注口へ接続します。
- 3 そのまま、右（時計回り）に回転させ、装着します。
- 4 ケースを引いて外します。

端子の汚染防止に

トップ保護栓 ロックタイプ

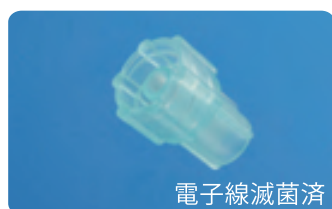

電子線滅菌済

端子の汚染防止に

トップ保護栓 ルアータイプ



電子線滅菌済

シリンジの保護キャップなどに

トップ保護栓 Fタイプ



エアベント付

エチレンオキシドガス滅菌済

■ 規格			届出番号	13B1X00085000008
品 種	コード	包装単位		
トップ保護栓 ロックタイプ	05502	100個/箱 20箱/ケース		

■ 規格			届出番号	13B1X00085000008
品 種	コード	包装単位		
トップ保護栓 ルアータイプ	05501	100個/箱 20箱/ケース		

■ 規格			届出番号	13B1X00085000008
品 種	コード	包装単位		
トップ保護栓 Fタイプ	05503	100個/箱 20箱/ケース		


医療機器の材質と使用薬剤によるリスク回避のために

輸液ラインは、使用薬剤によって適切に選択・組み合わせる必要があります。弊社では、DEHPフリー、PVCフリー、優れた耐薬品性など、さまざまなニーズに対応可能な製品をラインナップしております。

溶 出

医療機器の材質として広く一般的に使用されているポリ塩化ビニル (PVC) は、可塑剤を添加し柔軟にしています。可塑剤としてDEHPを使用している医療機器と一部の薬剤を併用した際、薬剤と一緒にDEHPが体内へ入ってしまう場合があります。DEHPは精巢毒性があることが指摘されているため、DEHPを使用している医療機器とDEHPが溶出する薬剤の併用は好ましくありません。当社の輸液ライン関連製品は全てDEHPフリーのため、DEHPが溶出する心配がなく安心してご使用いただけます。

チューブからの可塑剤溶出量

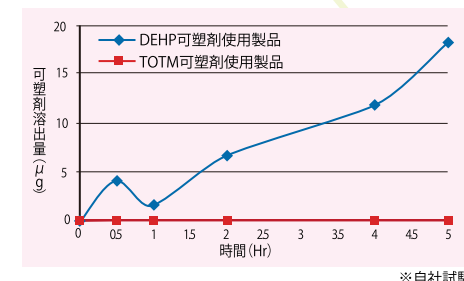


※自社試験

吸 着

一部の薬剤において、ポリ塩化ビニルに成分がくっついてしまい（吸着）、実際に投与される量が著しく減少してしまうことがあります。吸着してしまうと、薬剤の正確な投与量の把握が困難になってしまいます。近年は微量投与が必要な薬剤も数多くあるため、ポリ塩化ビニルに吸着する薬剤を使用する際は、PVCフリー（材質にポリ塩化ビニルを使用していない）の輸液セットや延長チューブを使用することが好ましいです。当社の輸液セットとエクステンションチューブには、PVCフリーの製品もラインナップしております。


薬剤吸着比較

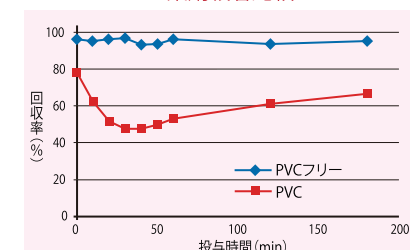

※自社試験

ひび割れ（クラック）

医療機器の材質として広く一般的に使用されているポリカーボネートは、一部の薬剤が付着した状態での回路の接続により接続部にひび割れが発生することがあります。ひび割れが発生すると、その部分から薬剤や逆流した血液が漏れることがあります。薬剤が漏れると曝露の危険性、血液が漏れると失血性ショックの恐れがあり非常に危険です。そのため、ひび割れが発生する可能性のある薬剤とポリカーボネート製の医療機器の併用はおすすめできません。当社三方活栓には、耐薬品性に優れた材質を使用した品種もございますのでひび割れの可能性がある薬剤も安心してご使用いただけます。

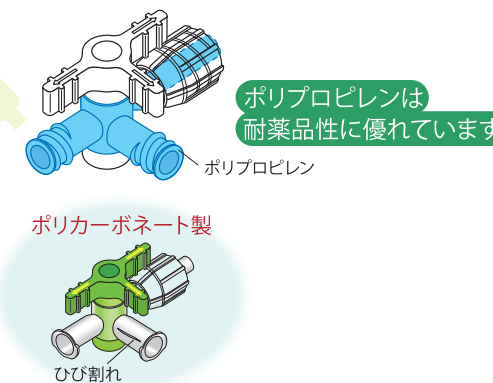

注 意 点

DEHPの溶出・PVCへの薬剤の吸着・ひび割れ発生の有無につきましては、ご使用いただく薬剤の添付文書や各製薬メーカーへのお問い合わせにてご確認ください。

薬剤の添付文書を確認することの必要性

添付文書には上記注意点のみではなく、用法・用量や禁忌、併用する薬剤についての注意点等、薬剤の使用にあたって事前に確認が必要となるさまざまな情報が記載されております。特に近年は、多種多様な薬剤が存在するため、薬剤ごとの注意

点も複雑化しております。そのため、薬剤使用時の確認事項は医療機器との相性のみでは不十分であると言えます。患者様に安心して治療を受けていただくためにも、薬剤の添付文書をご確認いただきますようお願いいたします。

多彩なラインナップ

あらゆるニーズに対応できるよう
豊富なバリエーションを揃えています。

トップ輸液ポンプ TOP-7200



アンチフリーフロー機構を備えたアタッチメントが付属しています。誤ってクレンメを開放したままポンプから輸液セットを外しても、アタッチメントが送液を自動的に停止します。


トップ輸液ポンプ TOP-2300

コンパクト化しながらも操作、表示パネルを大きくし視認性を高めました。また、選べる4種類のカラーバリエーションもご用意しております。



エクステンションチューブから輸液セットを外したときは、保護栓ML-KSを使用することで閉鎖を維持します。

トップ保護栓 ML-KS

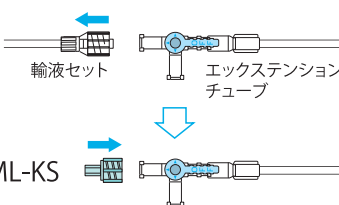

トップエクステンションチューブ
LX2-FL50(360°)-NP

トップシリンジポンプ TOP-5520



輸液中のボラス注入、流量変更が可能です。また、患者さん自身がスイッチを操作してボラス注入による疼痛緩和を行うPCA機能を搭載しています。

セフィオフロー製品につきましては、別途、セフィオフロー製品カタログをご確認ください。

●イラストはイメージであり、製品とは異なる部分があります。 ●製品改良にともない予告なく仕様、外観などを変更させていただく場合があります。

製造販売業者 **株式会社トップ**

本社：〒120-0035東京都足立区千住中居町19番10号