







THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

ネオフィード経腸栄養関連製品 総合カタログ

NEOFEED – Enteral Nutrition Catalogue

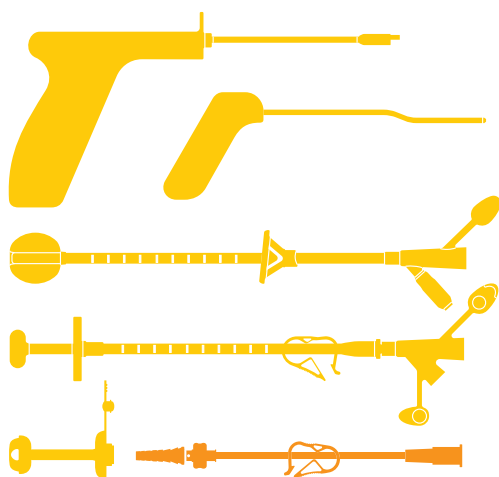

NEOFEED ENTERAL NUTRITION CATALOGUE

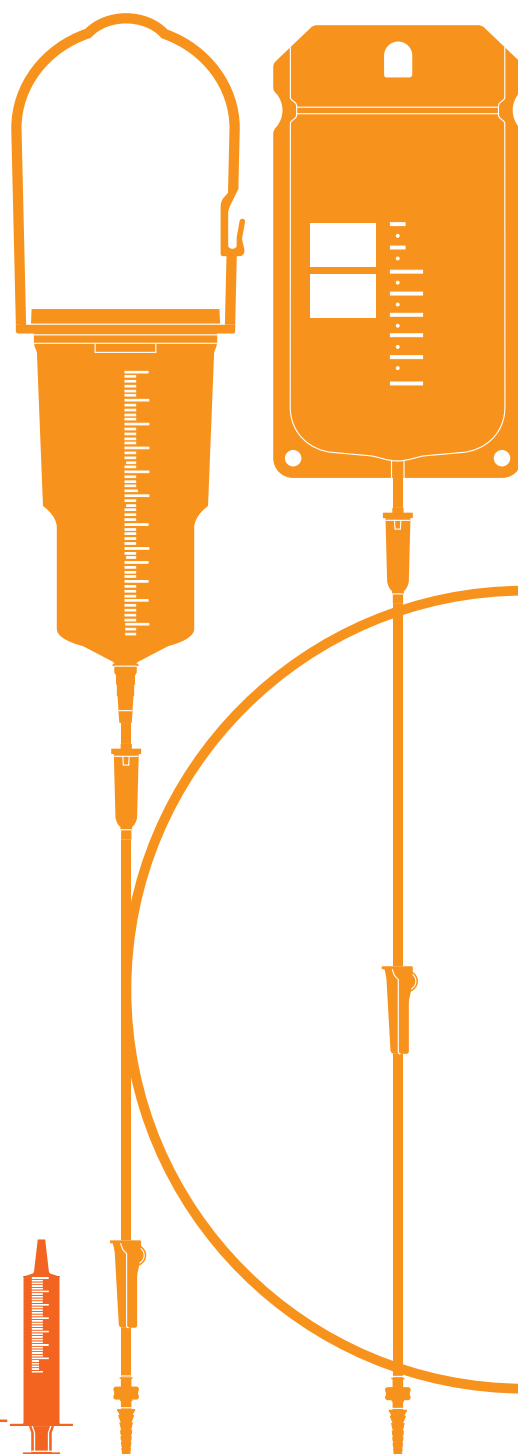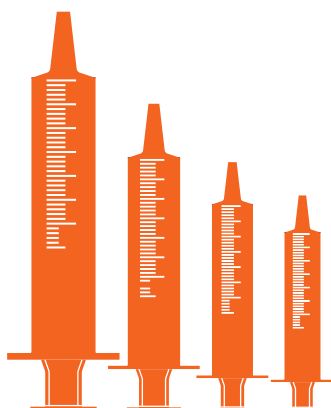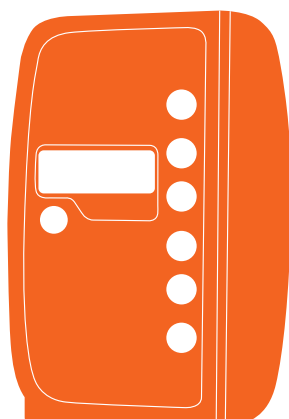

使いやすさとセーフティ

経腸栄養剤投与の効率化と汚染防止を推進するネオフィード経腸栄養システム

使いやすさを推進します。

Usability

- 経腸栄養のセットアップを容易に

バッグ付・ボトル付の栄養セット、片手操作で瘻孔へ挿入が可能な胃瘻カテーテル、コンパクトでシンプルな操作性の経腸栄養ポンプなどが、準備作業を簡略化します。

- 流路を大きくして詰まりを防ぐ

すべての栄養セットに大口径チューブを採用。三方活栓の内径も大きくとるなど、流路全体が栄養剤の詰まり防止に配慮した構造です。

安全管理を容易にします。

Safety

- ヒヤリ・ハットを減らしたい

ひと目で識別できるオレンジ・カラーに統一*。

輸液ラインへの接続ができない大型の「カテーテルテーパー」。経腸栄養ポンプ専用セットは「フリーフロー防止弁付」をラインナップ。栄養セットがポンプから外れた際、フリーフロー防止弁により送液を止める安全対策品です。

*アダプターは、オレンジのほか、イエロー、グリーンも選択できます。

- 患者さんの身体的負担軽減

胃瘻カテーテルの先端は、胃粘膜への刺激を軽減するためにソフトな材質にしております。

ネオフィード® 栄養セット

栄養剤の詰まりを軽減する
大口径チューブを採用

Usability

- 操作しやすい大型フレンメを採用。安定した流量調節が可能です。

Safety

- 患者側のアダプターは、着脱を容易に、確実にできる翼付きです。

*1mL≒15滴です。(ただし生理食塩液または蒸留水の場合。栄養剤の粘度が高くなると滴数は減少します)

医療機器届出番号:13B1X00085000041

品種	オレンジ	イエロー	グリーン	包装単位
栄養セット ナチュラルF	06451	06452	06453	20本/箱、8箱/ケース
栄養セット クリアフィード	06471	06472	—	50本/箱、6箱/ケース

ネオフィード® 栄養セット

バッグ付 / Eバッグ付 / ボトル付

セットアップが効率的な
オールインワン・タイプ

Usability

- 栄養剤を入れ、胃瘻カテーテルや栄養カテーテルと接続するだけで投与を開始でき、効率的です。
- バッグ付のバッグ内面は、栄養剤が付着しにくいエンボス加工となっており、最後までスムーズな投与が可能です。
- Eバッグ付は、ジッパーを採用。横置きにしても漏れる心配がなく、重ね置きが可能です。
- バッグ付とEバッグ付、ボトル付の開口部は広い形状のため、栄養剤の充填が容易です。

Safety

- バッグ付は、充填後プロテクションカバーにより保護されますから、汚染を受けにくい構造となっています。

医療機器届出番号:13B1X00085000041

品種	容量	オレンジ	包装単位
ナチュラル バッグ付	600mL	06425	10本/箱、10箱/ケース
	1200mL	06426	
ナチュラルF Eバッグ付	600mL	06429	20本/箱、10箱/ケース
クリアフィード Eバッグ付		06430	
ナチュラル ボトル付		06427	

ネオフィード® 栄養ボトル

100mL / 600mL / 1000mL


オレンジとイエロータイプに、
3サイズをラインナップ

Usability

- オレンジとイエローのタイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
- 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
- 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
- 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。

医療機器届出番号:13B1X00085000030

容量	オレンジ	イエロー	グリーン	包装単位
100mL	06422	52252	—	5個/箱、5箱/ケース
600mL	06417	06418	06419	5個/箱、4箱/ケース
1000mL	06423	06424	—	2個/箱、5箱/ケース

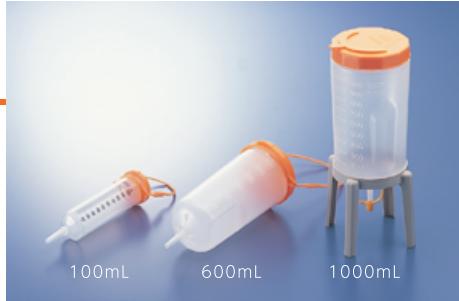

ネオフィード® エックステンションチューブ

多様化する経腸栄養療法を
しっかりサポート

Usability


- オス・メスアダプターとも、着脱を容易に、確実にできるグリップ付きです。

<ネオフィードエックステンションチューブ Sタイプ>

- Sタイプは、小児用に特化した経腸栄養用延長チューブです。
- チューブ内径と注入口の内径を合わせることで、段差が生じないため、栄養剤を投与した際、抵抗が起きにくくスムーズに流すことが可能です。
- 翼部が取り外せることで、栄養カテーテルなどとの接続部の体積を最小にし、万が一患児の下に入った場合でも身体への負担を軽減します。
- 取り外した翼部はチューブのどの部分にも留置することができるため、保育器内と外部を行き来させる必要がありません。
- 細径チューブを採用しているため、チューブ内容量(0.96mL)を可能な限り少なくしています。

医療機器認証番号:21300BZZ00175000

チューブ長	オレンジ	イエロー	グリーン	包装単位
50cm	15451	15453	15455	25本/箱、8箱/ケース
100cm	15452	15454	15456	
50cm(細径)	15457	15459	—	
Sタイプ 100cm	15471	15472	—	

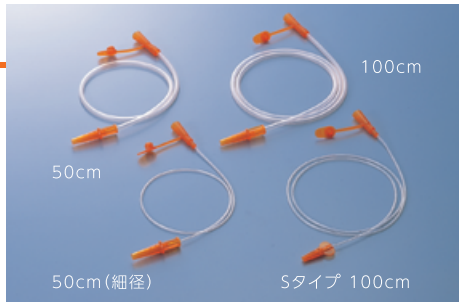

ネオフィード® 三方活栓

経腸栄養の幅を広げる
経腸栄養専用の三方活栓

Usability

- 流路の内径を大きくっており、栄養剤の流れがスムーズです(当社比)。

Safety

- キャップ付きEDアダプターはシリコンゴム材質を採用しており、各種カテーテルテーパー器具にしっかりと接続できます。

医療機器認証番号:21300BZZ00597000

品種	オレンジ	イエロー	グリーン	包装単位
三方活栓	01331	01332	01333	20個/箱、10箱/ケース



フォールド・ラップ®Ⅱ

ネオフィード®栄養チューブガストロストミーチューブ(フォールドバンパー)専用
経皮的抜去補助具

ネオフィード®栄養チューブガストロストミーチューブ
(フォールドバンパー)の経皮的抜去を、
スムーズに、セーフティにサポート

Usability

- バンパーを小さく格納し、瘻孔への負担を軽減します。

Safety

- 瘻孔破損のリスクを軽減し、血液などの飛散を防ぎます。

【注意】本製品は、チューブ径が20Frのネオフィード®栄養チューブガストロストミーチューブ(フォールドバンパー)のみにご使用ください。



医療機器届出番号:13B1X00085000107

品種	コード	対応チューブサイズ	包装単位
フォールド・ラップ®Ⅱ	20553	20Fr	3本/箱

スマートアンカー®

胃瘻造設用胃壁固定具

より安全に、簡便に胃瘻造設をサポート

Usability

- 穿刺からアンカーのリリースまで片手操作が可能で、より安全に迅速な胃瘻造設手技をサポートします。

Safety

- リリースと同時に掛かるセーフティロック機構により、アンカーリリース後の針刺し事故を防止します。



3本セット

医療機器承認番号:22400BZX00098000

品種	コード	針径	針長	目盛間隔	包装単位
スマートアンカー®	20561	17G(1.5mm)	75mm	針先先端 30mmから10mm毎	3本/箱
	20562				1本/箱

フォールドバンパー胃瘻造設キット (イントロデューサー変法)

脱気防止弁付きシースダイレーターを採用

Usability

- 胃瘻造設に必要な部材がひとまとめになっています。
- オペチュレーターによりバンパーを流線型に変形、スムーズな挿入が可能です。

Safety

- 脱気防止弁付きシースがエア漏れを軽減し、胃瘻カテーテルを安全に胃内への挿入をサポートします。



医療機器承認番号:22500BZX00317000

品種	コード	フィーディングコネクター	チューブ径	クランプ	固定板タイプ	包装単位
20Fr DRC	20524	ダブルポート	20Fr	○	リング	1キット/箱
24Fr DRC	20525		24Fr			

アイボタンR

交換用胃瘻カテーテル バンパー型ボタンタイプ

挿入性を向上、生まれ変わったアイボタンRです

Usability

- 接続チューブはラウンド形状とリブにより持ちやすく、皮膚に優しいデザインです。

Safety

- 瘻孔長の変化に対応する可変型バンパーを搭載、使用する方やご家族にとってやさしい胃瘻ケアをサポートします。
- 専用の抜去器具が必要なく、抜去の際はバンパーが自ら反転する構造です。

医療機器承認番号:22700BZX00302000

コード	サイズ	有効長	ガイドワイヤー	包装単位	コード	サイズ	有効長	ガイドワイヤー	包装単位
24101	16Fr	2.5cm	なし	1キット/箱	24119	16Fr	2.5cm	あり	1キット/箱
24102		3.0cm			24120		3.0cm		
24103		3.5cm			24121		3.5cm		
24104		4.0cm			24122		4.0cm		
24105		4.5cm			24123		4.5cm		
24106		5.0cm			24124		5.0cm		
24107	20Fr	2.5cm			24125	20Fr	2.5cm		
24108		3.0cm			24126		3.0cm		
24109		3.5cm			24127		3.5cm		
24110		4.0cm			24128		4.0cm		
24111		4.5cm			24129		4.5cm		
24112		5.0cm			24130		5.0cm		
24113	24Fr	2.5cm			24131	24Fr	2.5cm		
24114		3.0cm			24132		3.0cm		
24115		3.5cm			24133		3.5cm		
24116		4.0cm			24134		4.0cm		
24117		4.5cm			24135		4.5cm		
24118		5.0cm			24136		5.0cm		



ネオフィード® ガストロストミーチューブ (バルーンタイプ)

ラップガード(チューブ型)

水抜けの少ないバルーン構造を実現

Usability

- ピラミッド型の固定板は瘻孔の刺激を軽減し、瘻孔の通気性を保ちます。また、固定板を反転させる事で瘻孔周辺のケアが可能です。

Safety

- バルーン先端からチューブの突出がない形状で胃粘膜への刺激を軽減します。

医療機器認証番号:219AABZX00060000

コード	サイズ	バルーン推奨容量	チューブ長	X線不透過ライン	包装単位
20531	12Fr	10ml	220mm	あり	1本/箱
20532	14Fr	10ml			
20533	16Fr	20ml			
20534	18Fr	20ml			
20431	20Fr	10ml			
20432	20Fr	20ml			
20433	22Fr	20ml			
20434	24Fr	20ml			



トップ 栄養カテーテル

不透過ライン入り


挿入時の位置確認をより確実に

Usability

- 80cmタイプは、留置中のカテーテルをすっきりとまとめられます。

Safety

- 全品種が、挿入位置の確認が容易な不透過ライン入りです。
- 全長80cmタイプは先端15cmから60cmの位置まで、5cm毎に数字と目盛が付いています。
- 先端孔と側孔は、粘膜への刺激軽減を考慮し、滑らかに加工されています。

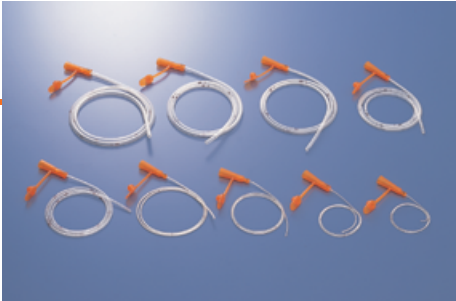

医療機器承認番号:20600BZZ00233000

サイズ	全長	オレンジ	イエロー	グリーン	包装単位
3Fr	35cm	20901	20921	—	25本/箱、8箱/ケース
4Fr	40cm	20902	20922		
5Fr	50cm	20903	20923		
6Fr	60cm	20904	20924		
8Fr	80cm	20906	20926		
10Fr		20907	20927		
12Fr		20908	20928		
14Fr		20909	20929		
16Fr		20910	20930		
8Fr	120cm	20911	20931	20951	
10Fr		20912	20932	20952	
12Fr		20913	20933	20953	
14Fr		20914	20934	20954	
16Fr		20915	20935	20955	

ネオフィード® シリンジ

最小1mLからラインナップ

Usability

- 1mLから50mLまで、幅広い選択が可能です。

Safety

- 最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
- 1mLから10mLの品種は、先端部のデッドスペースを小さい形状にしているため、残液量を最小限に抑えられます。



医療機器届出番号:13B1X00085000019

サイズ	オレンジ	イエロー	グリーン	包装単位
1mL	01049	01068	01078	50本/箱、8箱/ケース
2.5mL	01050	01069	01079	
5mL	01051	01061	01071	
10mL	01052	01062	01072	50本/箱、4箱/ケース
20mL	01053	01063	01073	25本/箱、8箱/ケース
30mL	01054	01064	01074	
50mL	01055	01065	01075	

ネオフィード® 保護栓

ED-KS

フィット感の高い柔軟な保護栓

Usability

- カテーテルテーパーのシリンジなどの先端キャップとして使用できます。

Safety

- 滅菌済みなので、シリンジに充填した栄養剤やミルクの保護に使用できます。



医療機器届出番号:13B1X00085000052

品種	オレンジ	包装単位
ED-KS	06431	50個/箱、20箱/ケース

ネオフィード® スムースチューブ

栄養剤のスムーズな投与に

Usability

- 各社栄養剤との接続力の強化を目的に、栄養剤側のアダプターは内側にも凸部を設け、柔軟な素材を採用しています。
- 患者側のコネクターは着脱を容易にするため、翼部が付いています。

Safety

- 栄養剤側のアダプターは透明なため、挿入過不足の確認が容易です。



医療機器届出番号:13B1X00085000115

チューブ長	オレンジ	内径	外径	内容量	包装単位
30cm	15482	3.5mm	5.0mm	4.9mL	10本/箱、20箱/ケース

ネオフィード® 栄養チューブ

ガストロストミーチューブ(フォールドバンパー)

ドーム型のバンパーが瘻孔に合わせて可変、よりスムーズな挿入を実現

Usability

- ドーム型バンパーを流線型に変形させるオブチュレーターにより、片手操作で挿入をスムーズに、安定した形で行うことができます。

Safety

- ドーム型バンパーには、やわらかい材質のシリコーンゴム(X線不透過)を採用しています。



医療機器承認番号:21500BZZ00559000

品種	コード	ガイドワイヤー	フィーディングコネクター	チューブ径	クランプ	固定板タイプ	包装単位
FB16SRC	20513	なし	シングルポート	16Fr	○	リングタイプ	1本/箱、20箱/ケース
FB16SBC	20516					パータイプ	
FB20SRC	20514			20Fr	○	リングタイプ	
FB20SBC	20517					パータイプ	
FB24SRC	20515			24Fr	○	リングタイプ	
FB24SBC	20518					パータイプ	
FB16DRC	20507		ダブルポート	16Fr	○	リングタイプ	
FB16DBC	20510					パータイプ	
FB20DRC	20508			20Fr	○	リングタイプ	
FB20DBC	20511					パータイプ	
FB20DR	20502			24Fr	—	リングタイプ	
FB24DRC	20509					リングタイプ	
FB24DBC	20512	パータイプ					
FB16SRC GW	20491	あり		シングルポート	16Fr	○	
FB16SBC GW	20492		パータイプ				
FB20SRC GW	20496		20Fr		○	リングタイプ	
FB20SBC GW	20497					パータイプ	
FB24SRC GW	20500		24Fr		○	リングタイプ	
FB24SBC GW	20501					パータイプ	
FB16DRC GW	20489		ダブルポート	16Fr	○	リングタイプ	
FB16DBC GW	20490					パータイプ	
FB20DRC GW	20494			20Fr	○	リングタイプ	
FB20DBC GW	20495					パータイプ	
FB20DR GW	20493			20Fr	—	リングタイプ	
FB24DRC GW	20498					リングタイプ	
FB24DBC GW	20499	24Fr	○	パータイプ			

※16Fr(ガイドワイヤーあり)は受注生産品となります。

ネオフィード® ENポンプ TOP-A600

やさしいデザインとかんたん操作

Usability

- 時間流量を3パターンまで登録が可能のため、登録しておけば流量設定で手間取ることはありません。
- 本体は600gとコンパクトなので、スタンドでの移動も容易です。
- アルカリ乾電池も使える2電源方式。

Safety

- 電源キーは2秒以上押し続けないと切れないので、注入中に誤って電源キーに触れてポンプが停止してしまうトラブルを防ぎます。
- 送液の開始と停止、発生した警報の種類が記憶されるヒストリー機能が付いています。
- メンテナンスモードを使うことで、流量精度のチェックや、各種警報の点検を行うことができます。



医療機器承認番号:22600BZX00017000

主な仕様	
クラス分類	クラスⅢ 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
使用栄養セット	ネオフィード EN ポンプ用セット (AH タイプ)
流量設定範囲	5 ～ 400mL/h 1mL/h, 5mL/h, 10mL/h ステップ (ファンクションモードで切換可能)
積算量表示範囲	0 ～ 9999mL 1mL ステップ
送液精度	±10%
早送り流量	400mL/h 以上 (連続回転)
空液検出設定	4 段階切換可能
閉塞検出圧力	150kPa 以下
警報・警告	閉塞、空液、栄養セット未取付、ドアオープン、操作忘れ、電源切換報知、バッテリー電圧低下、バッテリー切れ、バッテリー未接続、故障、送液完了、設定流量確認
機能	オートパワー OFF、再警報機能、ブザー設定、ブザー音量設定、ブザートーン設定、メンテナンスタイマー、ヒストリー機能、メンテナンスモード、流量プリセット設定、スタンバイ、キーロック、予定量設定モード、ドア開閉状態監視
電源	AC アダプター：型式 TA212 入力 AC100-240V±10% 50/60Hz 出力 DC12V 内蔵バッテリー：リチウムイオン電池、再充電可能 DC3.7V 2500mAh 型式：BP-A6L 連続使用時間：約 24 時間 (ただし、新品の内蔵バッテリーを完全に充電した状態で、100mL/h 設定時) アルカリ乾電池：単三形アルカリ乾電池 4 本 連続使用時間：約 24 時間 (ただし、新品のアルカリ乾電池で 100mL/h 設定時)
外形寸法	100 (幅) × 150 (高さ) × 50 (奥行) mm
重量	約 0.6kg
付属品	AC アダプター：1 セット 取扱説明書：1 部 簡易取扱説明書：1 部 品質保証書：1 部 添付文書：1 部

ネオフィード® ENポンプ用セット AHタイプ

ネオフィードENポンプTOP-A600専用の栄養セットです

Usability

- バッグ付やフリーフロー防止弁付もラインナップしています。



医療機器認証番号:226ALBZX00001000

品種	オレンジ	備考	包装単位
AH-O	06481	—	20本/箱、9箱/ケース
AH-E600-O	06482	E/バッグ600mL付	20本/箱、6箱/ケース
AH弁付-O	06483	フリーフロー防止弁付	20本/箱、9箱/ケース
AH弁付-E600-O	06484	フリーフロー防止弁、E/バッグ600mL付	20本/箱、6箱/ケース

●製品改良にともない予告なく仕様、外観などを変更させて頂く場合がありますので、ご了承下さい。

製造販売業者

株式会社トップ

本社:〒120-0035
東京都足立区千住中居町19番10号