

1000000 Million Aid / ミリオンエイド®

Shot Patti

穿刺部被覆保護材 / ショットパッチ

滅菌済医療機器



特 長

- ## 固定用シール

・摘み部分が付いており
簡単・清潔

肌色の不織布

刺激の少ない粘着剤

5連仕様

注射針の大きさ(ゲージ)の目安表


注射針の大きさ(ゲージ)	27	26	25	24	23	22	21
ミリオンエイド® ショットパッチ							

使用方法



固定シールを剥がす

シート裏面の固定用テープの剥離紙を剥がします。

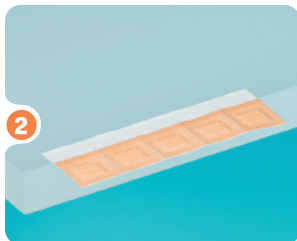

治療台に固定

治療台に固定します。



摘み部分を摘んで剥がす

折り返されている部分を摘んでシートから剥がしてください。



しっかり固定

そのまま粘着部を押さえて
しっかり固定してください。

■使用上の注意

●傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。●粘着部を穿刺部に貼らないでください。●小児に使用される場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。●滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。●包装が破損及び汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

■貯蔵及び保管方法

●直射日光があたらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

規格	粘着部サイズ	パッド部サイズ	色	品名コード	個装 [メーカーコード 4971620]			外装 [メーカーコード 14971620]	
					標準希望小売価格	入数	JAN	入数	GTIN
S	20mm×23mm	10mm×10mm	ベージュ	MC-SHOT-S	3,300円	40袋 (1,000回分)	847947	20箱	847944
M	27mm×30mm	15mm×15mm	ベージュ	MC-SHOT-M	3,000円	25袋 (500回分)	847954	20箱	847951

※希望小売価格には、消費税は含まれておりません。



大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橘3-20-28
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所：札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所：熊本

☎ お問い合わせ先

.....
メディカルグループまで

大阪 TEL:06-6658-8217
FAX:06-6658-8101

東京 TEL:03-5634-3843
FAX:03-5634-3845

XJ002 17.11-1,000 第15版