

膝関節固定帯

ニースプリント

伸展タイプ

屈曲タイプ

製品情報は
こちらからも
ご覧いただけます。

主な用途：伸展タイプ／膝関節の伸展位固定
屈曲タイプ／膝関節の軽度屈曲位固定




特長

膝関節の固定に。

- 伸展位で固定する伸展タイプと軽度屈曲位で固定する屈曲タイプの2種類を用意しました。
- 変形・取り外しの可能なアルミ製の膝裏ステーを装備。面ファスナーの蓋がステーの飛び出しを防止する設計です。屈曲タイプは予め軽度屈曲位に加工しています。
- 側面にもアルミ製のステーを配置。ステーの挿入位置を前後に微調整することが可能です。
- 膝裏には通気性の高い生地を採用し快適な装着感です。
- 楽に装着ができる仮どめ面ファスナー付きです。

品番	種類	製品丈	適用範囲(大腿周囲)	適用参考値(大腿長)	1箱入数
伸展タイプ					
301001	S	48.5 cm	33 cm ~ 41 cm	26cm以上	1コ
301002	M・L	48.5 cm	41 cm ~ 53 cm	26cm以上	1コ
301012	ロングM・L	52.0 cm	41 cm ~ 53 cm	29cm以上	1コ
301014	ロングLL	52.0 cm	53 cm ~ 65 cm	29cm以上	1コ
301021	ショートS	41.5 cm	33 cm ~ 41 cm	19cm以上	1コ
301022	ショートM・L	41.5 cm	41 cm ~ 53 cm	19cm以上	1コ
屈曲タイプ					
301101	S	48.5 cm	33 cm ~ 41 cm	26cm以上	1コ
301102	M・L	48.5 cm	41 cm ~ 53 cm	26cm以上	1コ
301112	ロングM・L	52.0 cm	41 cm ~ 53 cm	29cm以上	1コ
301114	ロングLL	52.0 cm	53 cm ~ 65 cm	29cm以上	1コ

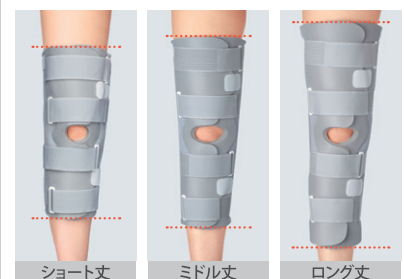

- さまざまな使用状況や体型に対応するために、豊富なサイズバリエーションを揃えました。
- 大腿周囲41～53cmの場合では、丈の長さが異なる「ショートM・L」(伸展タイプのみ)、「M・L」と「ロングM・L」を用意しました。

※大腿周囲を基準に選び、大腿長は目安としてください。
※大腿周囲は膝蓋骨の中心から10cm上を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。