


Products Lineup [製品ラインアップ]

コード: 16030	キウイ娩出吸引カップ	プロカップ/ 1個	承認番号: 21600BZY00662000
コード: 16031	キウイ娩出吸引カップ	プロカップ/ 5個入	
コード: 16032	キウイ娩出吸引カップ	オムニカップ/ 1個	
コード: 16033	キウイ娩出吸引カップ	オムニカップ/ 5個入	
コード: 16034	キウイ娩出吸引カップ	オムニカップ/ 牽引計付/ 1個	
コード: 16035	キウイ娩出吸引カップ	オムニカップ/ 牽引計付/ 5個入	承認番号: 22400BZX00509000
コード: 16036	キウイオムニカップC	1個	
コード: 16037	キウイオムニカップC	5個入	

Specifications [仕様]

吸 引 圧	0～93kPa (0～700mmHg) ●本品の吸引圧ゲージは適正な娩出吸引圧を得るための目安であり、検定値ではありません。
カ ッ プ 寸 法	プロ カ ッ プ: 内径65mm オムニカップ: 内径50mm 厚さ20mm オムニカップC: 内径50mm 厚さ14mm
⚠再使用・再滅菌禁止	
ガンマ線滅菌済	

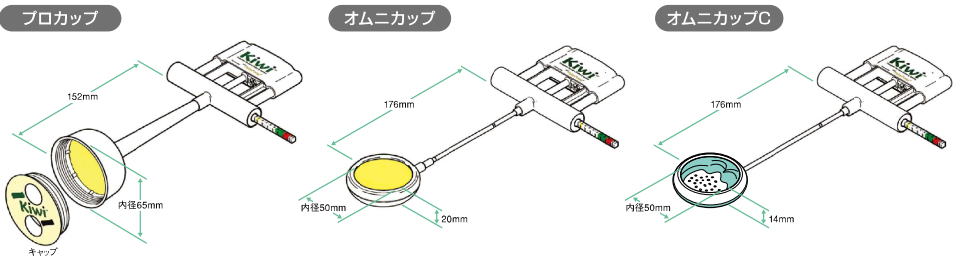

アトムメディカル株式会社

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-18-15
<http://www.atomed.co.jp>

お問い合わせ総合窓口【カスタマーサポート】

☎0800-111-6050 受付時間 平日9:00～17:00
03-6388-9887

●製品は常に改良が行われており、仕様や形状がカタログと相違することがありますので予めご了承ください。

ob05-05 12.2017.Printed



キウイ娩出吸引カップ・キウイ オムニカップC



通常の吸引分娩や帝王切開術に対応する、
片手で簡単に操作できる、ポンプ一体型のディスプレイ娩出カップです。



片手で操作できる一体型ポンプ




コンパクトなハンドルに、吸引ポンプと吸引圧ゲージが組み込まれているので、片手で簡単に操作できます。

児頭にやさしくフィット

Pro Cup

プロカップ

児頭の形に合わせてデザインされた、ソフトな材質のプロカップは、児頭への接触面が広く、的確にフィットするので、人工産瘤を最小限に抑えます。

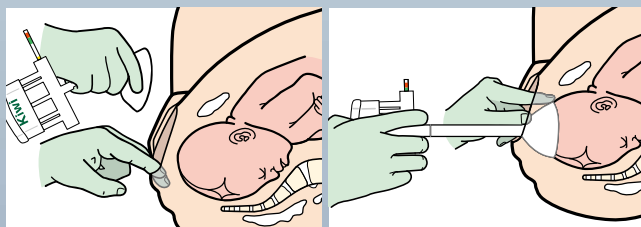


様々な回旋異常に

Omni Cup

オムニカップ

オムニカップ/牽引計付

薄型で角度を自在に変えられるオムニカップは、挿入が容易で、様々な回旋異常の場合でも、児頭に適切に装着することができます。

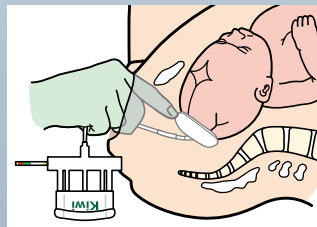


牽引計付は、誘導時の牽引力を確認しながら娩出することができます。

帝王切開術時の吸引娩出に

Omni Cup C

オムニカップC

超薄型設計のオムニカップCは、子宮内への挿入が容易で、児頭へ適切に装着できます。

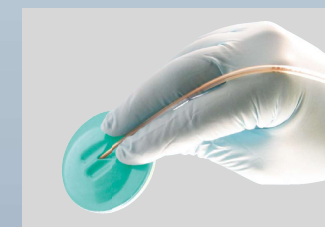

カップに指を掛けるくぼみを付けたので、指先で容易に操作できます。

オムニカップに比べ約30%薄型なので、挿入と装着が容易です。