


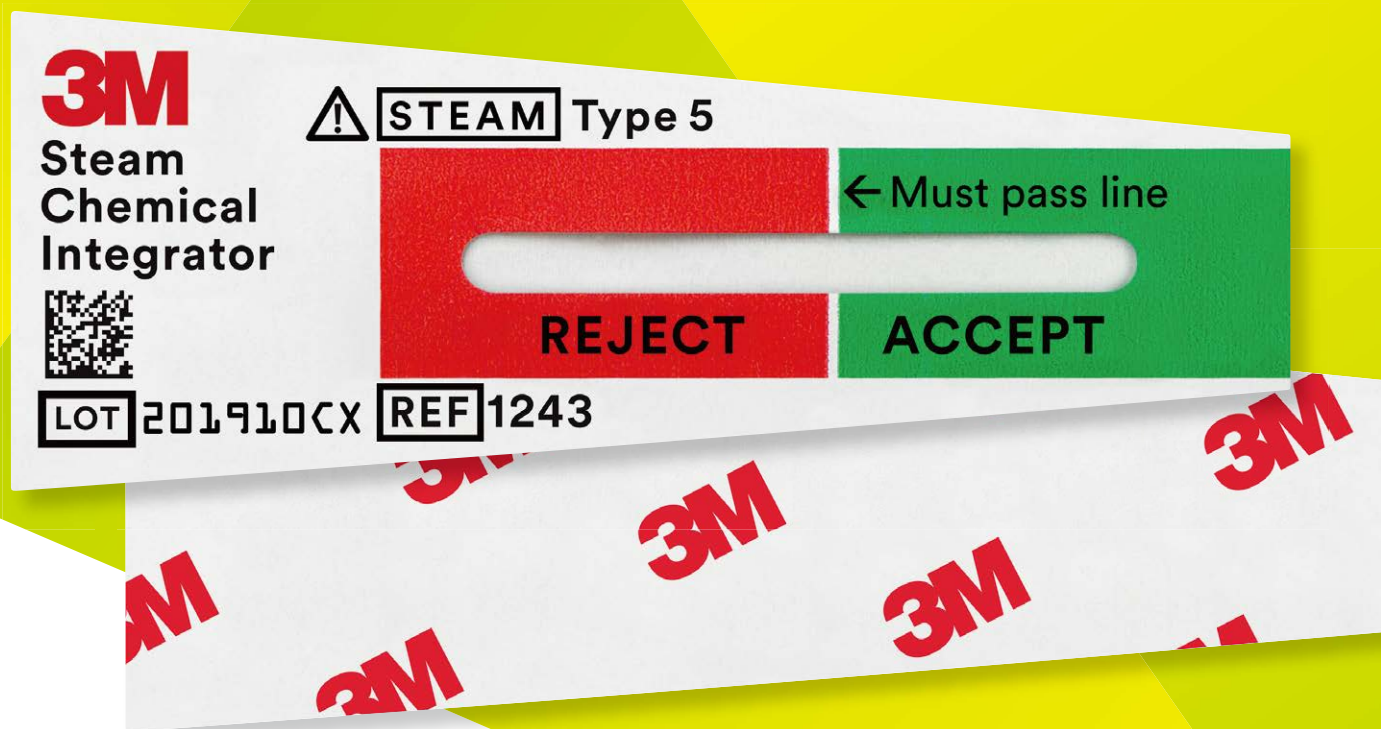

ISO 11140-1 Type 5 準拠

パッと目に付き、 ひと目で判定。

3M™ アテスト™ 高圧蒸気滅菌用
化学的インテグレータ
1243A / 1243B

3M™ Attest™ Steam Chemical Integrators
1243A / 1243B

3Mが提供するType5の化学的インジケータが
より一歩理想のインジケータへと近づきました。

お客様の声に応じて
より使いやすく
リニューアル！


医材が供給された現場での使いやすさを重視したデザイン

使用現場の困りごと1

あれ？インジケータどこだ？

コンテナの中でもパッと目立つ

新しいカラフルなデザインはコンテナのなかでもよく目立ち、自然と注意をひくため使用者も見落としにくく、滅菌判定を現場にしっかりお伝えします。

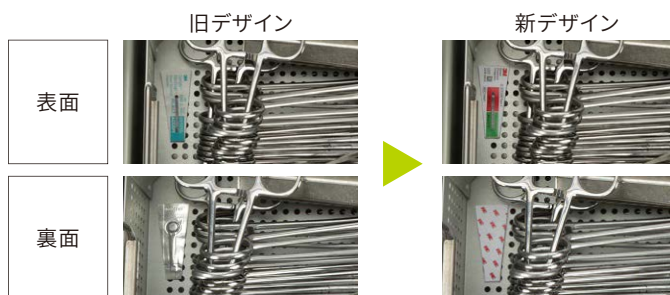

使用現場の困りごと2

このインジケータは合格？不合格？

微妙な色変化にもう迷わない、 合否の基準がクリアなムービングフロント方式でひと目で判定

インクの色変化で判定する方式のインジケータを使用していて、その合否判定に悩まれたことはありませんか？


色に対する感性は人によって違います。同じインジケータを見ても合否の境が人によってズレてしまうことも、

インクの伸びで判断するムービングフロント方式ならもう迷いません。

色変化方式

白から黒になったら合格

合格？
不合格？

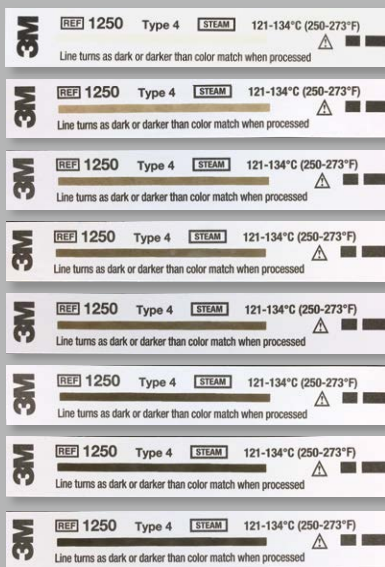


ムービングフロント方式

インクが緑のゾーンに到達したら合格

これなら
迷わないわ

不合格

合格

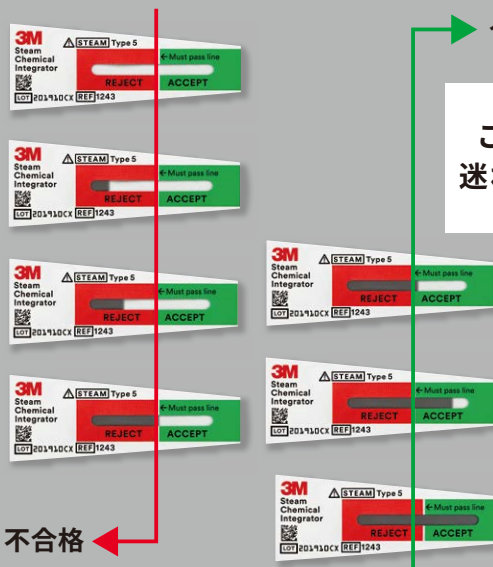

	製品番号	仕様	入れ目 枚／袋
	1243A	蒸気滅菌用 適用：121~135°C	500
	1243B	ISO11140-1 Type5 規格準拠 ムービングフロント判定方式 サイズ（幅×長さ）：19mm × 51mm	100

3M、アテスト、Attestは、3M社の商標です。

2021年11月発行



スリーエム ジャパン株式会社

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
HPM-949-B(1121)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

9:00~17:00/月~金（土日祝年末年始は除く）