

ハンディサイズ
新登場!!



クレシア やわらかクロス シリーズ

CRECIA SOFT CLOTH

特 長

- お肌に優しいやわらかい素材
- むらして絞って使える丈夫な素材
- 優れた吸収性能
- たて強度にも、よこ強度にも優れた
спанレースクロスレイ製法
- 低発塵設計

用 途

- 身体清拭
- 環境清拭(感染対策に)
- 超音波(エコー)検査後のゼリーの拭き取り
- 内視鏡洗浄時のディスポワイパーとして

身体清拭



環境清拭



特に多くの人が
触れる場所の
拭き取りに



学校やオフィスなど、
人が集まる場所の
清掃にもおすすめ



クレシア
やわらかクロス

おすすめ用途

濡らしてしぼっても そのままでも スプレーと一緒に 使えます

身体清拭

お肌に優しいやわらかい素材のため、お年寄りや患者さんにも安心



環境清拭

ドアノブ・ベッド周り・ストレッチャー器具器材の清拭に



超音波(エコー)検査

やわらかい素材のため検査後のゼリーの拭き取りにも安心




内視鏡洗浄用

保管前のスコープに付着した水分の拭き取りに



日々お使いになる身体清拭用品

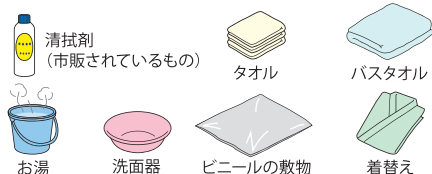

陰部用タオルを別に用意

感染予防対策として

やわらかクロスは微温湯(30~40℃)に浸して、からだの清拭に使用することができます。排泄介助の現場では陰部洗浄を徹底し、尿路感染症を未然に防ぐために使用されています。

製品特長データ

衛生現場で使用される**消毒用エタノール**や**次亜塩素酸ナトリウム**、**滅菌処理**にも耐えられます。

※保管条件・使用環境により大幅な変化がみられる場合があります。※自社測定値であり、保証値ではございません。

ウェット強度比較

指数: 水に浸した強度を100とした場合



試験方法: ワイパーに十分な量の薬液を含ませ、24時間静置後、ウェット状態のまま縦強度を測定

滅菌処理(オートクレーブ)後のドライ強度比較

指数: 処理前の強度を100とした場合



試験方法: ワイパーを120℃、20分間の条件でオートクレーブ処理した後、乾燥させ、ドライ状態の縦強度を測定

製品仕様

製品画像	製品名	製品番号	JANコード	製品情報						
			GTINコード							
	クレシア やわらかクロス ハンディワイパー	65205	4901750652050	100 枚	30 ボックス ケース入数	1 プライ	170mm × 220mm シートサイズ	レーヨン × ポリエステル 素 材	RoHS 指令 規格	食品衛生 試験実施済 規格
			14901750652057							
	クレシア やわらかクロス	65200	4901750652005	50 枚	18 バック ケース入数	1 プライ	320mm × 335mm シートサイズ	レーヨン × ポリエステル 素 材	RoHS 指令 規格	食品衛生 試験実施済 規格
			14901750652002							

ハンディタイプは
紙製のボックス入り!
取り出し口は
フィルムレスで
環境にやさしい



日本製紙グループ

日本製紙クレシア株式会社

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6
ホームページ <https://pro.crecia.co.jp>

北海道業務用品営業所 011-281-3881
東北業務用品営業部 022-264-2461
関東業務・産業用品営業部 03-6665-5327
中部業務用品営業部 052-220-5206
関西業務・産業用品営業部 06-6389-2047
中四国業務用品営業所 082-545-6600
九州業務用品営業部 092-725-8282

販売店