

Salem Sump™ セイラム サンプ™ チューブ


逆流防止弁付で 快適な医療環境




セイラム サンプ™ チューブ の特長

- 逆流防止弁が逆流による汚染を防ぎ、看護業務のゆとりと、医療環境を快適に保ちます。


正常に機能している時の状況

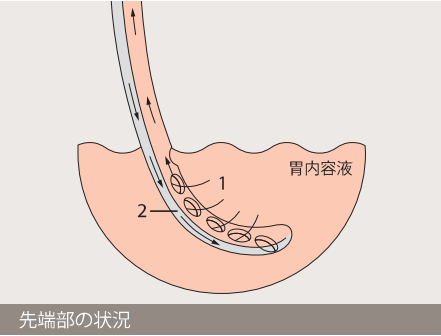

1. 胃内容液は、排液腔に引き込まれます。
2. 側孔にかかった吸引圧は、エアールーメンを通して流入する空気によって適切な圧に維持されます。

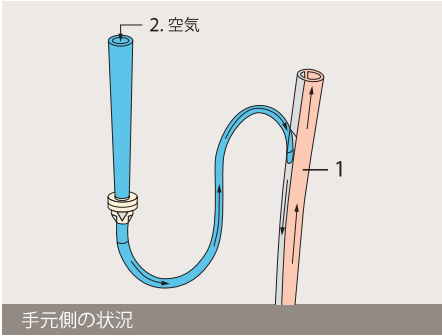

1. 胃内容液は、排液腔から排液されます。
2. 空気が一方弁を通してエアールーメンに流入します。

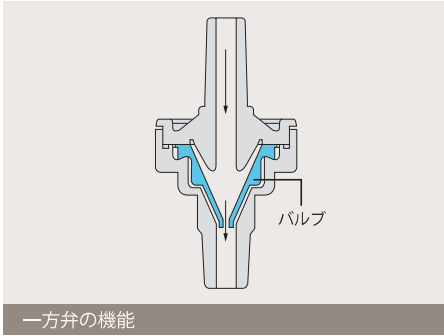

1. 胃内容液は、排液腔から排液されます。
2. 空気が一方弁を通してエアールーメンに流入します。

セイラム サンプ チューブ (逆流防止弁付)

カタログ番号	カテーテル	全長 (cm)
	外径 (mm)	
3201-10	3.3 (10Fr)	88
3201-12	4.0 (12Fr)	120
3201-14	4.7 (14Fr)	
3201-16	5.3 (16Fr)	
3201-18	6.0 (18Fr)	
3201-8-S	2.7 (8Fr)	88
3201-10-S	3.3 (10Fr)	
3201-12-S	4.0 (12Fr)	120
3201-14-S	4.7 (14Fr)	
3201-16-S	5.3 (16Fr)	
3201-18-S	6.0 (18Fr)	

S…ソフトタイプ 包装：1本毎滅菌済 包装単位：50本／箱 ピールバック入り 再使用禁止
材質：ポリ塩化ビニル

製品規格

- 一般的名称：短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル
販売名：セイラム サンプ チューブ
医療機器認証番号：225AABZX00046000
クラス分類：II 管理医療機器



cardinalhealth.jp

製品情報・
FAQサイトは
こちら



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
TEL 0120-917-205