


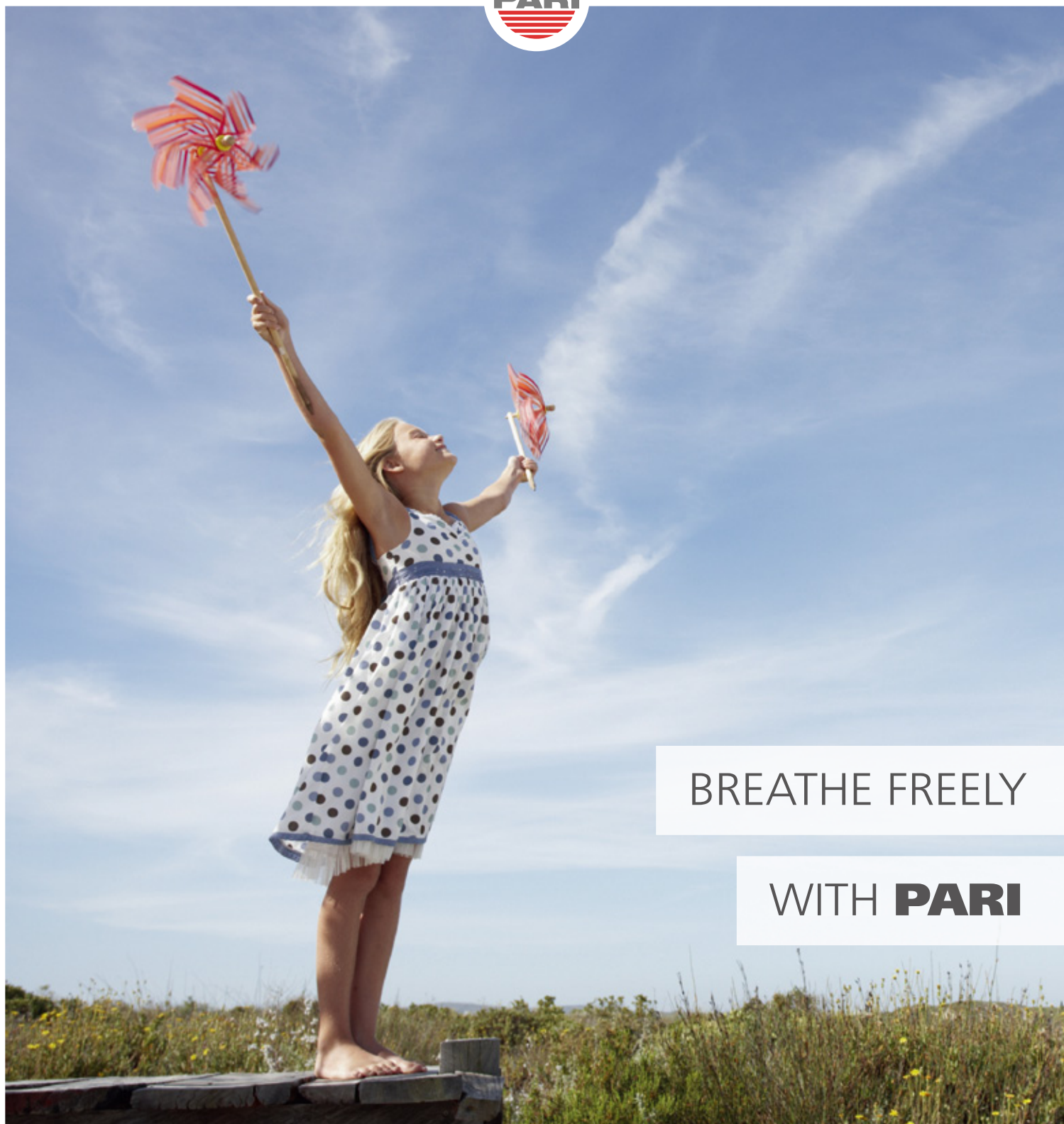

BREATHE FREELY

WITH **PARI**

PARI PRODUCT OVERVIEW
パリ 総合カタログ

吸入器

PARI ジーヌス	3
PARI ベロックス	5
PARI ボーイSX	7
PARI ジュニアボーイSX	8
PARI ベーシック	9
PARI イプシータ	10

ネブライザー

PARI スプリント ファミリー	11
PARI PIF コントロールシステム	12
ネブライザー 一覧	13
PARI LCプラスネブライザー(中央配管用)	15

スパーサー

PARI ボアテックス	17
-------------------	----

呼吸訓練器具・鼻ケア用品

PARI オーベップ	19
PARI モンテゾール	20

製品一覧

製品一覧	21
旧製品パーツ 一覧	26



上気道

PARI ジーヌス

振動により吸入薬剤を副鼻腔まで到達させます

3年保証
(コンプレッサーのみ)

注文コード M23-001-08
品 番 028G1006
標準価格 **¥90,000**

吸入器仕様

電 源: AC100V 50/60Hz
流 量: 4ℓ/分(ネブライザー接続時)
重 量: 約1.8kg
外形寸法:
約W19.2×D15×H14.5cm
保証期間: 3年(コンプレッサー)

一般医療機器


届出番号: 27B1X00024000318
販 売 名: PARI ジーヌス



副鼻腔炎の治療の際にPARI ジーヌスはネブライザー治療で知られている利点だけでなく、エアロゾルを振動させることで自然口を通り副鼻腔内の必要な部位に薬液を届けます。

- ・振動したエアロゾルは副鼻腔内に吸入薬剤を沈着させます。
- ・LCスプリント等、下気道用ネブライザー(別売)も接続可能です。
- ・副鼻腔炎、鼻副鼻腔炎、副鼻腔気管支症候群の治療
- ・鼻にやさしい、非侵襲的治療法

標準セット内容

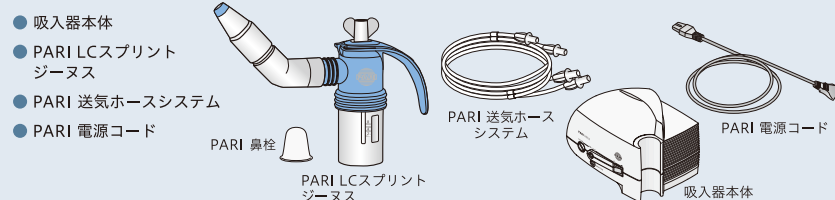

エアロゾルの特性

分時噴霧量: 167mg/分
粒子径中央値: 3.2μm
5μm以下の粒子質量比率: 72%

<測定条件>
使用電源: 100V 60Hz
試験液: 0.9%生理食塩水(5ml)
室温: 23℃、湿度: 50%
測定装置: Malvern社 Master Sizer X
流量: 4ℓ/分(ネブライザー接続時)
分時平均吸気流量: 4.2ℓ/分

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCスプリントジーヌス 送気ホース無	M23-001-19	023G2800	¥8,730
PARI 送気ホースシステム	M23-004-99	041B4570	¥3,000
PARI 鼻栓(3個入)	M23-004-97	041B0576	¥1,550
PARI コンプレッサー用電源コード	M23-004-78	041E8238	¥2,400
PARI エアフィルター	M23-004-48	085E1014	¥480

別売品	注文コード	品 番	標準価格
PARI スプリントジーヌスアプリケーションセット	M23-004-81	023G2840	¥2,500
PARI LCスプリントネブライザー 送気ホース無	M23-001-13	023G1007	¥5,000
PARI LCスプリントエクセレントネブライザー	M23-001-22	023G1801	¥8,400
PARI マウスピース 呼吸バルブ無	M23-004-10	012E1720	¥520
PARI ノーズアダプター(マウスピース用)	M23-004-38	041E0135	¥600
PARI 送気ホース1.2m	M23-004-45	041B4591	¥1,500
PARI キャリングケース	M23-004-51	085E1100	¥8,500





下気道

PARI ベロックス

スピーディーかつ効率的な
吸入治療を可能にしたメッシュ式ネブライザー

保証期間

コントローラー：2年
ベロックスケア：6ヶ月



注文コード M23-001-16

品 番 055G1012

標準価格 ¥38,000

吸入器仕様

電 源：AC100V 50-60Hz(専用ACアダプター使用時)、単3形アルカリ電池(DC1.5V)×3本、単3形ニッケル水素充電電池(DC1.2V)×3本

消費電力：2.0W Max(専用ACアダプター使用時)

重 量：110g(電池含まず)

外形寸法：
ネブライザー：約W13.9×D6.1×H6.6cm
コントローラー：約W 7.2×D6.0×H9.1cm

保証期間：2年(補充品除く)

一般医療機器

届出番号：27B1X00024000332

販 売 名：PARI ベロックス


PARI ベロックスは、下気道に疾患のある患者の生活をより快適にします。
小型・軽量で、携帯に便利です。

PARI ベロックスは、日々の生活の中で使用していただくことで、患者の日常生活をサポートします。

- **スピーディーかつ効率的な吸入治療**：約3分間の吸入時間で薬液(サルブタモール)2.5mlを吸入することが可能です。
- **携帯に便利**：AC電源または電池での使用が可能なコンパクトサイズ設計。
※本体重量：110g(電池含まず)/140g(電池含む)
- **取扱いが簡単**：少ないパーツ構成で軽量。人間工学にもとづいた設計で取扱いが簡単です。
- **常に安定した能力を発揮**：付属のベロックスケアを使用し、簡単に短時間でメンテナンスが可能です。

標準セット内容


- 吸入器本体(コントローラー、イヤープック)
- PARI スマートマスクベビー
- PARI 大人用ソフトマスク
- PARI ベロックスケア
- PARI AC アダプター
- PARI キャリングケース

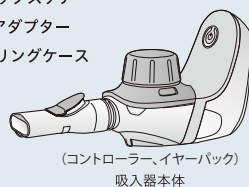

(コントローラー、イヤープック)
吸入器本体




PARI ベロックスケア

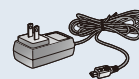

PARI AC アダプター



PARI キャリングケース

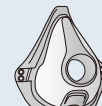

PARI 大人用ソフトマスク



PARI スマートマスクベビー

エアロゾルの特性

分時噴霧量：497mg/分

粒子径中央値：3.8μm

5μm以下の粒子質量比率：74%

<測定条件>
試験液：0.9%生理食塩水(2.5ml)
室温：23℃、湿度：50%
測定装置：Laser diffraction(Helos Sympa Tec)
分時平均吸気流量：20ℓ/分

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI ベロックスケア	M23-005-01	055G6100	¥2,500
PARI キャップ	M23-005-07	055G3500	¥750
PARI ACアダプター	M23-005-02	055G7101	¥5,300
PARI スマートマスクベビー	M23-005-06	055G4500	¥4,500
PARI キャリングケース	M23-005-03	055G8000	¥2,600
PARI ベロックスイヤープック	M23-005-04	055G3010	¥13,000
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥1,900

吸入器

ネブライザー

スパーサー

呼吸訓練器具
鼻ケア用品

製品一覧





下気道

PARI ボーイSX

子供から大人まで様々な年代に対応した
下気道治療のスタンダード

4年保証

(コンプレッサーのみ)

注文コード M23-001-10

品 番 085G3012

標準価格 ¥35,000

吸入器仕様

電 源: AC100V 50-60Hz

流 量: 4ℓ/分(ネブライザー接続時)

重 量: 約1.7kg

外形寸法:

約W19.2×D15×H14.5cm

保証期間: 4年(コンプレッサー)

一般医療機器

届出番号: 27B1X00024000320


販 売 名: PARI ボーイSX



PARI LCスプリントネブライザーは、下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間の短縮を実現しました。

標準セット内容

- 吸入器本体
- PARI 送気ホース
- PARI 電源コード
- PARI LC スプリントネブライザー(インサート 青)
- PARI マウスピース(呼吸バルブ付)
- PARI 噴霧ボタン
- PARI 小児用ソフトマスク

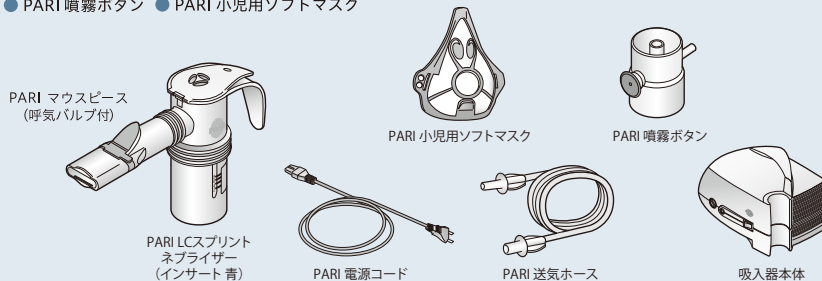

※小児用ソフトマスクは、くるリンもしくはびかりんのどちらかが付属しております。

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCスプリントネブライザー 送気ホース無	M23-001-13	023G1007	¥ 5,000
PARI 噴霧ボタン	M23-004-32	022G1000	¥ 2,400
PARI コンプレッサー用電源コード*	M23-004-78	041E8238	¥ 2,400
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥ 1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりん)	M23-004-31	041G0742	¥ 1,900
PARI 送気ホース1.2m	M23-004-45	041B4591	¥ 1,500
PARI エアーフィルター	M23-004-48	085E1014	¥480

エアロゾルの特性

分時噴霧量: 442mg/分

粒子径中央値: 3.9μm

5μm以下の粒子質量比率: 63%

〈測定条件〉
使用電源: 100V 60Hz
試験液: 0.9%生理食塩水(5ml)
室温: 23℃、湿度: 50%
測定装置: Malvern社 Master Sizer X
流量: 4ℓ/分(ネブライザー接続時)
分時平均吸気流量: 20ℓ/分

別売品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCスプリントイヤークラップ	M23-001-04	023G1002	¥ 6,800
PARI フィルター・バルブセット	M23-004-36	041G0500	¥ 4,300
PARI ペップSシステム	M23-004-91	018G4000	¥ 7,700
PARI LCスプリントトラケオ	M23-004-90	023G1080	¥ 8,400
PARI キャリングケース	M23-004-51	085E1100	¥ 8,500
PARI スマートマスク	M23-004-28	041G0730	¥ 11,000
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥ 1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりん)	M23-004-31	041G0742	¥ 1,900
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥ 1,900

PARI ジュニアボーイSX

乳幼児から小児に適した
エアロゾル粒子径
カラフルな外観





4年保証
(コンプレッサーのみ)

PARI ジュニアボーイSXは、乳幼児から小児までの吸入治療に選ばれています。
乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。

- PARI LCスプリントジュニアは乳幼児や小児の小さな気道に適したネブライザーです。
- 乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付

標準セット内容

- 吸入器本体
- PARI 送気ホース
- PARI 電源コード
- PARI LCスプリントジュニア (インサート 黄)
- PARI フレンズ
- PARI ベビーマスク (中)
- PARI ベビーベント
- PARI マウスピース (呼吸バルブ付)
- PARI マウスピース (呼吸バルブ付)

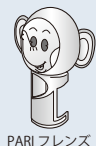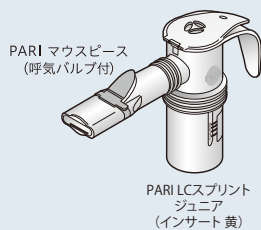

PARI LCスプリント
ジュニア
(インサート 黄)

PARI 電源コード

PARI 送気ホース

吸入器本体

注文コード	M23-001-11
品 番	085G3312
標準価格	¥38,000

吸入器仕様

電 源:	AC100V 50-60Hz
流 量:	4ℓ/分 (ネブライザー接続時)
重 量:	約1.7kg
外形寸法:	約W19.2×D15×H14.5cm
保証期間:	4年 (コンプレッサー)

一般医療機器

届出番号:	27B1X00024000319
販 売 名:	PARI ジュニアボーイSX

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCスプリントジュニア 送気ホース無	M23-001-07	023G7005	¥5,100
PARI ベビーマスク (中) ベビーベント付	M23-004-24	041G0702	¥6,000
PARI コンプレッサー用電源コード	M23-004-78	041E8238	¥2,400
PARI 送気ホース1.2m	M23-004-45	041B4591	¥1,500
PARI エアーフィルター	M23-004-48	085E1014	¥480
PARI ベビーベント	M23-004-21	041E0701	¥1,300
PARI フレンズ (シール無)	M23-004-96	022G7036	¥1,200
PARI フレンズ・シール (ゾウ)	M23-004-98	022D0046	¥250

別売品	注文コード	品 番	標準価格
PARI 唾液トラップ	M23-004-35	041G0530	¥1,500
PARI フィルター・バルブセット	M23-004-36	041G0500	¥4,300
PARI 噴霧ボタン	M23-004-32	022G1000	¥2,400
PARI ペップSシステム	M23-004-91	018G4000	¥7,700
PARI キャリングケース	M23-004-51	085E1100	¥8,500
PARI ベビーマスク (新生児用) ベビーベント付	M23-004-22	041G0700	¥6,000
PARI ベビーマスク (小) ベビーベント付	M23-004-23	041G0701	¥6,000
PARI ベビーマスク (大) ベビーベント付	M23-004-25	041G0703	¥6,000

エアロゾルの特性

分時噴霧量:	240mg/分
粒子径中央値:	3.4μm
5μm以下の粒子質量比率:	70%

〈測定条件〉
使用電源: 100V 60Hz
試験液: 0.9%生理食塩水 (5ml)
室温: 23℃、湿度: 50%
測定装置: Malvern社 Master Sizer X
流量: 4ℓ/分 (ネブライザー接続時)
分時平均吸入流量: 12ℓ/分

PARI ベーシック

軽量(360g)で携帯に便利
手軽で効果的な吸入療法を可能にした吸入器

2年保証
(コンプレッサーのみ)

注文コード M23-001-23
品 番 047G3012
標準価格 **¥24,000**

吸入器仕様

電 源: AC100V 50-60Hz
流 量: 3.8ℓ/分(ネブライザー接続時)
重 量: 約360g
外形寸法:
約W8.9×D11.3×H4.5cm
保証期間: 2年(コンプレッサー)

一般医療機器


届出番号: 27B1X00024000395
販 売 名: PARI ベーシック



小さいながらもパワフルなコンプレッサーで、効果的な吸入治療が行えます。
別売品のバッテリーパックを装着していても520gという軽さで、どこへでも携帯可能です。
コンプレッサーの連続運転可能時間は30分です。

・付属品のACアダプター以外に別売のDC12Vシガーライター・アダプター、バッテリーパックが使用できます。

標準セット内容

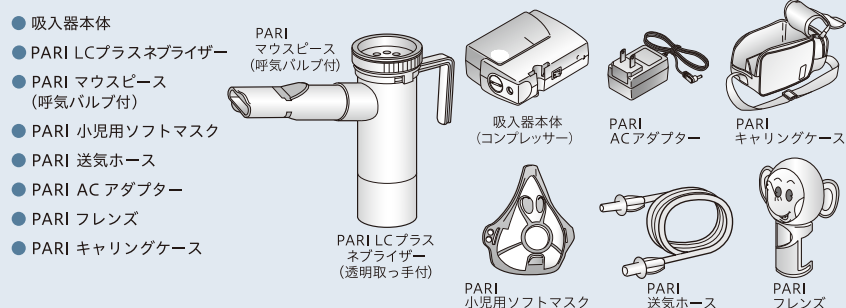

※小児用ソフトマスクは、くるリンもしくはびかりんのどちらかが付属しております。

エアロゾルの特性

分時噴霧量: 359mg/分
粒子径中央値: 3.68μm
5μm以下の粒子質量比率: 66.1%

〈測定条件〉
使用電源: 100V 60Hz
試験液: 0.9%生理食塩水 (5mℓ)
測定装置: Malvern社 Master Sizer X
流量: 3.8ℓ/分(ネブライザー接続時)
分時平均吸気流量: 20ℓ/分

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCプラスネブライザー	M23-001-02	022G8130	¥4,600
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりん)	M23-004-31	041G0742	¥1,900
PARI ACアダプター	M23-004-56	047G2103	¥8,750
PARI キャリングケース	M23-004-53	047E3000	¥3,800
PARI 送気ホース1.2m	M23-004-45	041B4591	¥1,500
PARI エアーフィルター	M23-004-48	085E1014	¥480
PARI フレンズ(シール無)	M23-004-96	022G7036	¥1,200
PARI フレンズ・シール(ゾウ)	M23-004-98	022D0046	¥250

別売品	注文コード	品 番	標準価格
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりん)	M23-004-31	041G0742	¥1,900
PARI バッテリーパック	M23-004-50	047G2000	¥10,000
PARI DC12Vシガーライター・アダプター	M23-004-55	047G2001	¥2,900

PARI イプシータ

下気道疾患に効果的な吸入治療を子供から大人まで
吸入器治療に適したネブライザー



1年保証
(コンプレッサーのみ)

標準セット内容

● 吸入器本体

● PARI LCプラスネブライザー


● PARI マウスピース (呼吸バルブ付)

● PARI 小児用ソフトマスク

● PARI 送気ホース

● PARI ACアダプター

● PARI キャリングケース

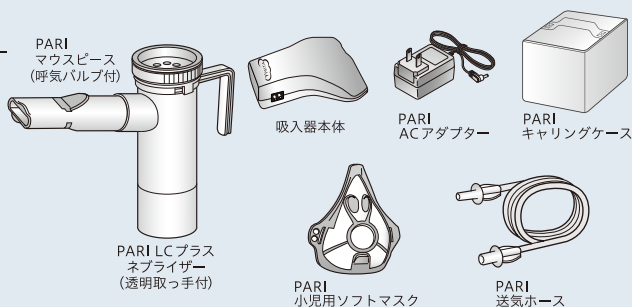

※小児用ソフトマスクは、くるリンもしくはびかりンのどちらかが付属しております。

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI LCプラスネブライザー	M23-001-02	022G8130	¥4,600
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりン)	M23-004-31	041G0742	¥1,900
PARI ACアダプター※	M23-004-88	047B2220	¥8,750
PARI キャリングケース	M23-004-89	147E0000	¥2,600
PARI 送気ホース1.2m	M23-004-45	041B4591	¥1,500
PARI エアーフィルター	M23-004-48	085E1014	¥480

※2017年6月以降にご購入いただいたイプシータに対応しております。

別売品	注文コード	品 番	標準価格
PARI 唾液トラップ	M23-004-35	041G0530	¥1,500
PARI フィルター・バルブセット	M23-004-36	041G0500	¥4,300
PARI 噴霧ボタン	M23-004-32	022G1000	¥2,400
PARI ベップSシステム	M23-004-91	018G4000	¥7,700
PARI ベビーマスク(新生児用)ベビーバント付	M23-004-22	041G0700	¥6,000
PARI ベビーマスク(小)ベビーバント付	M23-004-23	041G0701	¥6,000
PARI ベビーマスク(中)ベビーバント付	M23-004-24	041G0702	¥6,000
PARI ベビーマスク(大)ベビーバント付	M23-004-25	041G0703	¥6,000
PARI ベビーバント	M23-004-21	041E0701	¥1,300
PARI フレンズ(シール無)	M23-004-96	022G7036	¥1,200
PARI フレンズ・シール(ゾウ)	M23-004-98	022D0046	¥250
PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)	M23-004-30	041G0741	¥1,900
PARI 小児用ソフトマスク(びかりン)	M23-004-31	041G0742	¥1,900

注文コード M23-001-17

品 番 147G0012

標準価格 **¥18,000**

吸入器仕様

電 源 :
AC100V-240V 50-60Hz

流 量 : 3.8ℓ/分(ネブライザー接続時)

重 量 : 約490g

外形寸法 :
約W18.8×D18.7×H7.3cm

保証期間 : 1年(コンプレッサー)

一般医療機器

届出番号 : 27B1X00024000316

販 売 名 : PARI イプシータ

エアロゾルの特性

分時噴霧量 : 360mg/分

粒子径中央値 : 3.7 μm

5 μm以下の粒子質量比率 : 66%

〈測定条件〉
使用電源 : 100V 60Hz
試験液 : 試験液0.9%生理食塩水(5mℓ)
室温 : 23℃、湿度 : 50%
測定装置 : Malvern社 Master Sizer X
流量 : 3.8ℓ/分(ネブライザー接続時)
分時平均吸気流量 : 20ℓ/分

PARI スプリント ファミリー

ノズルインサートによって年齢や治療部位に適した粒子径のエアロゾルを発生させます

スプリントファミリーは、ノズルインサートを変えることによって異なった粒子径のエアロゾルを発生させ、年齢や治療部位に適した吸入治療を提供します。

スプリントネブライザーの構成部品は少なく、組み立てや分解も簡単なので、いつでも清潔に保つことができます。患者に使い勝手の良いデザインで、快適な吸入治療を可能にします。

- 5種類のノズルインサートはそれぞれ異なった粒子径のエアロゾルを生成します。
- 目標の気道治療部位に適した薬液を沈着させることができます。
- 乳幼児から成人まで中枢気道から末梢気道まで、広く使用できます。



下気道



上気道



インサート 青



成人、小児の中枢気道に適した標準粒子径



インサート 黄



小児、乳児の中枢気道に適した小粒子径



インサート 赤



末梢気道または生後1か月の乳児や未熟児に適した最小粒子径



インサート 白



咽頭部への沈着に適した粒子径



インサート 橙



振動により吸入薬剤を副鼻腔まで到達させます

※インサートのみの販売はございません。



PARI PIF コントロールシステム

(PIF : Peak Inspiration Flow 最大吸気流量)

PARI LCスプリントスターには、吸入速度が速すぎる場合に、適正速度に緩める補助構造を内蔵しました



小さなフラップによる大きな効果

PARI PIFコントロールシステムは、吸入速度が速すぎる(30ℓ/分以上)場合に、蓋裏側に装着された吸気フラップがわずかな隙間を残してネブライザーチャンバーを閉じる構造となっています。このシステムが吸気抵抗を増大させて、使用者に吸気速度が速すぎることを気付かせます。

この抵抗を感じたら、さらにゆっくりと吸気することで、吸入薬剤の沈着を改善します。呼吸しているときにこの抵抗を感じなければ、適切な速度で呼吸できています。

PARI PIFコントロールシステムの動き

ゆっくりと呼吸することで咽頭などへの吸入薬剤の沈着を減少させて、吸入薬剤を末梢気道まで導きます。

ネブライザーからのフィードバック(吸気抵抗の増大)が理想的な吸気速度(30ℓ/分以下)に安定させ、効果的な投薬を可能にします。

早すぎる吸入(高速吸入)




適切な吸入(低速吸入)



※喘息患者放射性エアロゾルの高速吸入及び低速吸入後のガンマカメラ画像

ネブライザー 一覧

どのネブライザーが最適？

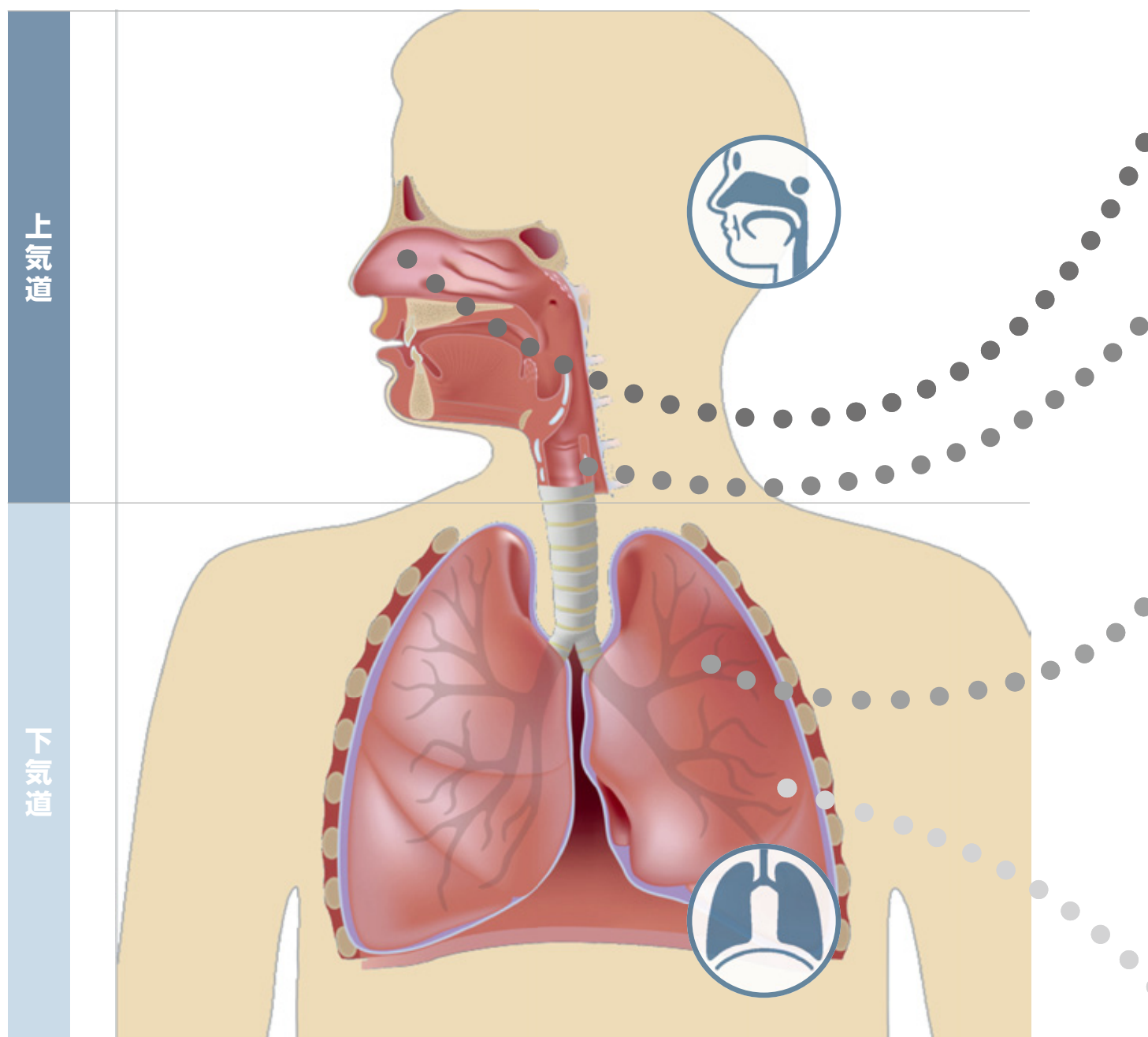

年齢と治療部位に適した選択

〈測定条件〉
使用電源:100V 60Hz、試験液:0.9%生理食塩水(5ml)、室温:23℃、湿度:50%
測定装置:Malvern社 Master Sizer X

吸入器

ネブライザー

スプレー

呼吸訓練器具
鼻ケア用品

製品一覧

	乳 児	小 児	成 人
副鼻腔		PARI LCスプリントジューヌス  注文コード M23-001-19* 標準価格 ¥8,730 分時噴霧量: 167mg/分 粒子径中央値: 3.2μm 5μm以下の粒子質量比率: 72% 〈PARI ジューヌス〉 流量: 4ℓ/分 分時平均吸気流量: 4.2ℓ/分	
上気道		PARI LCスプリントエクセレントネブライザー  注文コード M23-001-22** 標準価格 ¥8,400 分時噴霧量: 866mg/分 粒子径中央値: 7.4~8.8μm 5μm以下の粒子質量比率: 27.8~36.9% 〈PARI ジューヌス〉 流量: 4ℓ/分 分時平均吸気流量: 20ℓ/分	
中枢気道		PARI LCプラスネブライザー  注文コード M23-001-02** 標準価格 ¥4,600 分時噴霧量: 360mg/分 粒子径中央値: 3.7μm 5μm以下の粒子質量比率: 66% 〈PARI イプシオン〉 流量: 3.8ℓ/分 分時平均吸気流量: 20ℓ/分 分時噴霧量: 500mg/分 粒子径中央値: 3.5μm 5μm以下の粒子質量比率: 68% 〈中央配管〉 流量: 5ℓ/分 分時平均吸気流量: 20ℓ/分	
	PARI LCスプリントベビーネブライザー  注文コード M23-001-14** 標準価格 ¥11,300 分時噴霧量: 233mg/分 粒子径中央値: 2.6μm 5μm以下の粒子質量比率: 81% 〈PARI ボーイSX〉 流量: 4ℓ/分 分時平均吸気流量: 12ℓ/分	PARI LCスプリントジュニア  注文コード M23-001-07** 標準価格 ¥5,100 分時噴霧量: 240mg/分 粒子径中央値: 3.4μm 5μm以下の粒子質量比率: 70% 〈PARI ジュニアボーイSX〉 流量: 4ℓ/分 分時平均吸気流量: 12ℓ/分	PARI LCスプリントネブライザー  注文コード M23-001-13** 標準価格 ¥5,000 分時噴霧量: 442mg/分 粒子径中央値: 3.9μm 5μm以下の粒子質量比率: 63% 〈PARI ボーイSX〉 流量: 4ℓ/分 分時平均吸気流量: 20ℓ/分
末梢気道		PARI LCスプリントスター  注文コード M23-001-20** 標準価格 ¥9,200 分時噴霧量: 314mg/分 粒子径中央値: 2.7μm 5μm以下の粒子質量比率: 78% 〈PARI ボーイSX〉 流量: 4ℓ/分 分時平均吸気流量: 20ℓ/分 分時噴霧量: 233mg/分 粒子径中央値: 2.6μm 5μm以下の粒子質量比率: 81% 〈PARI ボーイSX〉 流量: 4ℓ/分 分時平均吸気流量: 12ℓ/分 分時噴霧量: 450mg/分 粒子径中央値: 2.2μm 5μm以下の粒子質量比率: 89% 〈中央配管〉 流量: 5ℓ/分 分時平均吸気流量: 20ℓ/分	

* 一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000318
販売名: PARI ジューヌス

** 一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000317
販売名: PARI ネブライザー



下気道

PARI LCプラスネブライザー(中央配管用)



注文コード M23-001-02

品 番 022G8130

標準価格 ¥4,600

一般医療機器

届出番号：27B1X00024000317

販 売 名：PARI ネブライザー

病院の中央配管システムに接続して使用できるので、酸素吸入も同時に可能です。
また、モーター音が無いので同室者の睡眠を妨げることなく夜間の吸入が行えます。

エアロゾルの特性

分時噴霧量： 360mg/分

粒子径中央値： 3.7 μ m5 μ m以下の粒子比率： 66%

〈イブシータ〉

分時噴霧量： 360mg/分

粒子径中央値： 3.7 μ m5 μ m以下の粒子質量比率： 66%流量： 3.8 ℓ /分分時平均吸入流量： 20 ℓ /分

〈中央配管〉

分時噴霧量： 500mg/分

粒子径中央値： 3.5 μ m5 μ m以下の粒子比率： 68%流量： 5 ℓ /分分時平均吸入流量： 20 ℓ /分

〈測定条件〉

使用電源：100V 60Hz


試験液：0.9%生理食塩水(5m ℓ)

室温：23℃、湿度：50%

測定装置：Malvern社 Master Sizer X

標準セット内容

- PARI LCプラスネブライザー本体
- PARI 送気ホース(中央配管用)
- PARI マウスピース(呼吸バルブ付)
- PARI 吸気バルブ(透明)
- PARI 送気ホースアダプター

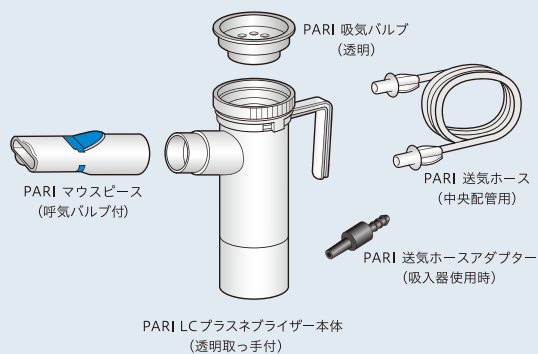

補充品	注文コード	品 番	標準価格
PARI 送気ホース1.2m,中央配管用	M23-004-46	041B4592	¥ 1,500
PARI 送気ホースアダプター,吸入器接続用	M23-004-77	041E2802	¥ 300

別売品	注文コード	品 番	標準価格
PARI 送気ホース1.2m,吸入器用(ジューヌス除く)	M23-004-45	041B4591	¥ 1,500
PARI 送気ホース1.9m,中央配管用	M23-004-74	041B4588	¥ 1,500



中央配管システムに対応

ネブライザーに専用のアクセサリ（別売）をご使用いただくことにより、吸入器と中央配管の使い分けが可能です。
現在、中央配管用でお使いの場合、専用の送気ホースアダプター（別売）のみで吸入器でお使いいただけます。



PARI 送気ホース1.2m (中央配管用)



注文コード	M23-004-46
品番	041B4592
標準価格	¥1,500

PARI 送気ホース1.9m (中央配管用)



注文コード	M23-004-74
品番	041B4588
標準価格	¥1,500

中央配管システム

PARI 送気ホース1.2m (吸入器用)



注文コード	M23-004-45
品番	041B4591
標準価格	¥1,500

吸入器



接続例

PARI 送気ホースアダプター



注文コード	M23-004-77
品番	041E2802
標準価格	¥300



下気道

PARI ボアテックス

吸入効率の高い金属製スパーサー



ボアテックスは定量噴霧吸入器 (MDI) を吸入する際に同調操作が困難な乳幼児や高齢者の吸入操作を容易にし、さらに口腔内への薬剤沈着を減らすために使用する吸入補助具です。

一般医療機器

届出番号：27B1X00024000347

販売名：PARI ボアテックス (VORTEX)

静電気が発生しにくいアルミニウム製

噴霧された薬剤のスパーサー内への静電気沈着を低減

アダプターにより渦状の気流が発生

吸気流量の少ない患者さんでも効率的に吸入が可能

汎用性のあるスパーサー

PARI ボアテックスのアダプターは市販されているほとんどのMDIに対応

衛生的

洗浄と消毒が可能

サイクロン効果

ご使用にあたって

子供から大人まで対応
年齢や患者に応じて適切なマスク
をご使用ください。



アダプターにより、スパーサー内に渦状の気流が発生するため、吸気流量の少ない乳幼児や高齢者の患者さんでも効率よく吸入できます。

PARI ボアテックス

吸入器

ネブライザー

スプレー

呼吸訓練器具
鼻ケア用品

製品一覧



PARI ボアテックス(マスクなし)

注文コード	M23-002-04
品番	051G5000
標準価格	¥1,700



PARI ボアテックス+小児マスク(てんテン)

2歳未満・ワンハンド操作レバー付

注文コード	M23-002-05
品番	051G5020
標準価格	¥2,550



PARI ボアテックス+小児マスク(かえルン)

2歳以上

注文コード	M23-002-06
品番	051G5040
標準価格	¥2,550



PARI ボアテックス+大人マスク

ワンハンド操作レバー付

注文コード	M23-002-07
品番	051G5060
標準価格	¥2,800

アクセサリ



PARI 小児マスク(てんテン)

2歳未満

注文コード	M23-004-67
品番	041G0712
標準価格	¥1,300



PARI 小児マスク(かえルン)

2歳以上

注文コード	M23-004-63
品番	041G0714
標準価格	¥1,300



PARI 大人用マスク

接続パーツ付

注文コード	M23-004-69
品番	051G0740
標準価格	¥2,200



PARI マウスピース

注文コード	M23-004-73
品番	051G5101
標準価格	¥1,000



下気道

PARI オーペップ

上気道の排痰呼吸訓練

標準セット内容

PARI オーペップ本体
ケース
ネックホルダー

注文コード M23-005-08

品 番 018G5000

標準価格 ¥8,500

一般医療機器

届出番号：27B1X00024000324

販 売 名：PARI オーペップ



慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺気腫、気管支拡張症、気管支炎、喘息など痰の貯留しやすい疾患の排痰呼吸訓練器

患者自身の呼気をPARI オーペップに繰り返し吹き込むことで、呼気に振動を伴った陽圧を発生させる排痰・呼吸訓練器です。

このメカニズムにより気管支を押し広げて下気道の分泌物の排出を容易にし、同時に気道閉塞を防ぎ、呼吸困難を軽減します。

- 使用方法が簡単
- 咬え易い楕円形のマウスピース
- 小型で携帯に便利なケース付
- 洗浄が容易で、オートクレーブ滅菌も可能（121℃～134℃）

PARI オーペップの作用機序



PARI オーペップを水平にすると、ステンレス製ボールは円錐型玉受けの底に位置し、円錐型玉受けの穴を塞ぎます。PARI オーペップに息を吐き出すと、ボールが抵抗となって気道に陽圧が発生し、これが気道を押し広げる力として働きます。呼気圧が上昇すると、ボールが浮き上がって呼気はキャップの穴から外部に出て行きます。



呼気圧が減少するとボールは転がって元の位置に戻り、円錐型玉受けの穴を塞ぎます。繰り返し起こるボールの浮沈によって振動と陽圧が発生し、気道の虚脱を防ぎ、気道分泌物の移動を促し、咳による排痰が容易になります。

PARI モンテゾール

花粉症や鼻風邪、慢性鼻炎、慢性副鼻腔炎、
術後の鼻洗浄にも効果的



PARI ジーヌスをお使いの前に
ご使用いただくと効果的です。

注文コード	M23-003-03
品番	177G1010
標準価格	¥3,500
一般医療機器	
届出番号	27B1X00024000322
販売名	PARI モンテゾール

- 鼻風邪、風邪の初期症状
- 鼻の乾燥、鼻の内側の硬くなったかさぶた
- 埃や粉塵による鼻腔の汚れ
- 花粉症
- 慢性鼻炎・慢性副鼻腔炎
- 鼻腔および副鼻腔の術後のケア

PARI モンテゾールは効果的な副鼻腔炎の治療をするために、副鼻腔の開口部までの鼻腔内をすずぎ洗浄します。この洗浄により副鼻腔炎治療に適した吸入器:PARI ジーヌスが効果的に治療ができる準備が可能です。

簡単なお手入れで衛生的

- 煮沸消毒可能
- コンパクトで機能的なデザイン
- 手の中にスムーズに納まり、容易に洗浄の力加減を調整可能

※市販の鼻用洗浄液を別途お買い求めください。

製品一覧

〈測定条件〉
使用電源:100V 60Hz、試験液:0.9%生理食塩水(5ml)、室温:23℃、湿度:50%
測定装置:Malvern社 Master Sizer X

	PARI LCスプリント ジーヌス(インサート橙) ジーヌス専用		注文コード	M23-001-19
			品 番	023G2800
			標準価格	¥8,730
	PARI LCスプリント トラケオ 送気ホース(吸入器用)		注文コード	M23-004-90
			品 番	023G1080
			標準価格	¥8,400
	PARI LCスプリント エクセレント ネブライザー(インサート白)		注文コード	M23-001-22
			品 番	023G1801
			標準価格	¥8,400
	PARI LCスプリント ネブライザー(インサート青)		注文コード	M23-001-13
			品 番	023G1007
			標準価格	¥5,000
	PARI LCスプリントジュニア (インサート黄)		注文コード	M23-001-07
			品 番	023G7005
			標準価格	¥5,100
	PARI LCスプリントベイビー ネブライザー(インサート赤)		注文コード	M23-001-14
			品 番	023G1471
			標準価格	¥11,300
	PARI LCプラス ネブライザー(中央配管用) 送気ホース(中央配管用) 送気ホースアダプター		注文コード	M23-001-02
			品 番	022G8130
			標準価格	¥4,600
	PARI LCスプリントスター (インサート赤)		注文コード	M23-001-20
			品 番	023G6002
			標準価格	¥9,200
	PARI LCスプリント イヤーパック 一般医療機器 届出番号:27B1X00024000317 販 売 名:PARI ネブライザー	PARI LCスプリントネブライザー (インサート青) 呼吸バルブ付マウスピース 送気ホース(吸入器用) エアフィルター	注文コード	M23-001-04
			品 番	023G1002
			標準価格	¥6,800
	PARI ベロックス イヤーパック 一般医療機器 届出番号:27B1X00024000332 販 売 名:PARI ベロックス	呼吸バルブ付ベロックスネブライザー マウスピース	注文コード	M23-005-04
			品 番	055G3010
			標準価格	¥13,000
	PARI LCプラス イヤーパック 一般医療機器 届出番号:27B1X00024000317 販 売 名:PARI ネブライザー	PARI LCプラスネブライザー 呼吸バルブ付マウスピース 送気ホース(吸入器用) 吸気バルブ(透明) エアフィルター	注文コード	M23-001-21
			品 番	022G8010
			標準価格	¥5,900
	PARI ベビーマスク(新生児用) ベビーベント付		注文コード	M23-004-22
			品 番	041G0700
			標準価格	¥6,000



PARI ベビーマスク(小/0～1歳)

ベビーベント付

注文コード	M23-004-23
品番	041G0701
標準価格	¥6,000



PARI ベビーマスク(中/1～3歳)

ベビーベント付

注文コード	M23-004-24
品番	041G0702
標準価格	¥6,000



PARI ベビーマスク(大/3歳以上)

ベビーベント付

注文コード	M23-004-25
品番	041G0703
標準価格	¥6,000



PARI スマートマスク

注文コード	M23-004-28
品番	041G0730
標準価格	¥11,000



PARI 大人用ソフトマスク

ネブライザー用

注文コード	M23-004-29
品番	041G0740
標準価格	¥1,900



PARI 小児用ソフトマスク(くるリン)

ネブライザー用

注文コード	M23-004-30
品番	041G0741
標準価格	¥1,900



PARI 小児用ソフトマスク(ぴかりん)

ネブライザー用

注文コード	M23-004-31
品番	041G0742
標準価格	¥1,900



PARI マウスピース

呼気バルブ無

注文コード	M23-004-10
品番	012E1720
標準価格	¥520



PARI マウスピース

呼気バルブ付

注文コード	M23-004-09
品番	022E3050
標準価格	¥1,600



PARI ベビーベント

ベビーマスク用

注文コード	M23-004-21
品番	041E0701
標準価格	¥1,300



PARI ノーズアダプター(マウスピース用)

※マウスピース 呼気バルブ無に接続して使用します。


注文コード	M23-004-38
品番	041E0135
標準価格	¥600



PARI ペップSシステム

一般医療機器
届出番号:27B1X00024000325
販売名:PARI ペップSシステム

注文コード	M23-004-91
品番	018G4000
標準価格	¥7,700

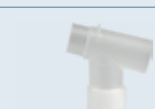	PARI フィルター・バルブセット ※マウスピースに呼気バルブが 付いてないタイプです。	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-36</td></tr><tr><td>品番</td><td>041G0500</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥4,300</td></tr></table>	注文コード	M23-004-36	品番	041G0500	標準価格	¥4,300
注文コード	M23-004-36							
品番	041G0500							
標準価格	¥4,300							
	PARI スマートマスクベビー ベロックス用	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-005-06</td></tr><tr><td>品番</td><td>055G4500</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥4,500</td></tr></table>	注文コード	M23-005-06	品番	055G4500	標準価格	¥4,500
注文コード	M23-005-06							
品番	055G4500							
標準価格	¥4,500							
	PARI ベロックスケア ベロックス用	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-005-01</td></tr><tr><td>品番</td><td>055G6100</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥2,500</td></tr></table>	注文コード	M23-005-01	品番	055G6100	標準価格	¥2,500
注文コード	M23-005-01							
品番	055G6100							
標準価格	¥2,500							
	PARI キャップ ベロックス用	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-005-07</td></tr><tr><td>品番</td><td>055G3500</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥750</td></tr></table>	注文コード	M23-005-07	品番	055G3500	標準価格	¥750
注文コード	M23-005-07							
品番	055G3500							
標準価格	¥750							
	PARI 滅菌用固定具 大人用ソフトマスク用 5個入	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-86</td></tr><tr><td>品番</td><td>041G0749</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥3,800</td></tr></table>	注文コード	M23-004-86	品番	041G0749	標準価格	¥3,800
注文コード	M23-004-86							
品番	041G0749							
標準価格	¥3,800							
	PARI 滅菌用固定具 小児用ソフトマスク用 5個入	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-85</td></tr><tr><td>品番</td><td>041G0748</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥3,800</td></tr></table>	注文コード	M23-004-85	品番	041G0748	標準価格	¥3,800
注文コード	M23-004-85							
品番	041G0748							
標準価格	¥3,800							
	PARI スプリントジーンズアプリケーションセット ジーンズ用	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-81</td></tr><tr><td>品番</td><td>023G2840</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥2,500</td></tr></table>	注文コード	M23-004-81	品番	023G2840	標準価格	¥2,500
注文コード	M23-004-81							
品番	023G2840							
標準価格	¥2,500							
	PARI トラケオセット	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-34</td></tr><tr><td>品番</td><td>025G0007</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥6,000</td></tr></table>	注文コード	M23-004-34	品番	025G0007	標準価格	¥6,000
注文コード	M23-004-34							
品番	025G0007							
標準価格	¥6,000							
	PARI 噴霧ボタン ネブライザー用	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-32</td></tr><tr><td>品番</td><td>022G1000</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥2,400</td></tr></table>	注文コード	M23-004-32	品番	022G1000	標準価格	¥2,400
注文コード	M23-004-32							
品番	022G1000							
標準価格	¥2,400							
	PARI 唾液トラップ	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-35</td></tr><tr><td>品番</td><td>041G0530</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥1,500</td></tr></table>	注文コード	M23-004-35	品番	041G0530	標準価格	¥1,500
注文コード	M23-004-35							
品番	041G0530							
標準価格	¥1,500							
	PARI 吸気バルブ LCプラスネブライザー用	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-18</td></tr><tr><td>品番</td><td>041B0510</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥1,300</td></tr></table>	注文コード	M23-004-18	品番	041B0510	標準価格	¥1,300
注文コード	M23-004-18							
品番	041B0510							
標準価格	¥1,300							
	PARI フィルターパッド 30枚入	<table><tr><td>注文コード</td><td>M23-004-37</td></tr><tr><td>品番</td><td>041B0522</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>¥6,800</td></tr></table>	注文コード	M23-004-37	品番	041B0522	標準価格	¥6,800
注文コード	M23-004-37							
品番	041B0522							
標準価格	¥6,800							



PARI 45°アングルベント

注文コード	M23-003-04
品番	041E0572
標準価格	¥500



PARI 送気ホースシステム

ジーヌス用

注文コード	M23-004-99
品番	041B4570
標準価格	¥3,000



PARI 送気ホース1.2m

吸入器用(ジーヌス除く)

注文コード	M23-004-45
品番	041B4591
標準価格	¥1,500



PARI 送気ホース1.2m

中央配管用

注文コード	M23-004-46
品番	041B4592
標準価格	¥1,500



PARI 送気ホース1.9m

中央配管用

注文コード	M23-004-74
品番	041B4588
標準価格	¥1,500



PARI 送気ホースアダプター

吸入器接続用

注文コード	M23-004-77
品番	041E2802
標準価格	¥300



PARI エアーフィルター

吸入器用

注文コード	M23-004-48
品番	085E1014
標準価格	¥480



PARI 小児用マスク(てんテン)

2歳未満(ボアテックス用)

注文コード	M23-004-67
品番	041G0712
標準価格	¥1,300



PARI 小児用マスク(かえルン)

2歳以上(ボアテックス用)

注文コード	M23-004-63
品番	041G0714
標準価格	¥1,300



PARI 大人用マスク

接続パーツ付(ボアテックス用)

注文コード	M23-004-69
品番	051G0740
標準価格	¥2,200



PARI マウスピース

ボアテックス用


注文コード	M23-004-73
品番	051G5101
標準価格	¥1,000



PARI ノーズクリップ

注文コード	M23-004-84
品番	041E3500
標準価格	¥850

	PARI 鼻栓 3個入	注文コード	M23-004-97
		品 番	041B0576
		標準価格	¥1,550
	PARI バッテリーパック ベーシック用 一般医療機器 届出番号: 27B1X00024000395 販 売 名: PARI ベーシック	注文コード	M23-004-50
		品 番	047G2000
		標準価格	¥10,000
	PARI コンプレッサー用電源コード SXシリーズ・ジューヌス用	注文コード	M23-004-78
		品 番	041E8238
		標準価格	¥2,400
	PARI DC12Vシガーライター・アダプター ベーシック用	注文コード	M23-004-55
		品 番	047G2001
		標準価格	¥2,900
	PARI ACアダプター ベーシック用	注文コード	M23-004-56
		品 番	047G2103
		標準価格	¥8,750
	PARI ACアダプター イブシータ用 ※2017年6月以降にご購入頂いたイブシータに対応しております。	注文コード	M23-004-88
		品 番	047B2220
		標準価格	¥8,750
	PARI ACアダプター ペロックス用	注文コード	M23-005-02
		品 番	055G7101
		標準価格	¥5,300
	PARI キャリングケース SXシリーズ・ジューヌス用	注文コード	M23-004-51
		品 番	085E1100
		標準価格	¥8,500
	PARI キャリングケース ベーシック用	注文コード	M23-004-53
		品 番	047E3000
		標準価格	¥3,800
	PARI キャリングケース イブシータ用	注文コード	M23-004-89
		品 番	147E0000
		標準価格	¥2,600
	PARI キャリングケース ペロックス用	注文コード	M23-005-03
		品 番	055G8000
		標準価格	¥2,600
	PARI フレンズ(シール無)	注文コード	M23-004-96
		品 番	022G7036
		標準価格	¥1,200

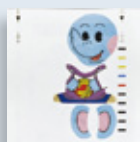

PARI フレンズ・シール(ゾウ)

注文コード	M23-004-98
品番	022D0046
標準価格	¥250

旧製品パーツ一覧



PARI ノズルクリーナー

LLネブライザー用

注文コード	M23-004-01
品番	012B1010
標準価格	¥280



PARI ネブライザー下部

LLネブライザー用

注文コード	M23-004-02
品番	012B1200
標準価格	¥9,700



PARI ネブライザー上部

LLネブライザー用

注文コード	M23-004-03
品番	012B1800
標準価格	¥6,300



PARI アダプター

LLネブライザー用

注文コード	M23-004-04
品番	012E1024
標準価格	¥710



PARI 薬液槽

LLネブライザー用

注文コード	M23-004-05
品番	012E1601
標準価格	¥880



PARI ノズル

LLネブライザー用

注文コード	M23-004-07
品番	019B2110
標準価格	¥7,600



PARI 吸気バルブ

LLネブライザー用

注文コード	M23-004-08
品番	022B0510
標準価格	¥1,300



PARI ACアダプター

イブシータ用

※2017年6月以前にご購入頂いたイブシータに対応しております。

注文コード	M23-004-87
品番	047B2220
標準価格	¥8,750



PARI マウスピース

旧ボアテックス用

注文コード	M23-004-70
品番	051B0100
標準価格	¥1,000



PARI リング状アダプター

旧ボアテックス用

注文コード	M23-004-71
品番	051G5014
標準価格	¥900



※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363