

SIGMAX サポーターカタログ

— ファンクショナルサポーター —

ファシリエイド
サポーター FACILIAID
SUPPORTER

EXAID
エクスエイド



BRAND CONCEPT

簡便に装着できる『ファシリエイドシリーズ』、
専門性を重視した『エクスエイドシリーズ』の
2つのシリーズで展開しています。

ファシリエイド サポーター FACILIAID SUPPORTER

facilitate + aid = Faciliaid

ファシリエイドとは

英語で「促進する」「容易にする」を表すfacilitateと

「助ける」という意味のaidとを組み合わせた

日本シグマックスのオリジナル名称です。

一日でも早く日常を取り戻すための支えになりたい。

そんな想いから生まれたのが

「ファシリエイドサポーター」です。

[excel][excellent]
+
[aid]
=
EXAID


「エクスエイド」とは、
英語の「excel」
「excellent」と「aid」を
組み合わせた日本シグマックス
オリジナル名称です。

「エクスエイドシリーズ」は、整形外科医の専門性をサポートする
機能性と固定力を重視したサポーターシリーズです。
サポート機能と装着時の快適性、フィット性の両立を重視。
医療従事者のニーズと患者様のニーズを常に考えています。

EXAID

足関節用サポーター

装着のしやすさ、固定機構などソフトサポートから
ハードサポートまでラインナップを取り揃えています。

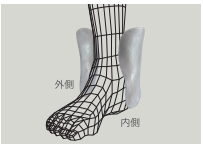サポート力	商品名 (掲載ページ)	サポート 機能	フィギュアエイト 機能	装着方式	製品特長
ソフトサポート ↑ ↓ ハードサポート	ファシリエイドサポーター 足くび  P8	足関節の 圧迫・保護	○	巻くだけで 簡単装着 	テーピングのフィギュ アエイトを応用 
	ファシリエイドサポーター 足くびソフト  P8	内反・外反 動揺性を 制限 前方動揺性を 制限	○	リアエントリー (後ろ開き)方式 	テーピングのフィギュ アエイトに基づいた設 計でソフトにサポート 
	ファシリエイドサポーター 足くびマルチ  P8	内反動揺性を 制限 前方動揺性を 制限	○	リアエントリー (後ろ開き)方式 	樹脂製ステーとゴム ストラップで足関節を サポート 
	エクスエイド アングル 3  P13	内反動揺性を 制限		リアエントリー (後ろ開き)方式 	内側にオリジナルス テーを配置し、内反動 揺性を制限 
	エクスエイド アングル FO  P14	内反・外反 動揺性を 制限 前方動揺性を 制限	○	フロントオープン 	フロントオープン形状 &FRTPガードでしっ かりフィット 
	エクスエイド アングル 6  P13	内反・外反 動揺性を 制限 前方動揺性を 制限	○	リアエントリー (後ろ開き)方式 	両側オリジナルガード でしっかりサポート 

※サポート力は当社独自の基準です。

膝関節用サポーター

汎用性のあるタイプから機能性に特化したタイプまで、幅広く取り揃えています。
膝関節のサポート機能を軸に、装着感やフィット性、着脱のしやすさなどの操作性も重視し

		保温	汎用性のあるタイプ			
			ショート丈			ロング丈
商品名 (掲載ページ)		ファジリエイド サポーター ひざ保温	ファジリエイド サポーター 膝ショート	エクスエイド ニー ショート	エクスエイド ニー アクティブ	エクスエイド ニー ライトスポーツ2
						
		P9	P9	P17	P18	P17
製品丈(膝裏部)		約32.0cm (ステッカー部分の長さ)	約18.0cm	約18.0cm	約19.5cm	約34.5cm
製品特長		裏地は起毛させ、空気の層による優しい暖かさ。	装着が簡単なショートタイプ。	膝蓋骨周囲に膝蓋骨の安定性を高めるパテラコンプレッションパッドを配置。	コンプレッションベルトは大腿部、下腿部に付け替え可能。様々な用途に使用可能。	フロントオープンタイプで装着しやすい。
製品機能	側方動揺性を制限 (アルミ製オフセットジョイントを配置)					
	フィット性の向上 (アクティブ樹脂ステーを配置)	○	○	○	○	○
	支持機能					
	膝蓋骨の安定性を図る			パテラコンプレッションパッド	パテラコンプレッションパッド	
	膝蓋靱帯を圧迫				PTパッド コンプレッションベルト	
	大腿四頭筋への圧迫				コンプレッションベルト	
	膝裏の素材 ダブルラッセル： 通気性がよい パワーネット： 薄くかさばりにくい	全面起毛素材	ダブルラッセル使用	ソフト ダブルラッセル使用	パワーネット使用	2way ダブルラッセル使用

手関節用サポーター

しっかり固定しながらも、日常生活の動作や把持運動を妨げない手関節用サポーター。

商品名 (掲載ページ)	製品の 左右	サポート 機能	手のひら側 ステー	甲側 ステー	小指側 ステー	製品特長
ファシリエイドサポーター 手くび  P6	左右兼用	掌屈、背屈の動きを制限	アルミ製ステー 	アルミ製ステー 	—	ステーの差し替えて左右兼用で使用可能。
エクスエイド リスト  P10	左右あり	掌屈、背屈、回内外の動きを制限し尺屈時もサポート。	アルミ製ステー 	アルミ製ステー 	樹脂製ステー 	3つのステーにより多方向に良好な固定肢位を保持。

その他部位

簡単に装着でき、快適にサポート。

ファシリエイドサポーター 肩  P7	ファシリエイドサポーター ひじ  P7	ファシリエイドサポーター 母指  P6
ファシリエイドサポーター 外反母趾  P9	ファシリエイドサポーター アキレス腱  P7	

ファシリエイド サポーター

FACILIAID
SUPPORTER

一日でも早く日常を取り戻すための支えになりたい。
そんな想いから生まれたのが「ファシリエイドサポーター」です。

ファシリエイドサポーター 手くび

FACILIAID SUPPORTER

¥2,500(税別)

用途 手関節のサポート

手関節の掌屈、背屈の動きを制限し、手関節を安静保持、サポート。



手のひら側と甲側にアルミ製のステーを配置し、手関節を固定、安静保持します。



左右兼用。ステーを入れ替えることで左右両方に使用できます。



手を通してストラップをとめるだけなので片手で簡単に装着できます。

●製品全体に立体メッシュ生地を使用し、ムレにくく快適な装着感です。 ●製品を丸ごと洗濯できます。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(手のひらの周囲)	1箱入数
303301	S	16cm~18cm	1コ
303302	M	18cm~20cm	
303303	L	20cm~22cm	

手のひらの周囲(示指と小指の付け根付近の周囲)に合わせて選んでください。



●ステーの挿入について

本品は手のひら側ステー、甲側ステーを付属していますが、納品時はステーが製品に挿入されておりません。装着される手の左右に応じて、ステーの挿入をお願いします。


ファシリエイドサポーター 母指

FACILIAID SUPPORTER

¥2,000(税別)

用途 母指CM関節のサポート、安静保持

片手で簡単に装着できる母指用サポーター。

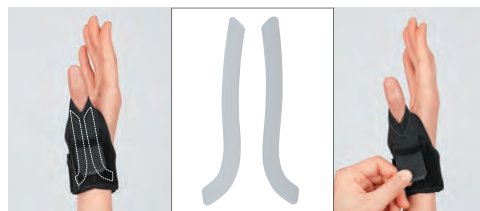

母指の固定、可動域の制限により母指CM関節を安静保持、サポート。芯材には樹脂ステーを使用し、母指周囲に内蔵しています。母指ストラップの位置を微調整することで、固定力の調節が可能です。



手を通してとめるだけなので、片手で簡単に装着できます。

●薄くかさばらないコンパクトな形状です。 ●製品を丸ごと洗濯できます。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(手くび周囲)	目安寸法(母指周囲)	1箱入数
303401	S	12.5cm~14.5cm	5.0cm~6.0cm	1コ
303402	M	14.5cm~16.5cm	5.5cm~6.5cm	
303403	L	16.5cm~19.0cm	6.0cm~7.5cm	

手くび周囲(手くびの一番細いところ)に合わせて選んでください。



計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

ファシリエイドサポーター ひじ

FACILIAID SUPPORTER

¥5,000(税別・1箱5袋入り)

用途 肘のサポート

適度な圧迫で、肘をサポート。簡単に装着できる肘用サポーター



適度な硬さを持つエルボーパッドにより、腱付着部を適度に圧迫します。




ループ形状にした本体に腕を通してとめるだけで、片手で簡単に装着できます。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(前腕周囲)	1箱入数	1袋入数
302601	フリーサイズ	19cm~31cm	5袋	1コ

腕の力を抜いた状態で、前腕の一番太い部分の周囲を計測してください。

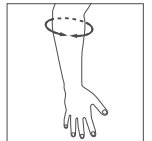

ファシリエイドサポーター 肩

FACILIAID SUPPORTER

¥2,980(税別)

用途 肩関節の保護・保温

肩を優しく包み込み、安静保持と保温。



一人でも装着できる肩用サポーター。薄く、フィット性のある本体素材で肩関節をサポートします。



面ファスナーの着脱により、サポート力の調節が可能です。また、ショルダーフラップをとめる際に腕を引き上げながらとめることで肩関節にかかる負担を軽減できます。




本体サポーターで肩関節を包み込むように覆うことで肩関節を保温。また、ショルダーフラップと本体サポーターの間に市販の使い捨てカイロを挿入することも可能です。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(肩の付け根の太さ)	1箱入数
302301	S	34cm~41cm	1コ
302302	M	41cm~48cm	
302303	L	48cm~55cm	

肩の付け根の太さに合わせて選んでください。肩の付け根の太さは腕の力を抜いた状態で肩峰と腋下を通る周囲を計測してください。

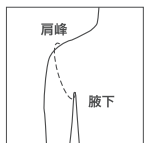

ファシリエイドサポーター アキレス腱

FACILIAID SUPPORTER

¥4,000(税別)

用途 アキレス腱の保護

腱とかかとの安定感を高め、アキレス腱をサポート。



アキレス腱パッドが、アキレス腱周辺を優しく包み込むようにサポートします。



アウトーストラップのテーピング機能部分に非伸縮素材を採用しており、アキレス腱が伸ばされる足関節の背屈を制限します。



テーピング機能(ヒールロック)を利用したアウトーストラップがかかとの安定感を高めます。アキレス腱付着部の踵骨の安定化を図ることでアキレス腱へのストレス(負荷)を軽減します。

●本体およびアウトーストラップは立体裁断によりフィット性を高めています。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数
302202	M	21cm~25cm	1コ
302203	L	25cm~29cm	

※製品の装着状態をわかりやすくするため素足に着用した画像を使用しています。実際に着用する際は靴下の上から装着してください。

日常使用されている靴のサイズに合わせて選んでください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

ファシリイドサポーター 足くび

FACILIAID SUPPORTER

¥6,000(税別・1箱5袋入り)

用途 足関節のサポート



テーピング理論(フィギュアエイト)を応用した巻くタイプのサポーター。しっかりした生地で足関節を圧迫・保護。



巻き始めがループ形状なので、足を通して簡単に巻くことができます。



テーピング理論(フィギュアエイト)を応用。しっかりした生地で足関節を圧迫・保護します。



サポーター本体に抗菌防臭加工を施した伸縮素材を使用。洗濯ができ繰り返し清潔に使用できます。

●色はベージュとブラックの2色。ブラックには幅の狭い子供用を用意しました。

左右兼用

※必ず靴下などの上から装着してください。

品番	種類	適用範囲(靴サイズ)	目安寸法(甲まわり)	製品幅	1箱入数	1袋入数
302501	一般用・ベージュ	20.0cm～27.5cm	21.0cm～27.0cm	7.5cm	5袋	1コ
302502	一般用・ブラック					
302512	子供用・ブラック	17.0cm～22.0cm	16.5cm～21.0cm	6.0cm	5袋	1コ

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。2サイズにまたがる場合は、甲まわりを目安に選んでください。

ファシリイドサポーター 足くびソフト

FACILIAID SUPPORTER

¥2,500(税別)

用途 内反・外反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、足関節の保護



フィギュアエイトに基づいたサポート機構で足関節をソフトにサポート。



テーピングのフィギュアエイトに基づいたサポート機構で足関節をサポート。面ファスナーはどこにでも接着できるため、フィット感や圧迫力の調節が可能です。



リアエントリー(後ろ開き)方式で簡単かつ的確な位置に装着できます。



サポーター本体の生地の芯材に薄く、通気性、伸縮性に優れた素材を採用し、装着時のかさばり軽減。靴が履きやすくムレにくい仕様です。

左右兼用

※必ず靴下などの上から装着してください。

品番	種類	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数
303502	M	19cm～25cm	1コ
303503	L	25cm～31cm	

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

ファシリイドサポーター 足くびマルチ

FACILIAID SUPPORTER

¥3,000(税別)

用途 内反動揺性や前方動揺性のある足関節のサポート、足関節の保護



軽度の内反動揺性、前方動揺性を制限する汎用性のある足関節サポーター。



足の内側に挿入した樹脂製のステーと前面でクロスするゴムストラップで足関節をサポートします。



ステーの取り外しができ、固定力の調節が可能。また、ステーを入れ替えることで、左右兼用で利用できるなどマルチユースな設計です。



リアエントリー(後ろ開き)方式で装着しやすい形状です。



サポーターの前面に薄い伸縮性生地を使用し、フィット性を向上しています。

足の小さい方にも対応

左右兼用

※必ず靴下などの上から装着してください。

品番	種類	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数
303201	S	18cm～21cm	1コ
303202	M	21cm～25cm	
303203	L	25cm～30cm	

日常使用されている靴サイズに合わせて選んでください。

●ステーの挿入について

本品はステーを1本付属していますが、納品時は製品に挿入されておりません。装着される足の左右に応じて、ステーの挿入をお願いいたします。



靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

ファシリイドサポーター 外反母趾


FACILIAID SUPPORTER

¥2,000(税別)

用途 足部横アーチ形成のサポート




足部の横アーチの形成をサポート。
薄い素材で靴が履け、日常生活を妨げない。

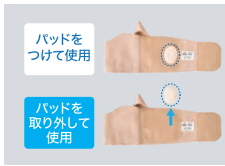

サポーター本体で中足骨部を圧迫し、足底部のパッドで中足骨部を押し上げるダブルサポート構造で、横アーチの形成、保持をサポートします。また、パッドは母趾球の位置に合わせて位置の調整や、必要に応じて取り外しが可能です。

●パッドを含め製品を丸ごと洗濯できます。

足囲に合わせて選んでください。足囲は母趾と第5趾のつけ根の周囲を計測してください。

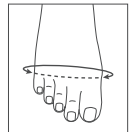

品番	種類	適用範囲(足囲)	1箱入数	品番	種類	適用範囲(足囲)	1箱入数
303601	右S	21cm~23cm	1コ	303611	左S	21cm~23cm	1コ
303602	右M	23cm~25cm		303612	左M	23cm~25cm	
303603	右L	25cm~27cm		303613	左L	25cm~27cm	

ファシリイドサポーター 膝ショート

FACILIAID SUPPORTER

¥2,000(税別)

用途 膝関節のサポート



着脱のしやすいフロントオープンタイプです。



装着時に指を引っ掛ける穴があるので、つかみやすく着脱しやすい形状です。



アクティブ樹脂ステーター内蔵で、カーリングやねじれを防ぎ、フィット性を高めています。




膝裏は通気性のよいダブルラッセルを使用しています。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数
302401	S	34cm~38cm	1コ	302404	LL	50cm~56cm	1コ
302402	M	38cm~44cm		302405	3L	56cm~62cm	
302403	L	44cm~50cm					

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から10cm上の大腿周囲を計測してください。

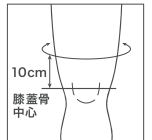

ファシリイドサポーター ひざ保温

FACILIAID SUPPORTER

¥3,900(税別)

用途 膝関節のサポート



膝関節の保温に。



脚の形状に合わせて編まれた立体構造。サポーター全面で均一に脚を圧迫します。



両サイドにアクティブ樹脂ステーターを内蔵。カーリングやねじれを防ぎ、フィット性を高めています。




裏地は起毛させ、空気の層による優しい暖かさです。

左右兼用

品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数	品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	1箱入数
303101	S	40cm~43cm	1コ	303104	LL	49cm~52cm	1コ
303102	M	43cm~46cm		303105	3L	52cm~55cm	
303103	L	46cm~49cm					

普通に立った状態で、膝蓋骨中心から16cm上の大腿周囲を計測してください。

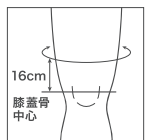

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。