



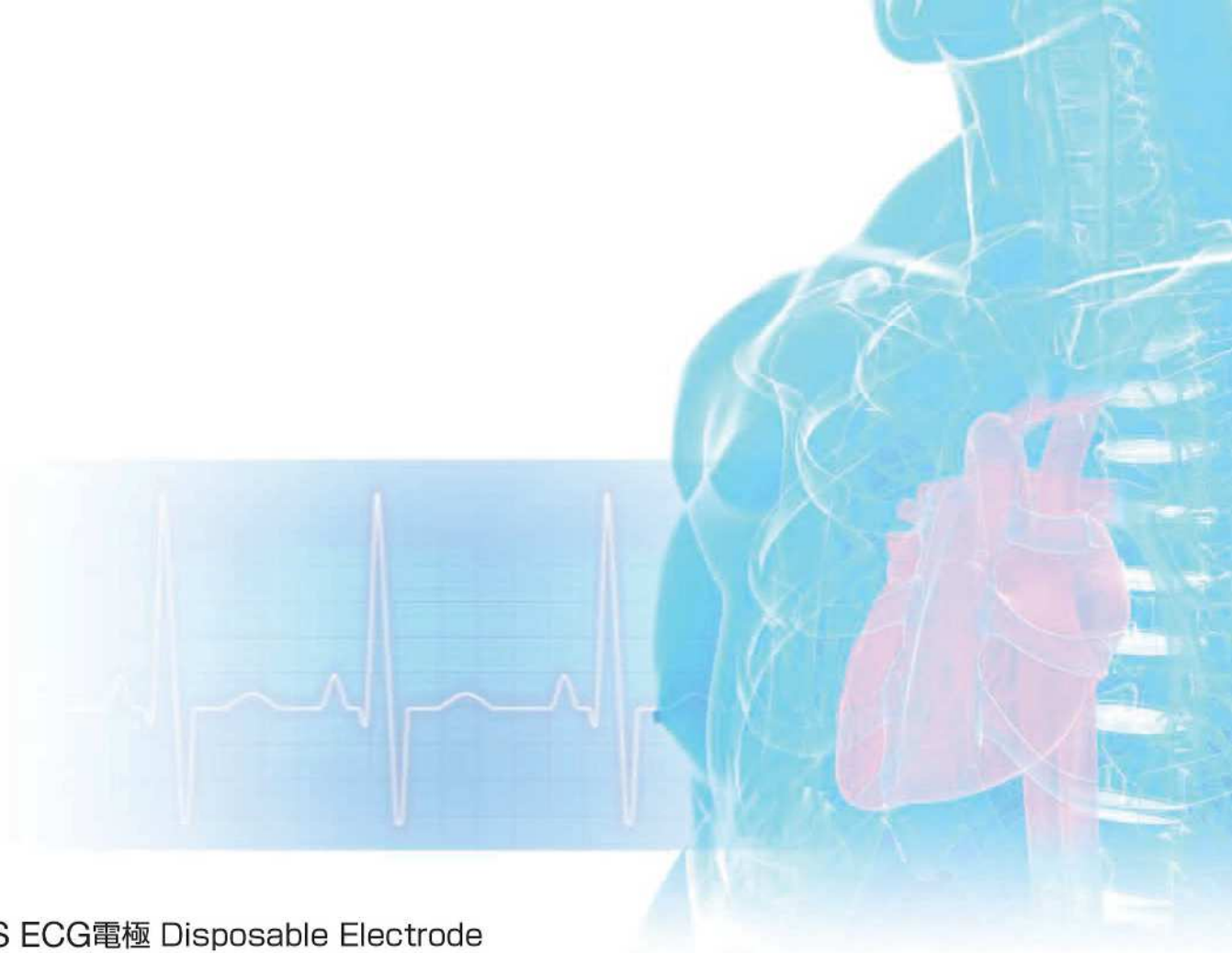

Inspad S ECG電極 Disposable Electrode

# Inspad S

インスパッド エス

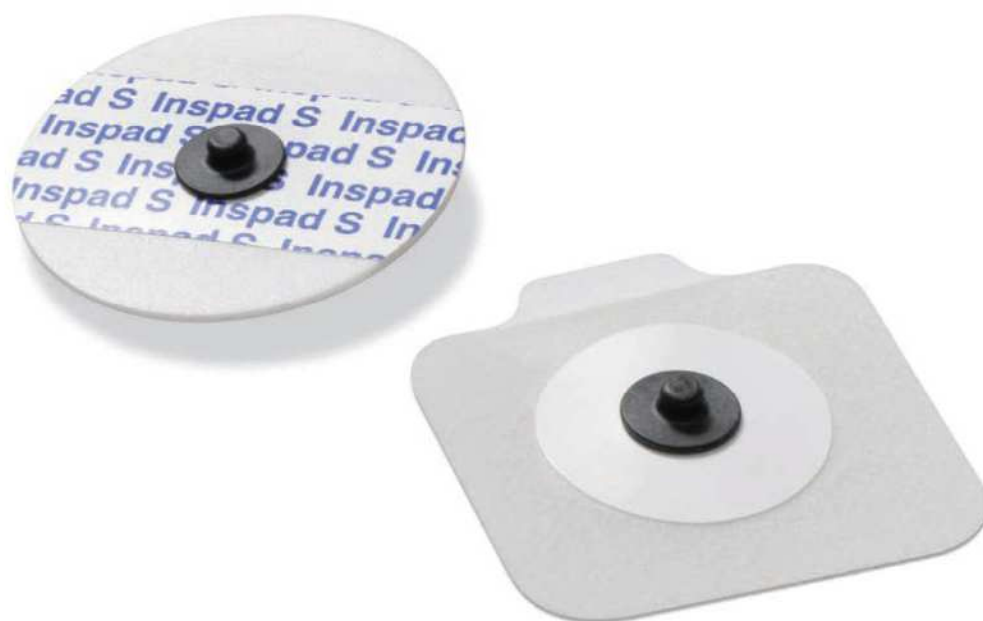

# Inspad S

インスパッド エス



## 電極設置のあらゆるシーンに対応

4種類のバックング素材と4つのゲルタイプの組合せで

8種類の製品をラインナップ。

手術用途から各種検査まで

医療の様々な状況に幅広く対応します。

素材には肌への刺激の低減と

肌触りの良さを追求しました。

### 用途、使用場所に応じて選べるゲルタイプ



#### 全面ゲルタイプ

肌への刺激を低減したタイプです。  
装着部位の貼り直しも可能です。




#### ソリッドゲルタイプ

素材が肌に残らず、拭き取りが  
不要です。



#### ウェットゲルタイプ

伝導性に優れたウェットゲル素材  
を使用しています。

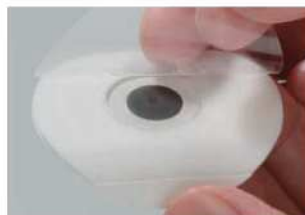

#### ソリッドゲルタイプ (スポットキューリング)


中央部のスポットにゲルを詰め、  
高い接着力を実現しました。

### 高い通気性と接着力を両立 多孔式ラミネートゲルタイプ


多孔式ラミネートゲルタイプ  
は電極と皮膚の接触面を広  
くすることで、高い接着力を  
実現しました。電極の動きを  
最小限に抑えることでずれや  
剥がれを防止できるため、  
長時間の使用でも安定した  
波形を得ることができます。  
また、無数の小さな穴が湿気  
を逃がし、粘着力の低下を  
防ぎます。




### 多孔式ラミネートゲルタイプと従来製品との比較

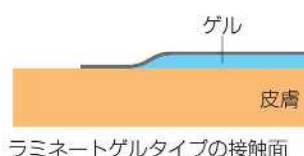


ラミネートゲルタイプの接触面

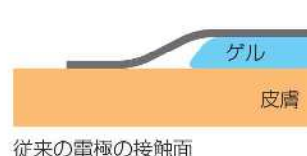

従来の電極の接触面

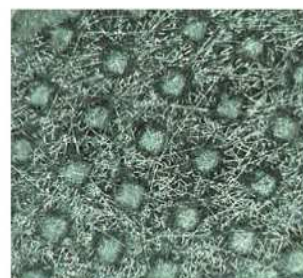

拡大写真：多孔式タイプ

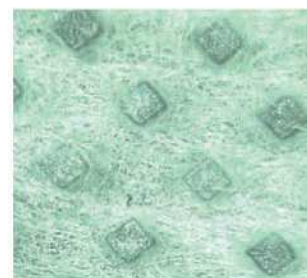

拡大写真：クロスタイプ

### X線に写りにくいカーボンスナップ

X線に写りにくいカーボン素材を  
使用。MRIにも対応しています。



## LINE-UP

### クロスタイプ

- 通気性の良いクロス素材
- 肌への刺激低減と肌触りの良さを実現


| カタログNo. | ゲルタイプ  | サイズ       |
|---------|--------|-----------|
| 8320    | 全面ゲル   | 外径：32mm   |
| 8160    | ソリッドゲル | 43mm×45mm |



### フォームタイプ

- 汗や薬液の浸透を防ぐフォーム素材

| カタログNo. | ゲルタイプ  | サイズ     |
|---------|--------|---------|
| 7160    | ソリッドゲル | 外径：43mm |

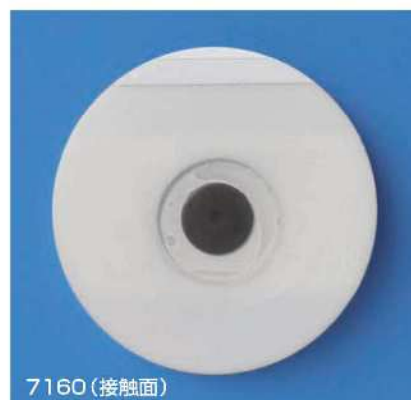

### 多孔式タイプ

- きわめて通気性の高い多孔素材
- 敏感な肌にもかぶれにくい

| カタログNo. | ゲルタイプ   | サイズ       |
|---------|---------|-----------|
| T626C   | ラミネートゲル | 45mm×43mm |



### 心電図検査用

| カタログNo. | サイズ       |
|---------|-----------|
| 2334    | 23mm×34mm |



各製品写真は原寸大です。

## Inspad S ECG電極 適応チャート

| カタログ番号 | タイプ                   | OP<br>室 | 病<br>棟 | 皮膚<br>疾患 | ICU/<br>CCU | 救命救急セン<br>ター | 血管造影室 | スト<br>レス<br>テスト | ホルター心電<br>図 | X<br>線<br>検査 | M<br>R<br>I<br>検査 | 心電<br>図<br>検査 | 小<br>児 |
|--------|-----------------------|---------|--------|----------|-------------|--------------|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------|
| 7160   | ソリッドゲル/フォームタイプ/ X-RAY | ●       | ○      |          | ○           | ○            | ●     |                 |             | ●            | ○                 |               |        |
| 8160   | ソリッドゲル/クロスタイプ/ X-RAY  |         | ●      |          | ●           | ○            | ○     |                 |             | ○            | ○                 |               |        |
| 8320   | 全面ゲル/クロスタイプ/ X-RAY    |         | ○      | ●        |             |              |       |                 | ○           | ○            | ○                 |               | ○      |
| T626C  | ラミネートゲル/多孔式タイプ/ X-RAY |         | ○      |          | ○           |              | ○     | ●               | ●           | ○            | ○                 |               | ○      |
| 2334   | 心電図検査用                |         |        |          |             |              |       |                 |             |              |                   | ●             |        |

● 推奨 ○ 使用可能

## Ordering Information

| カタログ番号 | 販売名            | 規格             | 包装単位             | 医療機器届出番号         |
|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 7160   | インスパッド S ECG電極 | ソリッドゲル フォームタイプ | 1000枚[1袋50枚×20袋] | 27B1X00116000027 |
| 8160   | インスパッド S ECG電極 | ソリッドゲル クロスタイプ  | 1000枚[1袋50枚×20袋] |                  |
| 8320   | インスパッド S ECG電極 | 全面ゲル クロスタイプ    | 600枚[1袋30枚×20袋]  |                  |
| T626C  | インスパッド S ECG電極 | ラミネートゲル 多孔式タイプ | 1000枚[1袋50枚×20袋] |                  |
| 2334   | インスパッド S ECG電極 | 心電図検査用         | 500枚[1袋100枚×5袋]  |                  |

■製造販売元

**Nex** 日本メディカルネクスト株式会社

札幌 ☎ 011-622-4361    仙台 ☎ 022-299-2371  
 関東 ☎ 048-642-3360    東京 ☎ 03-5665-2780  
 名古屋 ☎ 052-242-5201    大阪 ☎ 06-6862-8552  
 広島 ☎ 082-270-3071    福岡 ☎ 092-622-7730

●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

作成日：2022年1月第5版



(01)04540913079985