

HEINE EL3 LED ブライト

Simply bright LED illumination

シンプルな設計のスポット光

演色評価数(CRI):Ra>95 の照明光 で自然な色合いを実現

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

※演色評価数とは、色の見え方が自然光(太陽光)下での見え方に
どれだけ近いかを示す値。この値が100に近いほど、自然な色に見えます。



柔軟で機能的なアーム

アーム部はコイル状でグースネックになっており、自在に希望の位置へ動かすことができます。



自由な設置

キャスター付専用スタンドを取外すと処置台・壁面などに取付けが可能です。

※取付金具付属



付属品

壁固定用プレート、プラグ付きネジ 4個、ヒューズ 2個(予備)



SPEC

サイズ	(LEDライト部)約φ70×H150mm (アーム部)1050mm
重量	(本体)約1.8kg (専用スタンド)約2kg
照度	≥42,000lx(300mmにおいて)
色温度	4,000K(±400K)
照射野径	φ70~140mm(105±35mm)(300mmにおいて)
定格電源	AC100-240V 50-60Hz
定格入力	25VA max
LED寿命	約30,000時間
コード長	約2m
キャスター	約φ50mm、2輪ストッパー

HEINE EL3 LED ブライト

注文コード

136-060-25

品番

J008.27.014

標準価格

¥125,000

一般医療機器

届出番号:27B1X00024000326

販売名:HEINE EL3 LEDブライト




HEINE EL10 LEDエグザムライト

Examination Light with LED in HQ



LED NOW IN HEINE QUALITY.

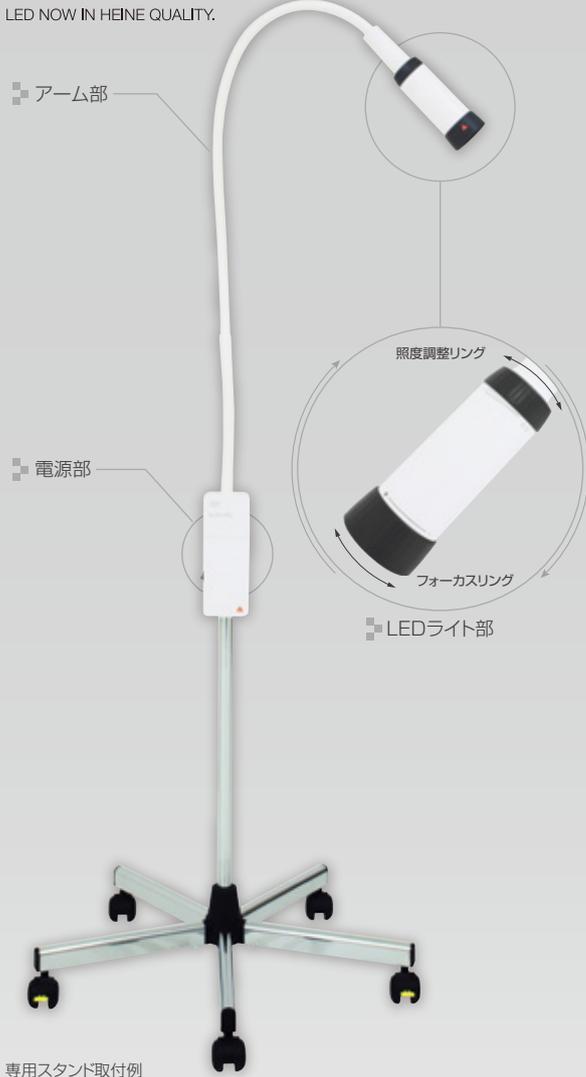

専用スタンド取付例

照度と照射野径の無段階調整

均一性に優れた明るさと自然な色合いを実現



均一性の高い照明光

高精度光学システムにより照射野内の明るさが均一です。



演色評価数

演色評価数 (CRI): Ra > 85 の照明光で自然な色合いを実現。

演色評価数とは.....色の見え方が自然光(太陽光)下での見え方とどれだけ近いかを示す値。この値が100に近いほど、自然な色に見えます。

照度と照射野径の無段階調整

照度は6,500~45,000lxの間で、照射野径は約φ85~140mmの間で無段階に調整できます。
※作業距離300mmにおいて

ワンハンド操作

照度と照射野径の調節はLEDライト部に取付けられたリングの操作により、片手で容易に行えます。

柔軟で機能的なアーム

アーム部はコイル状でグースネックになっており、自在に希望の位置へ動かすことができます。

自由な設置

キャスター付専用スタンドへの取付けも可能です。
※専用スタンドは別売です。

SPEC

サイズ	φ680×H2050mm(専用スタンド取付時) (LEDライト部)約φ60×H220mm (アーム部)1000mm	定格電源	AC100-240V 50-60Hz
重量	(本体)約3kg	定格入力	33VA max
照度	6,500~45,000lx(300mmにおいて)	LED寿命	約30,000時間
色温度	3,000~3,250K	コード長	約2m
照射野径	φ85~140mm(300mmにおいて)		

HEINE EL10 LEDエグザムライト*

注文コード	品番	標準価格
136-060-21	J008.27.001	¥198,000

HEINE EL10 LEDエグザムライト 専用スタンド

注文コード	品番	標準価格
136-060-22	Y096.50.010	¥36,320
重量: 約2kg キャスター: 約φ50mm、2輪ストップバー		

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色と実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

*一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000281
販売名: ハイネ EL10 LEDエグザムライト

Muranaka **村中医療器株式会社**
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd. <http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎06-6943-1431(代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363