

HEINE ダーマトスコープ



Dermatoscope Catalogue





LINE UP

- 01 | HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット 2
- 02 | HEINE DELTAone LEDダーマトスコープセット 5
- 03 | HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット 7
- 04 | HEINE NC2 LEDダーマトスコープセット 9
- 05 | HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット 11
- 06 | HEINE iC1 LEDダーマトスコープセット 13

HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット



HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット

φ30mmの大口径アクロマティックレンズと 偏光・非偏光のワンタッチ切換え照明で より正確に病変部へアプローチ

HEINE ダーマトスコープシリーズで最大のφ30mm視野径を持ち、
新しいアクロマティックレンズと演色性の高いLED照明で、歪みのないクリアな画像を得られます。
接触診断用のコンタクトプレートを外して、非接触での診断も可能です。
iPhone6/6S/7/8/SE 2020(第2世代)/X/XS/XR*¹には専用カバーケース、
iPhone以外のスマートフォンにはユニバーサルスマートフォンコネクタを装着することで
専用アプリ『HEINE DERM』を使用できます。

機能:

- ・ボディーマップに患部画像を記録
- ・患者情報の入力
- ・メールにて画像や情報を共有
- 無料アプリ『HEINE DERM』を使用



アクロマティックレンズ採用

アクロマティックレンズ採用でレンズ
周囲の歪みを修正して視野周縁部まで
クリアな画像が得られます。



偏光・非偏光照明


偏光照明は乱反射をおさえて、結晶構
造や血管構造を細部まで観察すること
ができます。



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

アクロマティックハイン光学システム
による鮮明な画像

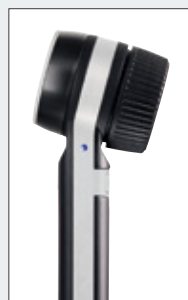

アングルの付いたデザイン
人間工学的なハンドル

偏光・非偏光への
切換えボタン

※電源投入直後は常に偏光仕様です。



HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット

注文コード	品 番	標準価格
136-089-29	K230.28.305	¥278,000

仕 様

光 源	LEDランプ 12個	レ ン ズ 径	約φ30mm
照 度	約25000lx	倍 率	約10倍(非接触/接触)
色 温 度	約5700K	重 量	約270g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra≥90	電 源	リチウムイオン充電電池
レ ン ズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約2時間※3 (偏光モード、最高輝度使用時)

[セット内容]

DELTA30 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、ACアダプター、USBケーブル、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)

無料アプリ『HEINE DERM』は
こちらよりダウンロードできます



iOS用



Android用※2



一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000422
販 売 名: HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープ

別売品

① スモールコンタクトプレート

注文コード	品 番	標準価格
136-089-36	K000.34.206	¥30,000

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています(プレート内径:8mm)



② 専用カバーケース

注文コード	品 番	対応機種	標準価格
136-089-32	K000.34.260	iPhone6/6S	¥10,500
136-089-33	K000.34.261	iPhone7/8/SE 2020(第2世代)	¥10,500
136-089-34	K000.34.262	iPhoneX/XS	¥10,500
136-089-35	K000.34.263	iPhoneXR	¥10,500

※専用カバーケースにはユニバーサルスマートフォンコネクタが付いています

③ ユニバーサルスマートフォンコネクタ

注文コード	品 番	対応機種	標準価格
136-089-37	K000.34.270	iPhone以外のスマートフォン	¥6,500


※市販のスマートフォン用カバーケースをご使用ください

補充品

④ A コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品 番	標準価格
136-089-30	K000.34.220	¥30,000

10mm(1mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます(プレート内径:30mm)

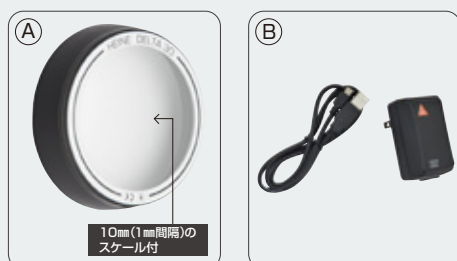

④ B USBケーブル(アダプター付)

注文コード	品 番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000

※1…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※2…Androidは米国及び他の国々で登録されたGoogle LLCの商標です。
※3…新品時の仕様

HEINE DELTAone LEDダーマトスコープセット

機動性と実用性を一つにした偏光・非偏光照明のワンタッチ切換え型ダーマトスコープ

持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

新しいアクロマティックレンズと演色性の高いLED照明で、歪みのないクリアな画像を得られます。

接触診断用コンタクトプレートを外して、非接触での診断も可能です。

iPhone6/6S/7/8/SE 2020(第2世代)/X/XS/XR*¹⁾には専用カバーケース、

iPhone以外のスマートフォンにはユニバーサルスマートフォンコネクタを装着することで

専用アプリ『HEINE DERM』を使用できます。



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

機能:

- ・ボディーマップに患部画像を記録
- ・患者情報の入力
- ・メールにて画像や情報を共有
- 無料アプリ『HEINE DERM』を使用



アクロマティックレンズ採用

アクロマティックレンズ採用でレンズ周囲の歪みを修正して視野周縁部までクリアな画像が得られます。



偏光・非偏光照明

偏光照明は乱反射をおさえて、結晶構造や血管構造を細部まで観察することができます。



HEINE DELTAone LEDダーマトスコープセット

注文コード	品 番	標準価格
136-089-31	K210.28.305	¥188,000

仕 様

光 源	LEDランプ 8個	レ ン ズ 径	約φ21mm
照 度	約17000lx	倍 率	約10倍(非接触/接触)
色 温 度	約5700K	重 量	約170g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra≥90	電 源	リチウムイオン充電電池
レ ン ズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約1時間 ^{※3} (偏光モード、最高輝度使用時)

[セット内容]

DELTAone LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、ACアダプター、USBケーブル、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)

無料アプリ「HEINE DERM」は
こちらよりダウンロードできます



iOS用

Android用^{※2}

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000421
販 売 名: HEINE DELTAone LEDダーマトスコープ

別売品

① スモールコンタクトプレート

注文コード	品 番	標準価格
136-089-39	K000.24.207	¥30,000

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています(プレート内径: 8mm)




補充品

④ コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品 番	標準価格
136-089-38	K000.34.222	¥30,000

10mm(1mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます(プレート内径: 21mm)

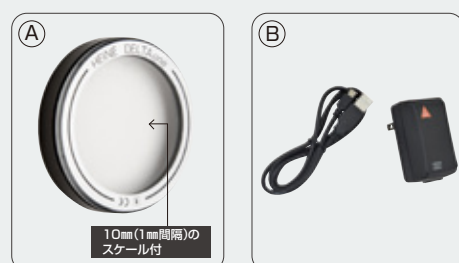

② 専用カバーケース

注文コード	品 番	対応機種	標準価格
136-089-32	K000.34.260	iPhone6/6S	¥10,500
136-089-33	K000.34.261	iPhone7/8/SE 2020(第2世代)	¥10,500
136-089-34	K000.34.262	iPhoneX/XS	¥10,500
136-089-35	K000.34.263	iPhoneXR	¥10,500

※専用カバーケースにはユニバーサルスマートフォンコネクタが付いています

③ ユニバーサルスマートフォンコネクタ

注文コード	品 番	対応機種	標準価格
136-089-37	K000.34.270	iPhone以外のスマートフォン	¥6,500

※市販のスマートフォン用カバーケースをご使用ください

⑤ USBケーブル(アダプター付)

注文コード	品 番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000

※1…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
 ※2…Androidは米国及び他の国々で登録されたGoogle LLCの商標です。
 ※3…新品時の仕様

HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット

ワンタッチで偏光と非偏光に切り換わる照明と 視野周縁部まで歪みのないクリアな画像

コンタクトプレートを付け換える必要がないため、偏光と非偏光の照明を連続で繰り返すことにより、従来のHEINE社製品より詳細に観察できるようになります。またデジタル一眼レフカメラに接続し鮮明な写真撮影をすることが可能です。



4つの高性能LED

明るく均一性のある照明は、演色性が高く自然な色を再現します。



アクロマティックレンズ採用

アクロマティックレンズ採用でレンズ周囲の歪みを修正して視野周縁部までクリアな画像が得られます。



デジタル一眼レフカメラ
接続イメージ



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

偏光・非偏光切換スイッチ


左右にある偏光・非偏光切換スイッチのどちらかを押すことで、偏光⇄非偏光の照明に切り換えることができます。

※電源投入直後は常に偏光仕様です。




一般医療機器
特定保守管理医療機器
届出番号: 27B1X00024000023
販売名: ハイネ診断用器具セット

<観察像の例>

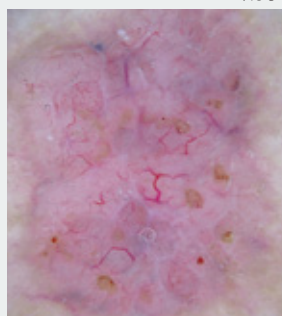

非偏光仕様

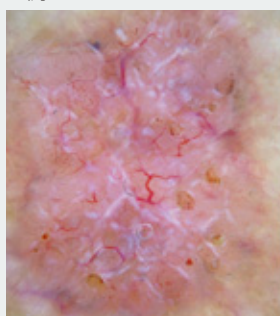

偏光仕様

HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット

注文コード	品番	標準価格
136-060-89	K262.10.118	¥230,000

仕 様

光源	白色LEDランプ 4個	レンズ径	約φ23mm
照度	約30000lx	倍率	約10～16倍
色温度	約5000K	重量	約400g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra≥80	電源	単2形アルカリ乾電池2本
レンズ	偏光・ノーマルレンズ	連続使用時間	約8時間

[セット内容]

DELTA20T LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、専用ハードケース、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)

別売品

① 一眼レフカメラアダプター SLR-C(キヤノン)

注文コード	品番	標準価格
136-061-91	K000.34.185	¥96,000

キヤノン デジタル一眼レフカメラに接続可能

② 一眼レフカメラアダプター SLR-N(ニコン)

注文コード	品番	標準価格
136-061-92	K000.34.186	¥96,000

ニコン デジタル一眼レフカメラに接続可能

③ アダプターコード

注文コード	品番	標準価格
136-061-23	X000.99.231	¥9,800

DELTA20T LEDダーマトスコープのヘッド部とハンドル部の間に接続することにより、ハンドルを机等に置いてヘッド部だけを操作することができるため、ハンドル部の重さが軽減され使い勝手が良くなります(長さ1.3m)

⑤ スモールコンタクトプレート



注文コード	品番	標準価格
136-089-17	K000.34.205	¥19,000

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています(プレート内径: 8mm)

④ コンタクトプレート(スケールなし)

注文コード	品番	標準価格
136-089-23	K000.34.217	¥33,000

スケールなしコンタクトプレート(プレート内径: 23mm)

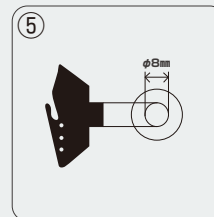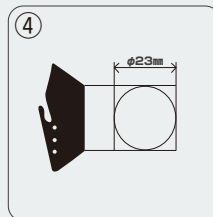


補充品

④ A コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品番	標準価格
136-089-22	K000.34.216	¥35,000

10mm(1mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます(プレート内径: 23mm)

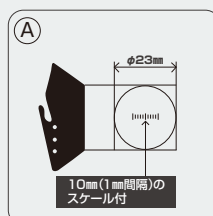

HEINE NC2 LEDダーマトスコープセット



コンタクトフリーの皮膚検査鏡

患者に接触することなく、診断が可能。約φ27mmのレンズを採用し、6倍の倍率で診断できます。



偏光照明

偏光照明は乱反射をおさえて、結晶構造や血管構造を細部まで観察することができます。



コンタクトプレート

接触診断用のコンタクトプレートを併用して、10倍の倍率(iPhone接続時30倍のデジタルズーム可能)でより詳細な画像が得られます。



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.

演色性の高い照明と使いやすさを実現した 非接触型のダーマトスコープ

NC2 LEDダーマトスコープは皮膚接触や消毒を行うことなく、非接触での診断ができます。

コンタクトプレートを併用して接触診断に変更することができます。

またハイネクオリティのLEDの照明は演色性が高く、より自然な色を再現します。

専用カバーケースを換えることでiPhone6/6S/7/8*に対応できます。

*…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000393
販売名: HEINE NC2 LEDダーマトスコープ

HEINE NC2 LEDダーマトスコープセット

注文コード		品 番		標準価格
136-061-97		D841.78.120		¥180,000
仕 様				
光 源	LEDランプ 2個	レ ン ズ 径	約φ27mm	
照 度	約20000lx	倍 率	約6倍/10倍(非接触/接触)	
色 温 度	約5000K	重 量	約180g(電池含む)	
演色評価数(CRI)	Ra≥80	電 源	リチウムイオン充電電池	
レ ン ズ	偏光レンズ	使 用 時 間	約90分 (満充電時、連続使用不可)	

[セット内容]

NC2 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、NC2 装着ボード、ACアダプター、USBケーブル、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)



無料アプリ「HEINE NC2」は
こちらよりダウンロードできます



iPhone 使用例



コンタクトプレート未装着



コンタクトプレート装着時

別売品

専用カバーケース

注文コード	品番	対応機種	標準価格
136-061-81	D000.78.127	iPhone7/8	¥5,000
136-061-82	D000.78.126	iPhone6/6S	¥5,000

補充品

USBケーブル(アダプター付)

注文コード	品番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000

HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



ポケットに収まるコンパクトデザイン

HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット

注文コード	品 番	標準価格
136-041-21	D887.78.021	¥50,000

- ・ポケットヘクリップをかけると電源がOffになります。
- ・病変部を10倍に拡大して観察ができ、視度調整機能で簡単にピント調整が可能。

仕 様

光 源	白色LEDランプ 1個	レ ン ズ 径	約φ23mm
照 度	約4000lx	倍 率	約10倍
色 温 度	約4000K	重 量	約180g(電池含む)
演色評価数(CRI)	Ra>95	電 源	単3形アルカリ乾電池2本
レ ン ズ	ノーマルレンズ	連 続 使 用 時 間	約10時間

※ 超音波ゼリーを使用します。

[セット内容]

ミニ3000LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケールなし)、専用ソフトケース、色素性皮膚病変の診断方法の概要(冊子)

一般医療機器
特定保守管理医療機器
届出番号:27B1X00024000023
販 売 名:ハイン診断用器具セット

別売品

① スモールコンタクトプレート

注文コード	品 番	標準価格
136-060-94	K000.34.008	¥15,000

指の間や耳介など狭い部位の病変の観察に適しています。
(プレート内径: 8mm)

② コンタクトプレート(スケール付)

注文コード	品 番	標準価格
136-088-03	D000.78.117	¥10,400


10mm(0.5mm間隔)の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます。
(プレート内径: 23mm)

補充品

① A コンタクトプレート(スケールなし)

注文コード	品 番	標準価格
136-088-02	D000.78.116	¥4,200

(プレート内径: 23mm)

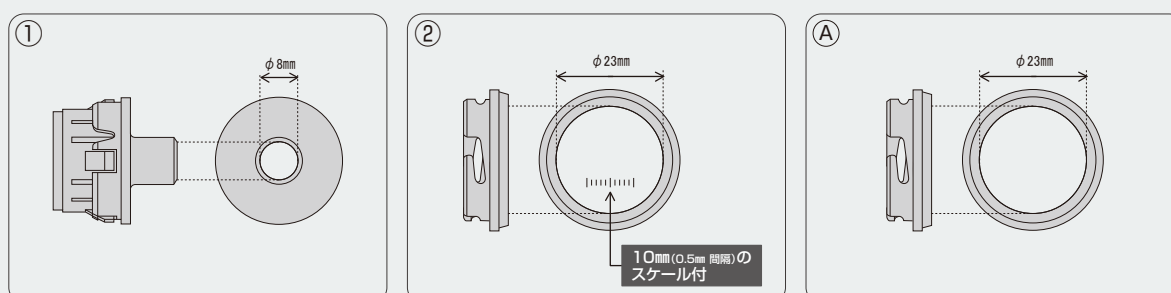

HEINE iC1 LEDダーマトスコープセット



LED HO
LED NOW IN HEINE QUALITY.



4つの高性能LED

明るく均一性のある照明は、演色性が高く自然な色を再現します。

撮影した画像をスクリーンですぐ確認できます

アプリ使用時最大15倍^{*1}(iPhone^{*2}内表示時:最大40倍まで拡大可能)まで拡大でき、12メガピクセル^{*1}のイメージ品質を提供します。USBで充電可能です。

^{*1}…iPhone6使用時

^{*2}…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

機能:

- ・ボディーマップに患部画像を記録
- ・患者情報の入力
- ・メールにて画像や情報を共有
- ・コメント欄あり
- ・アプリ内倍率…最大15倍

無料アプリ『HEINE iC1』を使用



無料アプリ『HEINE iC1』は
こちらよりダウンロードできます

HEINE iC1 LEDダーマトスコープセット

注文コード	品 番	対応機種	標準価格
136-061-14	K271.28.305	iPhone5/5S/SE	¥230,000
136-061-15	K270.28.305	iPhone6/6S	¥230,000
136-061-16	K273.28.305	iPhone7/8	¥230,000

仕 様

光 源	白色LEDランプ 4個	レ ン ズ 径	約φ23mm
色 温 度	約5000K	倍 率	最大15倍
演色評価数(CRI)	Ra≥80	電 源	バッテリー内蔵
レ ン ズ	偏光・ノーマルレンズ	連 続 使 用 時 間	約3.5時間(満充電時)

[セット内容]


iC1 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、USBケーブル、専用カバーケース

一般医療機器
届出番号:27B1X00024000369
販 売 名:HEINE iC1 LEDダーマトスコープ

偏光・非偏光切替スイッチ

上下にある偏光・非偏光切替スイッチのどちらかを押すことで偏光⇄非偏光の照明に切り換えることができます。

※電源投入直後は常に偏光仕様です。

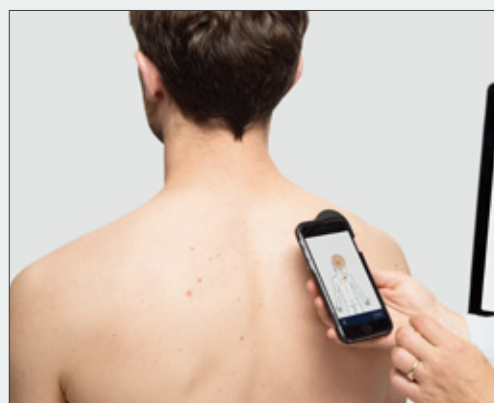

使用例

補充品

■USBケーブル(アダプター付)

注文コード	品 番	標準価格
136-061-48	X000.99.303	¥7,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
東 京 支 店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363