

**MMI<sup>®</sup> 蘇生バッグ Rescu-6 成人用**  
ディスポーザブル人工蘇生器



# ディスポーザブル蘇生バッグのため 組立ミスによる医療事故防止に貢献します。

シングルユースのため、交差感染のリスクを軽減します。



**A** 加圧限定弁は限定圧力(60cmH<sub>2</sub>O)に達すると弁が開き、余剰圧力を放出し肺損傷のリスクを軽減します。また、より高い圧力が必要な時はキャップを閉じることで加圧限定弁を機能させずに換気できます。

**B** CO<sub>2</sub>濃度測定器と接続可能なCO<sub>2</sub>測定ポートが付いています。接続時のみキャップを外します。(\*)



(\*)  
ETCO<sub>2</sub>のモニタリング数値を蘇生中止の判断材料の一つとして参考できます。American Heart Association心肺蘇生と救急血管治療のためのガイドラインアップデート2015で提唱されています。



**D** 柔らかな透明のエアークッションマスクがやさしくフィットします。

## MET 蘇生バッグ Rescu-6 成人用

注文コード	品番	標準価格
502-029-60	XMU0021	¥6,000

材質	(マスク)ポリ塩化ビニル (蘇生バッグ)スチレン-エチレン-ブタジエン-スチレン共重合体
容量	(蘇生バッグ)1500ml (酸素充填バッグ)1000ml
最大換気回数	30回/分
最大送気量	1200ml
マンメーター	測定範囲：0~60cmH <sub>2</sub> O(0~5.9kPa) 測定精度：60cmH <sub>2</sub> Oで±5cmH <sub>2</sub> O

**C** マノメーターは3色のカラーゲージで確認しやすく、適切な圧力で換気が可能です。

- 緑色：0～20cmH<sub>2</sub>O
- 黄色：21～40cmH<sub>2</sub>O
- 赤色：41～60cmH<sub>2</sub>O




**F** 蘇生バッグはDEHP・ラテックス不使用です。

酸素濃度グラフ付



F

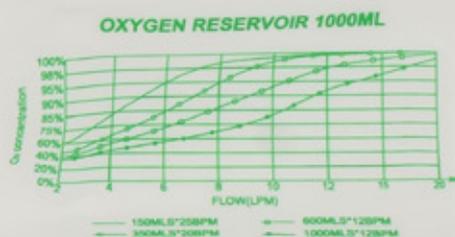

呼気方向調整  
コネクター

**E** 360度回転する呼気方向調整コネクターは排出する呼気の方角を調整できます。

構 成 品	名 称	個 数
	蘇生バッグ	1
	酸素充填バッグ	1
	呼気方向調整コネクター	1
	酸素延長チューブ	1
	マスク(成人用)	1
	収納バッグ	1

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

**Muranaka**  
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

**村中医療器 株式会社**

<http://www.muranaka.co.jp/>

本 社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360  
総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641 東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217  
札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122 仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448  
埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501 金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490  
名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116 村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121  
北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930  
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

RS2111.3000