


胚培養用シャーレ ART Culture Dishシリーズ


胚培養用シャーレ ART Culture Dish 12




商品コード	規格	外径 (蓋最外径)	入数	JANコード
87-434	ART Culture Dish 12	φ45mm (47.5mm)	5枚/箱	4987458874345

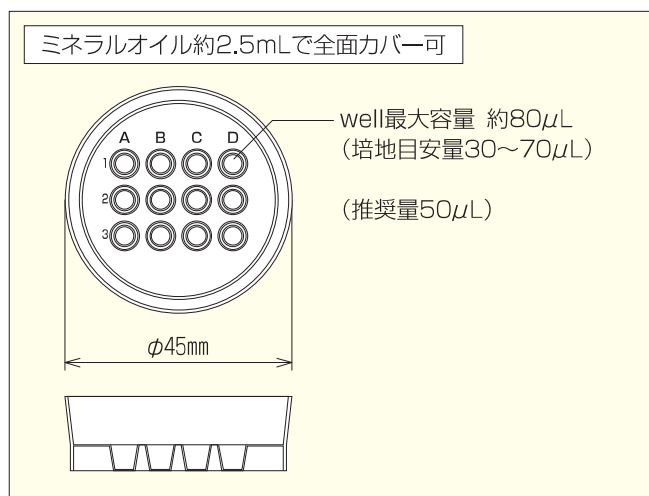


胚培養用シャーレ ART Culture Dish 16

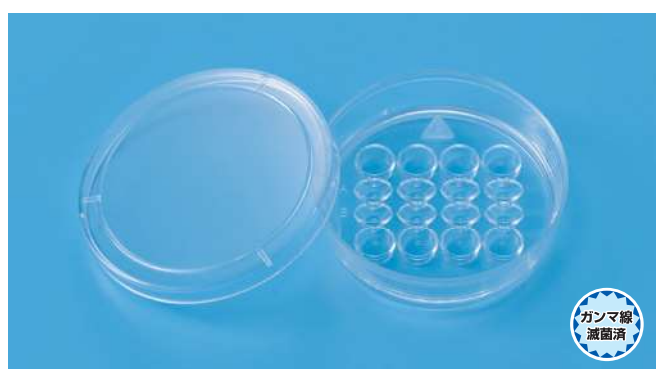


商品コード	規格	外径 (蓋最外径)	入数	JANコード
87-437	ART Culture Dish 16	φ45mm (47.5mm)	5枚/箱	4987458874376

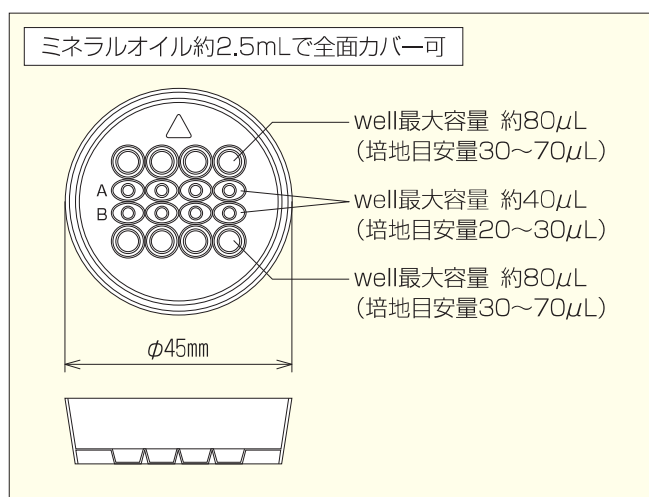

胚培養用シャーレ ART Culture Dish 22

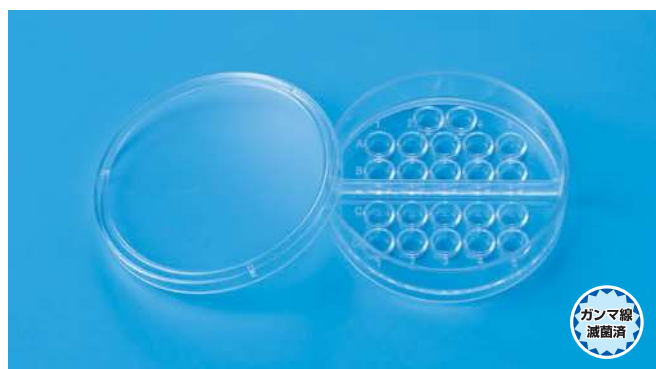

商品コード	規格	外径 (蓋最外径)	入数	JANコード
87-438	ART Culture Dish 22	φ55mm (57.5mm)	10枚/箱	4987458874383

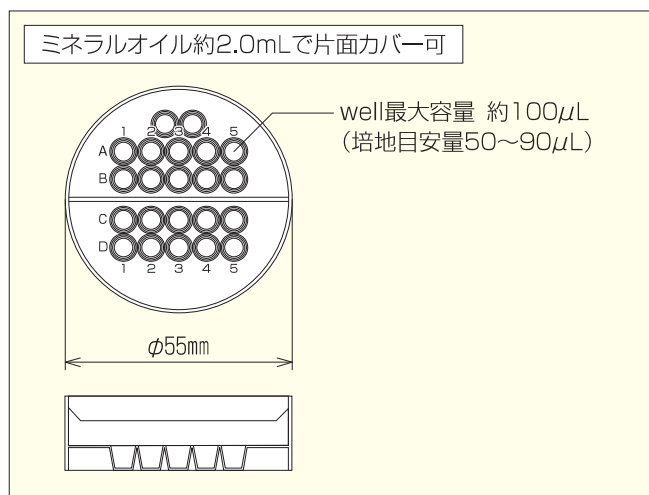


胚培養用シャーレ ART Culture Dish 25



商品コード	規格	外径 (蓋最外径)	入数	JANコード
87-435	ART Culture Dish 25	φ45mm (47.5mm)	5枚/箱	4987458874352

ミネラルオイル約2.5mLで全面カバー可

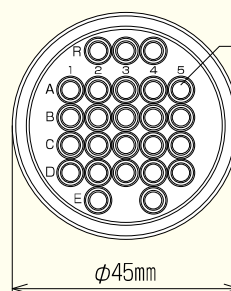

well最大容量 約54 μ L
(培地目安量20~50 μ L)
(推奨量30 μ L)




特長

- ミネラルオイルを使用して(全面*約2.5mLでカバー可能)、マイクロドロップレットによる卵子や胚の培養に適しています。
※ART Culture Dish 22は2.5mLで片面カバー可能です。
- well内で媒精または胚培養を行うため、ドロップレット間での接触がなく、ドロップ移動による混入の心配がありません。
- 全てのwell底面が同位置にあるので顕微鏡観察が容易にできます。また底面がホットプレートに接する構造のため、一定の温度に保つことができます。


胚培養用シャーレ ART Culture Dish Pro



商品コード	規格	入数	JANコード
87-439	ART Culture Dish Pro	10枚/箱	4987458874390

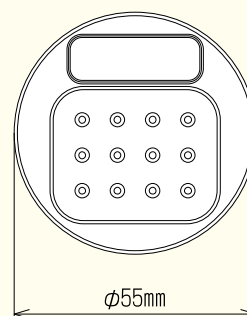

ドロップ目安量 20 μ L

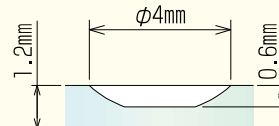

特長

- シャーレ内に患者情報の記載が可能のため、取り違いが予防できます。
- 培養はシャーレ内側で行うため、ミネラルオイルがインキュベータ内に溢れることはありません。
- 3.5mLのミネラルオイルでカバーして培養することができます。
- 合計12個のwellがあり、胚の個数に合わせて、培養用wellと洗浄用wellに振り分けることが可能です。

用途

- マイクロドロップレットによる胚の個別培養に適したシャーレです。